



# S-Monovette®

## Důležité informace k manipulaci


### Upozornění k objemu plnění

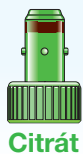

Citrát

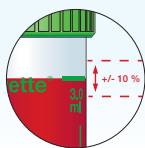

Mísící poměr 1:10 má bezprostřední vliv na výsledek měření a **musí být dodržen!**

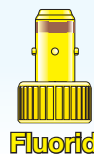

Fluorid

Jmenovitý objem **musí být dodržen**, aby zvýšená koncentrace fluoridu nezpůsobila hemolýzu!



EDTA

Objem plnění musí být **minimálně 80 %** dle normy ISO 6710 (1,2-2,0 mg EDTA/ml krve)!




Citrát-fluorid


Jmenovitý objem **musí být dodržen**, protože mísící poměr v souvislosti s tekutou preparací ovlivňuje výsledek analýzy!



BSG

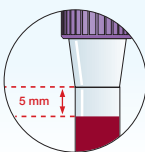


Mísící poměr 1:5 má bezprostřední vliv na výsledek měření a **musí být dodržen!**

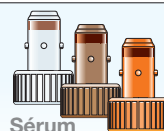

Sérum  
Sérum-gel  
Lithium heparin gel

Mísící poměr není důležitý, ovšem **objem by měl být dostatečný pro požadavky**, protože jinak bude nutná ještě druhá zkumavka S-Monovette®!


### Upozornění: Opatrně obraťte dnem vzhůru

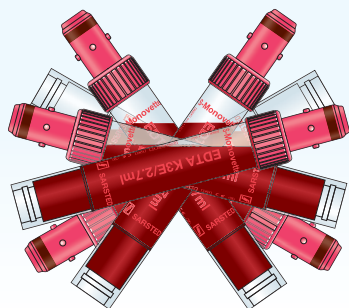


**Zkumavky S-Monovette ihned po odběru krve opatrně obraťte dnem vzhůru!**




EDTA

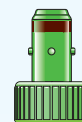

Citrát 1:10

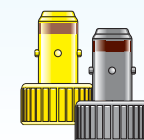


Fluorid/  
citrát-  
fluorid

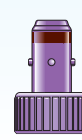

BSG

### Informace k uchování

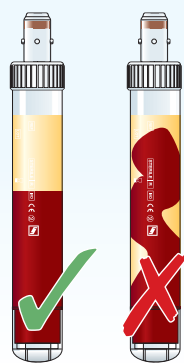

Zkumavky S-Monovette sérum a sérum gel **musí být** během fáze srážení (prvních 30 minut po odběru krve) **bezpodmínečně uchovávány ve svislé poloze**, protože jinak by po centrifugaci nedošlo k vytvoření zřetelné separační vrstvy, nýbrž hadovitěho tvaru krevního koláče.

### Značení čárovým kódem

**správně**

**chybně**



SARSTEDT spol. s r.o.  
Pod Pekárnami 338/12  
190 00 Praha 9  
Tel: +420 281 021 491  
Fax: +420 281 021 495  
info.cz@sarstedt.com  
www.sarstedt.com