


Minivette® POCT

Toma de muestra y dispensación de pequeños volúmenes de sangre para tests Point-of-Care



Minivette® POCT

- Fácil recogida de muestra gracias al comportamiento capilar
- Dispensación precisa de pequeños volúmenes de sangre
- Previene derrames durante la transferencia a la tarjeta de test
- Disponible en volúmenes de 10 µl, 20 µl, 50 µl, 100 µl y 200 µl
- Preparaciones: Neutra, Heparina y EDTA

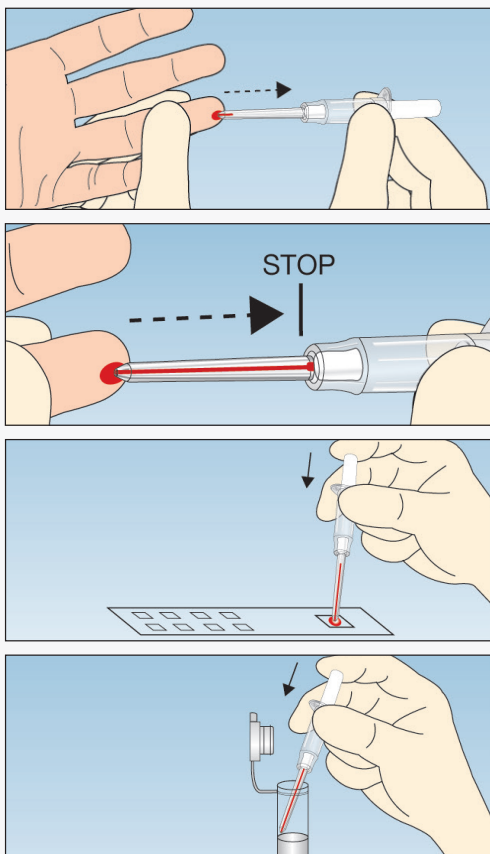

1 Sujetar la Minivette® POCT por debajo de las alas, en posición horizontal, ligeramente inclinada. No debe taparse el agujero de ventilación al final del pistón ni presionar el pistón hacia delante. Recoger la gota de sangre utilizando la punta capilar, asegurándose de la ausencia de burbujas de aire.

2 La recogida de sangre finaliza cuando la sangre alcanza el filtro al otro lado de la punta capilar.

3a Coloque la punta capilar en la zona de test y presione ligeramente el pistón hacia abajo para dispensar la sangre.

3b Como alternativa, también se puede dispensar la sangre en un microtubo.

Todas las muestras de sangre de pacientes deben tratarse como potencialmente infecciosas. Utilice guantes!

Información de pedido

Referencia	Descripción			Código color	Presentación
NUEVO 17.2111.920	Minivette® POCT con cierre	20 µl	neutra	blanco	embalaje unit. 100 unidades/caja interna / 1.000 unidades/caja
17.2111.010	Minivette® POCT	10 µl	neutra	blanco	200 unidades/caja interna / 2.000 unidades/caja
17.2111.020	Minivette® POCT	20 µl	neutra	blanco	
17.2111.050	Minivette® POCT	50 µl	neutra	blanco	
17.2111.100	Minivette® POCT	100 µl	neutra	blanco	
17.2111.200	Minivette® POCT	200 µl	neutra	blanco	
17.2112.020	Minivette® POCT	20 µl	Heparina-Litio	naranja	200 unidades/caja interna / 2.000 unidades/caja
17.2112.120	Minivette® POCT	20 µl	Heparina-Litio	verde	
17.2112.050	Minivette® POCT	50 µl	Heparina-Litio	naranja	
17.2112.150	Minivette® POCT	50 µl	Heparina-Litio	verde	
17.2112.100	Minivette® POCT	100 µl	Heparina-Litio	naranja	
17.2112.101	Minivette® POCT	100 µl	Heparina-Litio	verde	
17.2112.200	Minivette® POCT	200 µl	Heparina-Litio	naranja	150 unidades/caja interna / 1.500 unidades/caja
17.2112.201	Minivette® POCT	200 µl	Heparina-Litio	verde	
17.2113.020	Minivette® POCT	20 µl	EDTA	rojo	200 unidades/caja interna / 2.000 unidades/caja
17.2113.120	Minivette® POCT	20 µl	EDTA	violeta	
17.2113.050	Minivette® POCT	50 µl	EDTA	rojo	
17.2113.150	Minivette® POCT	50 µl	EDTA	violeta	
17.2113.101	Minivette® POCT	100 µl	EDTA	violeta	
17.2113.201	Minivette® POCT	200 µl	EDTA	violeta	150 unidades/caja interna / 1.500 unidades/caja

SARSTEDT, S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoríol
08430 LA ROCA DEL VALLÈS
Tel. 93.846.41.03
Fax 93.846.39.78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com