





# Minivette® POCT

Συλλογή και άμεση διανομή μικρών δειγμάτων τριχοειδικού ολικού αίματος για Point-of-Care tests



## Minivette® POCT

- Εύκολη λήψη δειγμάτων χάρη στα βέλτιστα τριχοειδή χαρακτηριστικά
- Ακριβής διανομή μικρών δειγμάτων ολικού αίματος
- Χωρίς σταγόνες κατά τη μεταφορά στην κάρτα εξέτασης
- Διαθέσιμο σε όγκους 10 μl, 20 μl, 50 μl, 100 μl και 200 μl
- Προπαρασκευές: Ουδέτερο, ηπαρίνη και EDTA

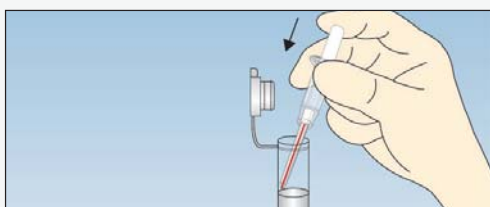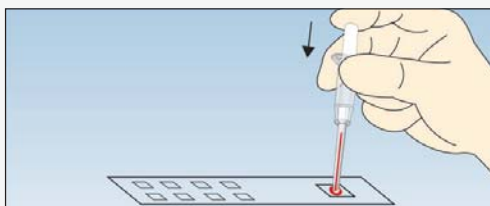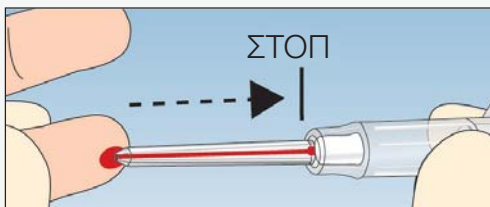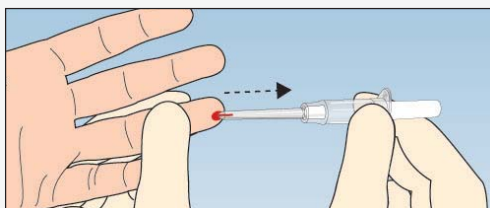

Να χειρίζεστε όλα τα δείγματα αίματος ασθενών ως δυνητικά μολυσματικά. Να φοράτε γάντια!

**1** Το Minivette® POCT συγκρατείται πλευρικά κάτω από τα πτερύγια συγκράτησης και κρατιέται σε οριζόντια ή ελαφρώς κεκλιμένη θέση. Κατά τη συλλογή των σταγόνων αίματος με το τριχοειδές άκρο, δεν πρέπει να είναι κλειστή η οπή εξαερισμού στο άκρο του εμβόλου. Μην πιέζετε το έμβολο και γεμίστε το τριχοειδές χωρίς φυσαλίδες αέρα.

**2** Η λήψη αίματος ολοκληρώνεται αυτόματα όταν το τριχοειδές γεμίσει με αίμα μέχρι το λευκό φίλτρο φραγής.

**3α** Τοποθετήστε το τριχοειδές άκρο στο πεδίο μέτρησης και διανείμετε πλήρως το δείγμα στην κάρτα εξέτασης μέσω απαλής πίεσης του εμβόλου.

**3β** Εναλλακτικά, το δείγμα μπορεί να διανεμηθεί σε ένα μικροφιαλίδιο δείγματος.

## Πληροφορίες παραγγελιών

Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	Χρωματική κωδικοποίηση	Συσκευασία
<b>NEO</b> 17.2111.920	Minivette® POCT με πώμα 20 µl ουδέτερο	λευκό	σε ατομική συσκευασία 100 τεμ./εσ.συσκ. / 1.000 τεμ./κουτί
17.2111.010	Minivette® POCT 10 µl ουδέτερο	λευκό	200 τεμ./εσ.συσκ. / 2.000 τεμ./κουτί
17.2111.020	Minivette® POCT 20 µl ουδέτερο	λευκό	
17.2111.050	Minivette® POCT 50 µl ουδέτερο	λευκό	
17.2111.100	Minivette® POCT 100 µl ουδέτερο	λευκό	
17.2111.200	Minivette® POCT 200 µl ουδέτερο	λευκό	150 τεμ./εσ.συσκ. / 1.500 τεμ./κουτί
17.2112.020	Minivette® POCT 20 µl Ηπαρίνη λιθίου	πορτοκαλί	200 τεμ./εσ.συσκ. / 2.000 τεμ./κουτί
17.2112.120	Minivette® POCT 20 µl Ηπαρίνη λιθίου	πράσινο	
17.2112.050	Minivette® POCT 50 µl Ηπαρίνη λιθίου	πορτοκαλί	
17.2112.150	Minivette® POCT 50 µl Ηπαρίνη λιθίου	πράσινο	
17.2112.100	Minivette® POCT 100 µl Ηπαρίνη λιθίου	πορτοκαλί	
17.2112.101	Minivette® POCT 100 µl Ηπαρίνη λιθίου	πράσινο	
17.2112.200	Minivette® POCT 200 µl Ηπαρίνη λιθίου	πορτοκαλί	150 τεμ./εσ.συσκ. / 1.500 τεμ./κουτί
17.2112.201	Minivette® POCT 200 µl Ηπαρίνη λιθίου	πράσινο	
17.2113.020	Minivette® POCT 20 µl EDTA	κόκκινο	200 τεμ./εσ.συσκ. / 2.000 τεμ./κουτί
17.2113.120	Minivette® POCT 20 µl EDTA	βιολετί	
17.2113.050	Minivette® POCT 50 µl EDTA	κόκκινο	
17.2113.150	Minivette® POCT 50 µl EDTA	βιολετί	
17.2113.101	Minivette® POCT 100 µl EDTA	βιολετί	
17.2113.201	Minivette® POCT 200 µl EDTA	βιολετί	

Sarstedt M.E.Π.Ε.  
Χρ. Μπέκα & Αγ. Δημητρίου  
190 04 Σπάτα Αττικής  
Τηλ. +30 210 6038274  
Fax +30 210 6038276  
info.gr@sarstedt.com  
www.sarstedt.com