

# Bruksanvisning Formalinsystem

## Tilkobling:



1. Sjekk at Formalinsystemet ikke lekker eller er skadet.
2. Sett Formalinsystemet i veggholder (REF. 95.1706).
3. Sjekk at kranen er i en horisontal stilling slik at den er låst.

## Utførelse:


1. Bruk engangshansker.
2. Sjekk at løsningen i formalinbeholderen er fargeløs, klar og transparent. Dette kan sees gjennom vinduet på beholderen. Kast hele formalinbeholderen dersom det er tydelig tegn på turbiditet eller misfarging.



3. Skru av lokket på S-Monovette® og legg vevsprøven i røret. Dersom du ikke ønsker å fylle S-Monovette® helt opp med formalin, kan du forsiktig dra stampelet til ønsket posisjon.\*
4. Skru på lokket på S-Monovette®.



5. Koble S-Monovette® til adapteren på Formalinsystemet. Lås den ved å vri S-Monovette® 2-3mm mot høyre.
6. Åpne kranen ved å vri den 90°. Du kan nå fylle S-Monovette® med formalin ved å dra ut stampelet.

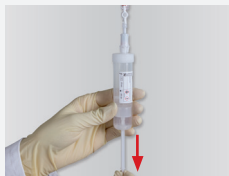

7. Pass på å dra stampelet ut til det låses i bunnen av S-Monovette® med et klikk. Ikke press stampelet opp igjen. Dersom dette skjer må Formalinsystemet kastes.
8. Lukk Formalinsystemet ved å vri kranen tilbake 90°. Koble S-Monovette® fra systemet ved å vri den 2-3mm mot venstre.



9. Pass på at kranen på Formalinsystemet er i en horisontal posisjon slik at den er låst.
10. Knekk av stampelet på S-Monovette®.

\* Dersom S-Monovette® ikke er helt fylt opp med formalin, burde S-Monovetten transporteres stående for å forhindre mulig uttørring av vevsprøven.

## Avfall:

1. Formalinholdige beholdere og engangshansker kastes i henhold til deres retningslinjer.