

Analýza krevních plynů

Odběrové systémy pro odběry arteriální, venózní a kapilární krve.



Preanalytika

Arteriální a venózní odběr & příslušenství

Menší objem vzorku

Pro analýzu krevních plynů arteriální a venózní krve je z důvodu nižšího zatížení pacientů vedle naší 2 ml verze ABR Monovette® program doplněn i o 1 ml verzi. Přítomnost Ca^{2+} balancovaného heparinu umožňuje použití těchto systémů i k stanovení elektrolytů.

Hygienické odvzdušnění

Po odběru krve je na ABR Monovette® nasazen odvzdušňovací filtr a vzduch obsažený ve zkumavce je hygienicky a bez rizika kontaminace vytlačen do filtru. Bez použití tampónu. Odvzdušňovací filtr může být použit pro ruční transport k analýze.



Kapilární odběr & příslušenství

Pro vzorky o malém objemu a pro optimální slučitelnost s přístroji nabízíme pro analýzu krevních plynů plastové kapiláry různých rozměrů a objemů.

Přesné výsledky

Speciální plast s nízkou propustností plynů v kombinaci s povlakem balancovaného heparinu Ca^{2+} zaručuje přesné výsledky testů. Speciální povrchová úprava umožňuje rychlé plnění kapilár pro snadný odběr a minimální riziko srážení.

Bezpečný odběr

Netříštivý plast zabraňuje riziku poranění a infekce uživatele.



Zátky

Dvě nabízené velikosti zátek zajišťují spolehlivé a bezpečné uzavření kapilár různých průměrů.



Míchací drátek a magnet

Pro optimální promíchání krevního vzorku s antikoagulantem slouží kuželkový magnet, jehož pomocí se pohybuje míchacím drátkem nahoru a dolů.



Informace pro objednání - ABR Monovette®

Popis	Balení vnitřní obal / Karton	Obj. č.
ABR Monovette® 1 ml	50 / 500	05.1146
ABR Monovette® 1 ml, individuální sterilní balení	100 / 500	05.1146.020
ABR Monovette® 2 ml	50 / 500	05.1147
ABR Monovette® 2 ml, individuální sterilní balení	100 / 500	05.1147.020
ABR Monovette® s odvodušňovacím filtrem, individuální sterilní balení	100 / 500	05.1147.048
Odvzdušňovací filtr	500 / 1.000	14.1148

Informace pro objednání - Plastové kapiláry na krevní plyny

Popis	ø/délka v mm	Balení ks	Obj. č.
Plastové kapiláry na krevní plyny, 100 µl	2,05/100	250	19.930.100
Plastové kapiláry na krevní plyny, 125 µl	2,05/110	250	19.930.125
Plastové kapiláry na krevní plyny, 140 µl	2,3/75	200	19.930.140
Plastové kapiláry na krevní plyny, 175 µl	2,3/100	200	19.930.175

Informace pro objednání - Sady plastových kapilár na krevní plyny

Popis	Balení ks	Obj. č.
Sada plastových kapilár na krevní plyny, 100 µl, víčka a míchací drátky	1.000	51.931.100
Sada plastových kapilár na krevní plyny, 125 µl, víčka a míchací drátky	1.000	51.931.125
Sada plastových kapilár na krevní plyny, 140 µl, víčka a míchací drátky	800	51.931.140
Sada plastových kapilár na krevní plyny, 175 µl, víčka a míchací drátky	800	51.931.175

Informace pro objednání - Příslušenství


Popis	Balení ks	Obj. č.
Zátka, bílá pro kapiláru na krevní plyny, vnější prům. 2,05 mm	500	65.935.205
Zátka, modrá pro kapiláru na krevní plyny, vnější prům. 2,3 mm	400	65.935.230
Míchací drátek, 1 mm, délka 9 mm	250	95.936
Kuželkový magnet, červený	10	95.937

Máte-li jakékoli dotazy:
Rádi vám pomůžeme!

Navštivte také naše internetové stránky:
www.sarstedt.com

Preanalytical Workflow made by SARSTEDT

Využijte synergie našich
vzájemně sladěných systémů.

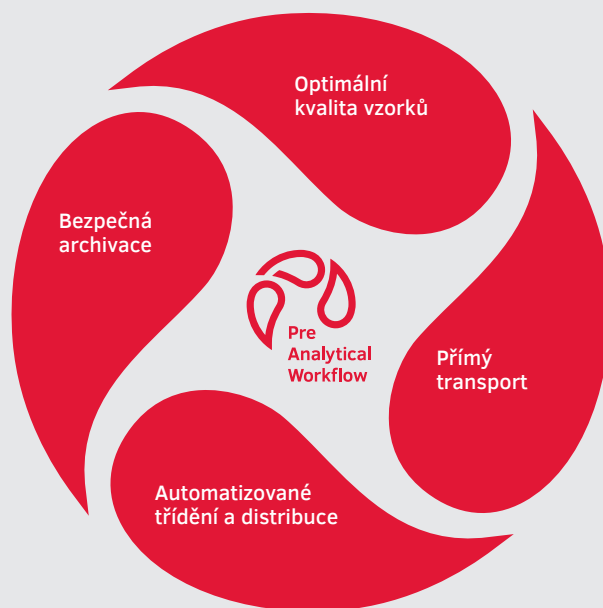

SARSTEDT spol. s r.o.

Pod Pekárnami 338/12
190 00 Praha 9

Tel: +420 281 021 491

Fax: +420 281 021 495

info.cz@sarstedt.com

www.sarstedt.com