

# Pediatric için kan alma sistemleri



Preanalitik

# Pediatric

En hassas hasta grubu olan çocuklar için özel, nazik bir kan alma sistemi gerekir

## En küçük hastalarımız

Bu özel hasta grubunda, kan alma sistemlerine ilişkin talepler olağanüstü derecede özgündür. Bu nedenle, bu ihtiyaçlara tam olarak odaklandık ve en küçük ve küçük hastalarda nazik ve mümkün olduğunca ağrısız bir kan alma işlemi sağlayan optimal kan alma sistemleri geliştirdik.

Özellikle, teşhis amacıyla yapılan kan kaybını en aza indirmek için dolum hacminin kesinlikle minimumda tutulmasına büyük önem verdik. Yaş, kilo ve kan hacmine bağlı olarak, hem kapiller hem de venöz kan alımı için kapsamlı bir ürün portföyü arasından seçiminizi yapabilirsiniz.



Yenidoğanlar



Küçük çocuklar



Okul çağındaki çocuklar



Uygulamanız için doğru  
S-Monovette® ürününü  
bulun:

[sarstedt.com/  
s-monovette-de](https://sarstedt.com/s-monovette-de)

İlgili yař gruplarının farklı gereksinimleri iin  
özümümüz var





# Neonatoloji – Yenidoğanlar

En küçük hastalar için minimum örnek hacmi

## Mikro iğne & Mikro numune tüpleri

Mikro iğne, neonatolojinin özel ihtiyaçları için tasarlanmıştır ve optimum ve güvenli bir ponksiyon sağlamak için dalgalı bir sapı vardır. Üç farklı çapta mevcuttur. İğnenin kısa tasarımı sayesinde, örnek alımı sırasında, minimum atıl hacim elde edilir. Güvenli ponksiyonun yanı sıra, mikro iğnenin sapı, iğnenin damardaki konumunu döndürme imkânı da sunar.

Bu, iğne açıklığındaki herhangi bir tıkanıklığı ortadan kaldırmayı kolaylaştırır. Vidalı kapaklı veya tıpalı uygun mikro numune tüpleri ve en küçük numune miktarları için Microvette'ler çeşitli hazırlamalarda mevcuttur. Nominal hacim aralığı, tüpün türüne ve hazırlanmasına bağlı olarak 100 µl'den maksimum 1,3 ml'ye kadar uzanır.

## Safety-Heel®

Doğuştan metabolik hastalıklar ve endokrinopatiler, uygun ve etkili tedavinin başlatılabilmesi için erken bir aşamada tanınmalıdır. Bu amaçla "yenidoğan taraması" yoluyla kan alınır (genellikle topuk ponksiyonu yoluyla). Yaygın lansetlerle yapılan işlemlerde, delme işlemi dikey bir şekilde gerçekleşir, bu da (çeşitli deri katmanlarını geçerek kemiğe ulaşma) yaralanma riskini ve hematoma oluşumunu çok yüksek yapar.

Bu genellikle ağrılı bir yöntem olduğundan, Safety-Heel® insizyon lanseti ile ağrı hissini azaltmak ve kan alımını optimize etmek için ideal bir seçenek sunulmaktadır. Safety-Heel® ile hematoma oluşumu, yarı dairesel bir kesi yolu ve sığ bir delme derinliği ile önlenir, böylece küçük hastalarınızın çok daha rahat bir şekilde taraması sağlanır.



Mikro iğne & Mikro numune tüpleri & Safety Heel®

## Kullanımı kolay



Mikro iğnenin dalgalı sapı, kolay ve güvenli bir ponksiyon sağlar. Damlatma için uygun bir mikro numune tüpü mevcuttur.



Safety-Heel®. Topuktaki lanset ile nazıkçe kan örneği alma...



# Bebek – Küçük çocuk

Küçük çocuklar için kapiller kan alma

## Güvenlikli-Lanset & Microvette®

Gereksinimlere bağlı olarak, Microvette® silindirik veya konik iç tüp şeklinde ve 100 ila 500 µl hacim aralığında mevcuttur. Kapiller kan alımı, bir 'uçtan uca kapiller tüp' (End-to-End-Kapillare) veya 'numune alma kenarı' (Abnahmerand) yöntemi ile yapılabilir.

Güvenlikli lansetinin farklı versiyonları, kullanıcının iğne derinliğini ve gerekli kan hacmini küçük hastaların anatomik koşullara ideal bir şekilde uyarlamasına olanak tanır.



Microvette®, Microvette® APT & Güvenlikli-Lanset

## Güvenlikli lanset ile farklı ponksiyon seçenekleri



## Microvette® – İki alım tekniği sayesinde daha fazla esneklik



Microvette® 100/200 –  
Uçtan uca kapiller tüp ile kan alımı



Microvette® 300/500 –  
Kan alma kenarı ile kan alma



# Küçük çocuk - Okul çağındaki çocuk

En küçük örnek hacmi ile venöz kan alımı

## Safety-Multifly® iğne & S-Monovette®


Modern analiz sistemlerinin hassasiyeti, kapsamlı rutin analizler için bile gerekli numune hacminin azaltılmasını sağlar. Özel tasarımı, küçültülmüş boyutları ve düşük nominal hacmi sayesinde S-Monovette® Pediatri, bu yüksek gereksinimleri ideal bir şekilde karşılar. Hassas kan alma işlemi için

aspirasyon tekniği kullanma imkânı sayesinde S-Monovette® Pediatri, pediatrik vakaların zor damar durumları için ideal bir çözüm sunar.



Safety-Multifly® iğne & S-Monovette®

Hasta ve kullanıcı için optimum güvenlik ve konfor

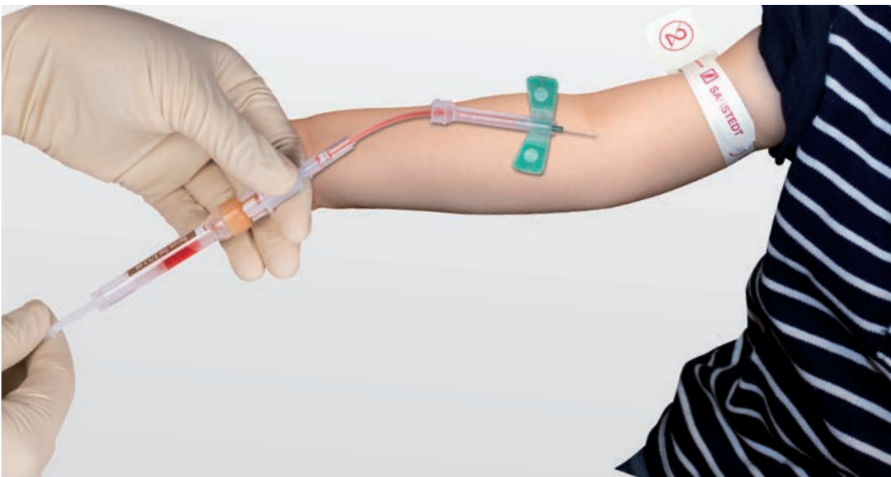

## S-Monovette®

### Serum jel CAT

| İçerik                                                                            | Nominal hacim | Kapaklı/kapaksız uzunluk x Ø | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş no. şeffaf etiketli | Sipariş no. renkli kâğıt etiketli | Sipariş no. önceden barkodlu etiketli |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1,1 ml        | 66/82 x 8 mm                 | ■           | 50/50/500              |                             | 06.1667.001                       |                                       |

### Serum CAT

| İçerik                                                                            | Nominal hacim | Kapaklı/kapaksız uzunluk x Ø | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş no. şeffaf etiketli | Sipariş no. renkli kâğıt etiketli | Sipariş no. önceden barkodlu etiketli |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1,2 ml        | 66/82 x 8 mm                 | ■           | 50/50/500              |                             | 06.1663.100                       |                                       |
|                                                                                   | 1,6 ml        | 75/91 x 13 mm                | ■           | 50/50/500              | 04.2911.200                 |                                   |                                       |

### Lithium Heparin Jel LH

| İçerik                                                                            | Nominal hacim | Kapaklı/kapaksız uzunluk x Ø | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş no. şeffaf etiketli | Sipariş no. renkli kâğıt etiketli | Sipariş no. önceden barkodlu etiketli |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1,1 ml        | 66/82 x 8 mm                 | ■           | 50/50/500              |                             | 06.1669.100                       |                                       |

### Lithium Heparin LH

| İçerik                                                                            | Nominal hacim | Kapaklı/kapaksız uzunluk x Ø | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş no. şeffaf etiketli | Sipariş no. renkli kâğıt etiketli | Sipariş no. önceden barkodlu etiketli |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1,2 ml        | 66/82 x 8 mm                 | ■           | 50/50/500              |                             | 06.1666.100                       |                                       |
|                                                                                   | 1,6 ml        | 75/91 x 13 mm                | ■           | 50/50/500              | 04.2913.200                 |                                   |                                       |

### Sitrat 9NC, %3,2

| İçerik                                                                              | Nominal hacim | Kapaklı/kapaksız uzunluk x Ø | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş no. şeffaf etiketli | Sipariş no. renkli kâğıt etiketli | Sipariş no. önceden barkodlu etiketli |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1,4 ml        | 66/82 x 8 mm                 | ■           |                        |                             | 06.1668.100                       |                                       |
|                                                                                     | 1,8 ml        | 75/91 x 13 mm                | ■           | 50/50/500              | 04.1955.200                 | 04.1955.100                       | 04.1955.288                           |

### EDTA K3E

| İçerik                                                                              | Nominal hacim | Kapaklı/kapaksız uzunluk x Ø | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş no. şeffaf etiketli | Sipariş no. renkli kâğıt etiketli | Sipariş no. önceden barkodlu etiketli |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1,2 ml        | 66/82 x 8 mm                 | ■           |                        |                             | 06.1664.100                       |                                       |
|                                                                                     | 1,6 ml        | 66/82 x 11 mm                | ■           | 50/50/500              | 05.1081.200                 | 05.1081.100                       |                                       |
|                                                                                     | 1,6 ml        | 75/91 x 13 mm                | ■           | 50/50/500              |                             | 04.1956.100                       |                                       |
|                                                                                     | 1,8 ml        | 65/81 x 13 mm                | ■           | 50/50/500              |                             | 04.1951.100                       | 04.1951.288                           |

### Fluorid EDTA FE

| İçerik                                                                              | Nominal hacim | Kapaklı/kapaksız uzunluk x Ø | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş no. şeffaf etiketli | Sipariş no. renkli kâğıt etiketli | Sipariş no. önceden barkodlu etiketli |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|  | 1,2 ml        | 66/82 x 8 mm                 | ■           |                        |                             | 06.1665.100                       |                                       |

## Safety-Multifly® iğneler, mikro numune tüpleri ve mikro iğneler

### S-Monovette® için Safety-Multifly® iğne

| Şekil                                                                             | Ø/uzunluk    | Renk kodu | Model                       | Hortum uzunluğu | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | 0,8 mm/19 mm | ■         | 21G x 3/4"<br>Çoklu adaptör | 80 mm           | 1/120/480              | 480                                  | 85.1638.205 |
|  | 0,6 mm/19 mm | ■         | 23G x 3/4"<br>Çoklu adaptör | 80 mm           | 1/120/480              | 480                                  | 85.1640.205 |
|  | 0,5 mm/19 mm | ■         | 25G x 3/4"<br>Çoklu adaptör | 80 mm           | 1/120/480              | 480                                  | 85.1642.205 |

### Hazırlanmış mikro numune tüpleri, bağlı tıpa ve şeffaf etiket ile

| Şekil                                                                              | İçerik             | Nominal hacim              | Ø/uzunluk         | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No.                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Serum CAT          | 1,3 ml                     | 10,8 mm/<br>40 mm | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1501.105*                              |
|                                                                                    | Serum jel CAT      | 1,1 ml                     | 10,8 mm/<br>40 mm | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1500.105*                              |
|                                                                                    | Lithium Heparin LH | 1,3 ml                     | 10,8 mm/<br>40 mm | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1503.105*                              |
|                                                                                    | EDTA K3E           | 1,3 ml                     | 10,8 mm/<br>40 mm | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1504.105*                              |
|                                                                                    | Fluorid Heparin FH | 1,3 ml                     | 10,8 mm/<br>40 mm | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1505.105*                              |
|                                                                                    | Sitrat 9NC, %3,2   | 1,3 mL<br>1,0 ml<br>0,5 ml | 10,8 mm/<br>40 mm | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1506.105<br>41.1506.100<br>41.1506.102 |

\* İsteğe bağlı olarak kâğıt etiketli versiyon mevcuttur: Bitiş numarası .015

### Vidalı kapaklı hazırlanmış mikro numune tüpleri

| Şekil                                                                               | İçerik             | Nominal hacim | Ø/uzunluk          | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No.                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|  | Serum CAT          | 1,3 mL        | 10,8 mm<br>45 mm   | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1392.105                |
|                                                                                     | Serum jel CAT      | 1,1 ml        | 10,8 mm -<br>45 mm | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1378.105                |
|                                                                                     | Lithium Heparin LH | 1,3 mL        | 10,8 mm<br>45 mm   | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1393.105                |
|                                                                                     | EDTA K3E           | 1,3 mL        | 10,8 mm<br>45 mm   | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1395.105<br>41.3395.105 |
|                                                                                     | Fluorid Heparin FH | 1,3 mL        | 10,8 mm<br>45 mm   | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1394.105                |
|                                                                                     | Sitrat 9NC, %3,2   | 1,3 mL        | 10,8 mm<br>45 mm   | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 41.1350.105                |

### Mikro iğne

| Şekil                                                                               | Ø/uzunluk    | Renk kodu | Model       | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | 0,8 mm/36mm  | ■         | 21 G x 3/4" | 1 / 50 / 500           | 50                                   | 85.921      |
|  | 0,6 mm/36 mm | ■         | 23 G x 3/4" | 1 / 50 / 500           | 50                                   | 85.923      |
|  | 0,5 mm/36 mm | ■         | 25 G x 3/4" | 1 / 50 / 500           | 50                                   | 85.925      |

## Microvette® APT, Microvette® 100 / 200

### Silindirik iç hazneli Microvette® APT

| Şekil                                                                             | İçerik   | Nominal hacim | Uzunluk / Ø   | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | EDTA K2E | 250 µl        | 75 mm x 13 mm | ■           | 50 / 50 / 500          | 500                                  | 20.1331.100 |
|  | EDTA K2E | 500 µl        | 75 mm x 13 mm | ■           | 100 / 100 / 500        | 500                                  | 20.1330.100 |

### Konik iç hazneli Microvette® 100

| Şekil                                                                             | İçerik             | Nominal hacim | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | Serum CAT          | 100 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1280.100 |
|  | Lithium Heparin LH | 100 µl        | ■           | 100 / 100 / 500        | 500                                  | 20.1282.100 |

### Silindirik iç hazneli Microvette® 100

| Şekil                                                                               | İçerik   | Nominal hacim | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | EDTA K3E | 100 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1278.100 |

### Konik iç hazneli Microvette® 200

| Şekil                                                                               | İçerik             | Nominal hacim | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | Serum CAT          | 200 µL        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1290.100 |
|  | Lithium Heparin LH | 200 µL        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1292.100 |
|  | Fluorid Heparin FH | 200 µL        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1289.100 |

### Konik iç hazneli Microvette® 200

| Şekil                                                                               | İçerik        | Nominal hacim | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | Serum jel CAT | 200 µL        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1291     |
|  | EDTA K3E      | 200 µL        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1288.100 |

## Microvette® 300 / 500 ve Microvette® CB 200 BSG

### Konik iç hazneli Microvette® 300

| Şekil                                                                             | İçerik             | Nominal hacim | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | Serum CAT          | 300 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1308.100 |
|  | Lithium Heparin LH | 300 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1309.100 |
|  | Fluorid Heparin FH | 300 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1307.100 |

### Silindirik iç hazneli Microvette® 500

| Şekil                                                                               | İçerik             | Nominal hacim | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|    | Serum CAT          | 500 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1343.100 |
|   | Serum jel CAT      | 500 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1344.100 |
|  | Lithium Heparin LH | 500 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1345.100 |
|  | Lithium Heparin LH | 500 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1346.100 |
|  | EDTA K3E           | 500 µl        | ■           | 100 / 100 / 1.000      | 1.000                                | 20.1341.100 |

### Microvette® CB 200 BSG

| Şekil                                                                               | İçerik | Nominal hacim | Kapak rengi | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | Sitrat | 200 µL        | ■           | 50 / 50 / 500          | 500                                  | 18.1325.100 |

## Güvenlikli & insizyon lansetleri, İdrar Monovette® ve taşıyıcı tüpler

### Safety lanset

| Şekil                                                                             | İçerik                     | İğne Ø/kesici genişliği | Delme derinliği | Renk kodu | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | Güvenlikli lanset mini     | 28 G                    | 1,6 mm          | ■         | 200/200/1.200          | 1.200                                | 85.1015     |
|  | Güvenlikli lanset neonatal | Kesici 1,5 mm           | 1,2 mm          | ■         | 200/200/1.200          | 1.200                                | 85.1019     |
|  | Güvenlikli lanset süper    | Kesici 1,5 mm           | 1,6 mm          | ■         | 200/200/1.200          | 1.200                                | 85.1018     |

### İnsizyon için lanset – Safety-Heel®

| Şekil                                                                              | İçerik         | Kesicinin genişliği | Delme derinliği | Renk kodu | Ambalajlama (UV/IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|-------------|
|  | Erken doğanlar | 1,75 mm             | 0,85 mm         | ■         | 50/50/200              | 200                                  | 85.1025     |
|                                                                                    | Yeni doğanlar  | 2,5 mm              | 1,0 mm          | ■         | 50/50/200              | 200                                  | 85.1026     |

### İdrar Monovette®

| Şekil                                                                               | Hacmi  | Tüp uzunluğu / Ø mm cinsinden | Model                          | Ambalaj (IK/UK) | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
|  | 3,2 ml | 75/13 mm                      | kâğıt etiketli, emme ucu dahil | 512/1           | 512                                  | 10.250.001  |

### Pediatric için taşıyıcı tüpler S-Monovette®, Mikro numune tüplerinin yanı sıra Microvette® ve Multivette® 600

| Şekil           | için uygun                                               | Uzunluk x Ø  | Taban şekli      | Renk              | Ambalajlama (UV/İK/UK) | UV    | Sipariş verilebilecek minimum miktar | Sipariş No. |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|
|                 | 8 mm Ø S-Monovette®                                      | 54 x 11 mm   | Düz taban        | ☒                 | 250 / 250 / 1.000      |       | 1.000                                | 55.1570     |
|                 | 8 mm Ø S-Monovette®                                      | 54 x 11 mm   | Düz taban        | ■                 | 250 / 250 / 1.000      |       | 1.000                                | 55.1570.002 |
|                 | 8 mm Ø S-Monovette®, Microvette® ve mikro numune tüpleri | 65 x 13 mm   | Yuvarlak tabanlı | ☒                 | 250 / 250 / 1.000      |       | 1.000                                | 55.1571     |
|                 | 8 mm Ø S-Monovette®, Microvette® ve mikro numune tüpleri | 65 x 13 mm   | Yuvarlak tabanlı | ■                 | 250 / 250 / 1.000      |       | 1.000                                | 55.1571.051 |
|                 | 8 mm Ø S-Monovette®                                      | 55 x 13 mm   | Yuvarlak tabanlı | ☒                 | 250 / 250 / 1.000      |       | 1.000                                | 55.1572     |
|                 | Microvette® ve vidalı kapaklı mikro numune tüpleri       | 75 x 13 mm   | Yuvarlak tabanlı | ■                 | 250 / 250 / 2.000      |       | 2.000                                | 55.525.002  |
|                 | Microvette® ve vidalı kapaklı mikro numune tüpleri       | 75 x 13 mm   | Yuvarlak tabanlı | ☒                 | 250 / 250 / 2.000      |       | 2.000                                | 55.525.003  |
|                 | Multivette® 600                                          | 60 x 11,5 mm | Düz taban        | ☒                 | 250 / 250 / 1.000      |       | 1.000                                | 55.1577     |
| Multivette® 600 | 60 x 11,5 mm                                             | Düz taban    | ■                | 250 / 250 / 1.000 |                        | 1.000 | 55.1577.002                          |             |

# SARSTEDT tarafından yapılan preanalitik iş akışı

SARSTEDT ile  
preanalitik süreçleriniz  
için 360° çözümleri  
keşfedin:



[workflow.sarstedt.com](http://workflow.sarstedt.com)

Koordineli sistemlerimizin bir araya gelmesiyle  
oluşan sinerjiyi hissedin.



Sorularınızın olması durumunda:  
Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

Web sitemizi de ziyaret edin:  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

## **SARSTEDT International GmbH**

Merkezi Almanya İstanbul Merkez Şubesi  
Acıbadem Mahallesi,  
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A  
Giriş Kat:27 Da:158  
Üsküdar – İstanbul

Tel: +90 216 290 18 65  
Fax: +90 216 290 18 64

[info.tr@sarstedt.com](mailto:info.tr@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)