


To make your  
workflow excellent.



# AL-Flex

El alicuotador autónomo

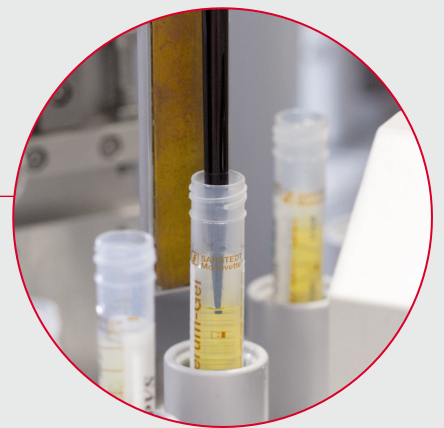

## AL-Flex – El alicuotador autónomo compacto

- Gestión inteligente del volumen
- Pipeteo sin contaminación
- Etiquetado de código de barras integrado de los tubos de alícuota antes del llenado
- Para tubos de alícuotas en 3 medidas
- Configurable para todos los formatos de racks convencionales



Automatización de laboratorio

## Para el alicuotado seguro y rápido en tubos de muestra secundarios

A menudo solo se envía un tubo con material de muestra para el análisis clínico-químico/inmunológico al laboratorio médico, pero los analitos solicitados deben determinarse en diferentes puestos de análisis. En este caso, el alicuotado, es decir, la subdistribución del material de la muestra en tubos secundarios, ofrece la posibilidad de trabajar en paralelo, lo que permite ahorrar tiempo. AL-Flex ofrece la solución técnica para ello.

Los tubos primarios abiertos que se deben alicuotar se introducen en el aparato en soportes definidos. Mediante una consulta para cada tubo primario se obtiene del LIS la información necesaria de los tubos secundarios. AL Flex etiqueta el respectivo tubo secundario con una copia del código de barras primario y pipetea en él el volumen requerido. Las puntas conductoras desechables garantizan la medición precisa del nivel y el pipeteo sin contaminación. Los tubos secundarios y primarios se transfieren a soportes de destino definidos y se trasladan manualmente al puesto de análisis para su procesamiento posterior.

Los tubos secundarios están disponibles en diferentes formatos.



### Datos técnicos

Rendimiento:	Hasta 285 alicuotados de 285 tubos primarios por hora	Soportes de recipientes:	Todos los racks lineales segmentos o bandejas convencionales
Tipos de tubos:	Tubos primarios abiertos: Longitud: de 65 a 100 mm Diámetro: de 13 a 16 mm	Dimensiones:	Anchura: 850 mm (PC con pantalla de 1280 mm) Longitud: 1430 mm Altura: 1800 mm
	Tubos secundarios 75 × 13 mm, con fondo intermedio, 2,5 ml 75 × 13 mm, con fondo redondo, 5,0 ml 92 × 15 mm, con fondo intermedio, 5,0 ml		

### Información: Accesorios

Referencia	Descripción
63.1575.115	Tubo de alicuotado GZ 75 × 13 SV
63.1475.115	Tubo de alicuotado G 75 × 13 SV
60.612.115	Tubo de alicuotado GZ 92 × 15 SV
70.1191.103	Punta conductiva larga en rack
91.191.330	Etiqueta 40 × 26 mm, 3.000 uds./rollo
91.191.311	Lámina TT, 54 mm, 1 rollo

### SARSTEDT S.A.U.

Camí de Can Grau, 24  
Pol. Ind. Valldoriolf  
08430 La Roca del Vallès

Tel: +34 93 846 41 03  
Fax: +34 93 846 39 78

info.es@sarstedt.com  
www.sarstedt.com



Más información en Internet  
[workflow.sarstedt.com](http://workflow.sarstedt.com)