


To make your
workflow excellent.



AL-Flex

Wolnostojący aliquoter

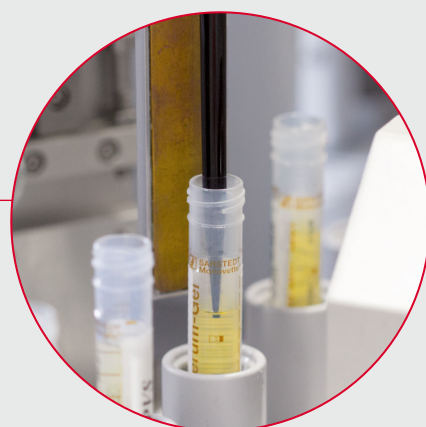

AL-Flex – Kompaktowy wolnostojący aliquoter

- Inteligentne zarządzanie objętością
- Pipetowanie bez zanieczyszczeń
- Zintegrowane etykietowanie kodem kreskowym probówek wtórnych bezpośrednio przed napełnieniem
- Do 3 rodzajów probówek wtórnych
- Możliwość konfiguracji dla wszystkich standardowych rodzajów statywów



Automatyka laboratoryjna

Bezpieczne i szybkie rozdzielanie do próbek wtórnych

Często zdarza się, że do laboratorium medycznego do badania chemii klinicznej / analizy immunologicznej wysyłana jest tylko jedna próbka, ale wymagane analizy są oznaczane na różnych stanowiskach analitycznych. W takich sytuacjach rozdzielanie materiału próbki do próbek wtórnych umożliwia równoległą pracę, a tym samym zaoszczędzenie czasu. AL-Flex stanowi rozwiązanie techniczne przeznaczone właśnie do tego celu.

Otwarte próbówki pierwotne, których zawartość ma zostać rozdzielona, są umieszczane w urządzeniu w odpowiednich statywach. Dla każdego zapytania dotyczącego próbki pierwotnej z systemu informatycznego LIS pobierane są informacje dotyczące wymaganych próbek wtórnych. AL-Flex etykietuje każdą próbkę wtórną kopią kodu kreskowego z próbki pierwotnej i pipetuje do niej wymaganą objętość. Jednorazowe końcówki przewodzące umożliwiają precyzyjny pomiar napełnienia oraz pipetowanie bez zanieczyszczeń. Probówki wtórne i pierwotne są sortowane do ustalonego miejsca w urządzeniu i przenoszone manualnie do kolejnych urządzeń analitycznych.

Dostępne są różne warianty próbek wtórnych.



Dane techniczne

Przepustowość:	até 285 alíquotas de 285 tubos primários/h	Nośnik naczynia:	Wszystkie dostępne statywy liniowe, segmentowe lub tace
Typy naczyń:	Otwarte próbówki pierwotne: Długość: 65–100 mm Średnica: Ø 13–16 mm Probówki wtórne 75 x 13 mm, z dnem pośrednim, 2,5 ml 75 x 13 mm, z dnem okrągłym, 5,0 ml 92 x 15 mm, z dnem pośrednim, 5,0 ml	Wymiary:	Szerokość: 850 mm (z panelem PC 1280 mm) Głębokość: 1430 mm Wysokość: 1800 mm

Szczegóły zamówienia – Akcesoria

Nr zamówienia	Oznaczenie
63.1575.115	Probówka aliquotowa GZ 75 x 13 SV
63.1475.115	Probówka aliquotowa G 75 x 13 SV
60.612.115	Probówka aliquotowa GZ 92 x 15 SV
70.1191.103	Końcówka przewodząca, długa, na statywie
91.191.330	Etykieta 40 x 26 mm, 3000 szt./rolka
91.191.311	Folia TT, 54 mm, 1 rolka

SARSTEDT Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 722 05 43

info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Więcej informacji
znajdziesz online
workflow.sarstedt.com