

# NFT

## Système de prélèvement d'urine

Prélèvement d'échantillon  
urinaire hygiénique avec système  
clos sans aiguille



# NFT Needle Free Transfer (transfert sans aiguille)

Préanalytique  
de l'urine  
**2.0**

Le premier système de prélèvement d'urine de SARSTEDT conçu pour un recueil d'urine hygiénique, sans aiguille et en système clos

Hygiénique. Pratique. Sécurisé.

Comment le prélèvement d'échantillons d'urine peut-il être encore plus sûr, plus hygiénique et plus simple ? La réponse à cette question se trouve dans les produits innovants du système NFT. Il s'agit du premier système de prélèvement d'urine en système clos et sans aiguille de SARSTEDT. Ce système innovant combine les nouveaux avantages de cette gamme et ceux des produits existants, le tout dans un solution tout-en-un.

De nouveaux standards pour le préanalytique de l'urine




- Disponible en version pot à urine de 100ml et flacon de 3 litres pour le recueil d'urine sur 24 heures
- Système de prélèvement et sans aiguille
- Stockage et transport sécurisé
- Transfert simple et hygiénique avec la Monovette urine
- Aucune boîte à déchets pour OPCT\* n'est nécessaire pour l'élimination des produits NFT

\*OPCT = Objets Piquants Coupants Tranchants

### Tout simplement pratique

La Monovette urine permet le recueil hygiénique de l'urine et peut être utilisée comme tube d'analyse, pour les bandelettes de test et les dispositifs d'analyse, et comme tube à centrifuger pour le recueil de sédiment

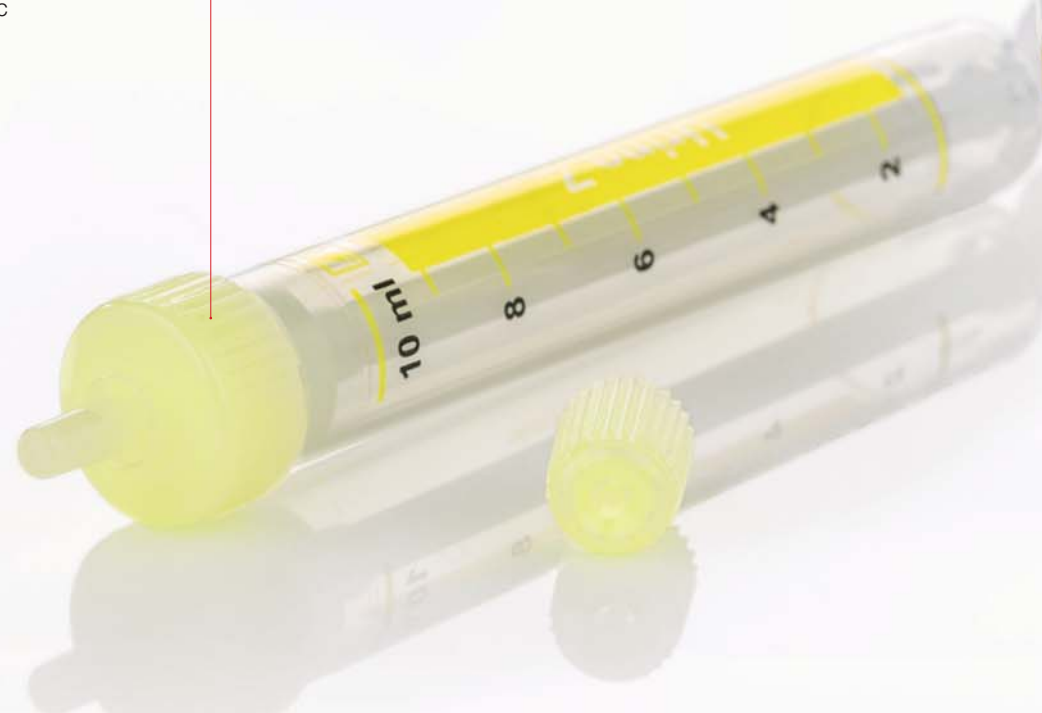


### Nouveau

Le site de prélèvement sans aiguille rend l'utilisation d'une canule de transfert inutile. La Monovette urine pénètre facilement dans la toute nouvelle membrane NFT.

Une fois le prélèvement réalisé en toute simplicité, le récipient est immédiatement à nouveau étanche et hygiénique, même après plusieurs prélèvements.

Il n'existe aucun risque d'infection lié à une blessure par piqûre.

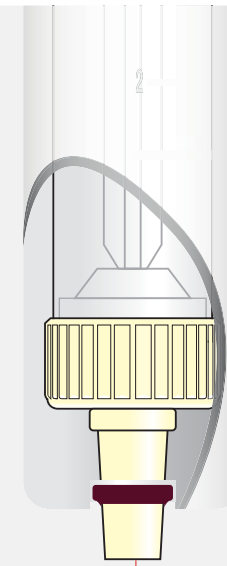

## AVANTAGES DU SYSTÈME

- ✓ **Risque réduit de blessures et sécurité d'utilisation accrue** pour le personnel et le patient grâce au prélèvement d'échantillon sans aiguille
- ✓ **Réduction des dépenses liées à l'élimination**, car les composants du système NFT n'ont pas besoin d'être éliminés dans un récipient destiné aux aiguilles

### Étanche aux liquides et aux odeurs

Bouchon à vis avec unité de transfert

### Système scellé


L'étiquette de sécurité indique l'intégrité et la stérilité interne du flacon à urine NFT

### Transparent

Récipient hautement transparent en polypropylène (PP) robuste permettant une bonne évaluation visuelle

### Innovant

Unité de transfert sans aiguille avec membrane NFT perçable

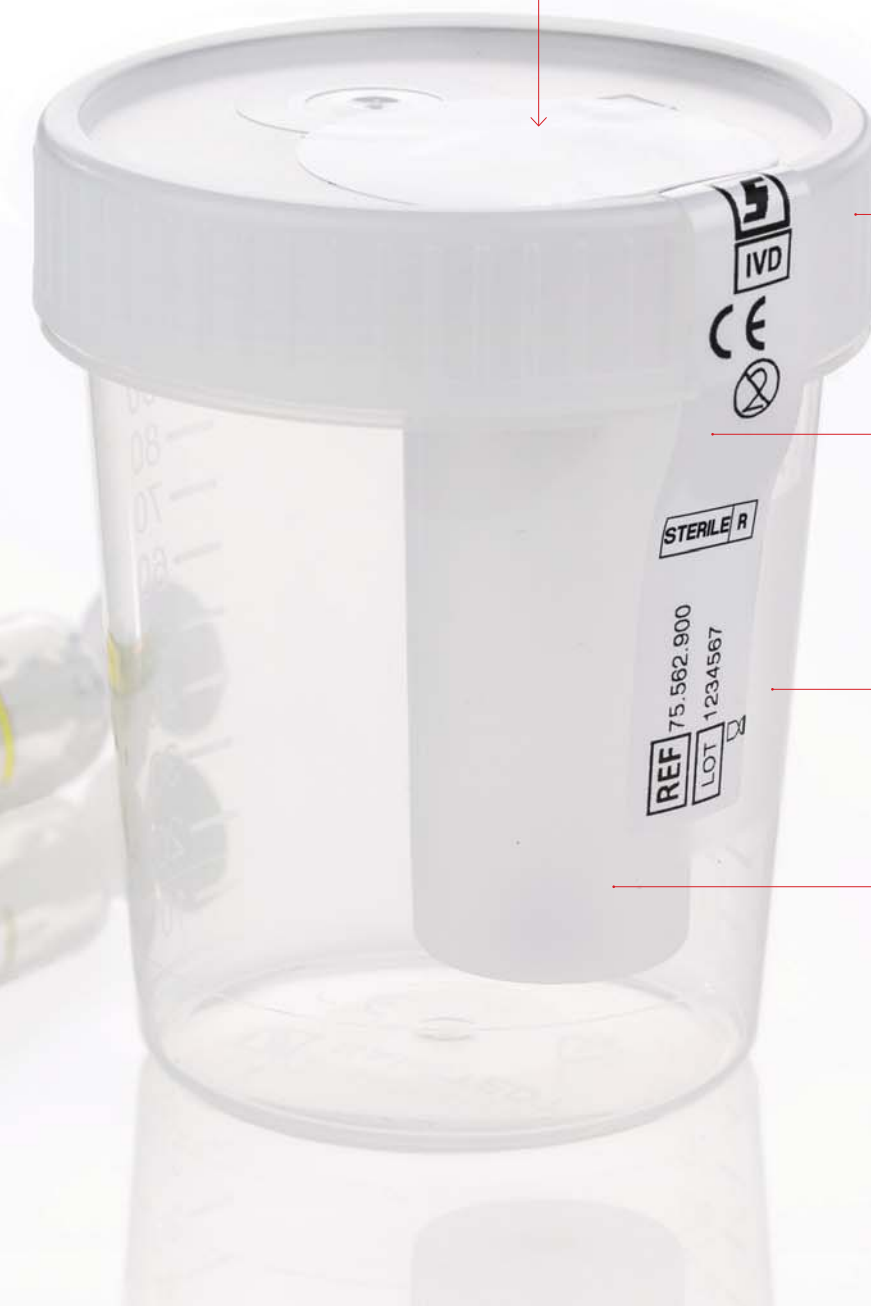



# NFT

## Systeme de prelevement d'urine

Le meilleur des differents systemes

Le systeme NFT avec la Monovette urine, pot a urine NFT et flacon de recueil d'urine NFT garantit des conditions de travail dans le respect des regles d'hygiene tout au long du processus de recueil de l'echantillon :

- La Monovette urine et l'embout d'aspiration fourni vous permettent de realiser un prelevement sans aiguille, meme en cas de faibles volumes de remplissage. Aucune unite de transfert telle que celles des systemes sous vide n'est necessaire.
- La manipulation intuitive permet une prise en main rapide et sans formation approfondie.
- Au besoin, le processus de prelevement peut etre repete avec la Monovette urine selon le principe d'aspiration; il n'existe aucun risque de perte fonctionnelle liee a une utilisation incorrecte.
- Grace a la fonction de prelevement sans aiguille sophistiquee, le risque de blessure est reduit, tant pour le personnel que pour le patient.
- Une fois le prelevement termine, les produits NFT n'ont pas besoin d'etre elimines dans un recipient dedie aux aiguilles, ce qui constitue un gain de temps et d'argent en comparaison avec les produits notes d'une aiguille integree.

### Systeme sophistique

Le flacon de recueil d'urine NFT avec un volume de 3 000 ml est dote d'une poignee ergonomique, d'un grand diametre d'ouverture et d'une fenetre de visualisation transparente avec echelle graduee par pas de 100 ml



### Monovette urine – un travail dans le respect des regles d'hygiene necessitant peu de manipulations

- La Monovette urine permet de prelever l'echantillon dans le respect des regles d'hygiene et sans aiguille a partir de flacons de recueil d'urine ou de systemes de drainage urinaire.
- Il est possible de realiser une analyse d'urine a l'aide d'une bandelette directement dans la Monovette urine.
- La Monovette urine est adaptee au transport et a l'expedition conformement aux instructions d'emballage P650 des reglementations ADR et IATA. Elle peut etre utilisee pour le recueil de sediment dans des centrifugeuses et dans des dispositifs d'analyse.



### Manipulation simple: Flacon a urine NFT



### Recueil d'urine simple sur 24 heures: Flacon de recueil d'urine NFT



Meme pour le flacon de recueil d'urine NFT 3L, le recueil d'echantillon se fait dans des conditions d'hygiene optimales grace a la fonction de prelevement en systeme ferme.



Pour une manipulation simple des produits NFT, regardez le tutoriel: [sarstedt.com/nft-tu-fr](http://sarstedt.com/nft-tu-fr)

# COMMANDEZ GRATUITEMENT UN ÉCHANTILLON DU PRODUIT



sarstedt.com/nft-sa-fr



## Avec le système de prélèvement d'urine NFT, SARSTEDT pose de nouvelles bases

Un recueil réalisé dans des conditions d'hygiène irréprochables garantit des résultats d'analyse optimaux. Les produits du système NFT de SARSTEDT posent de nouvelles bases pour une procédure préanalytique adaptée à la routine du laboratoire et garantissent une sécurité maximale, tant pour l'utilisateur que pour le patient.




Les produits NFT n'ont pas besoin d'être éliminés dans des récipients résistants aux aiguilles.

## Le flux de travail préanalytique par SARSTEDT

Profitez de la synergie et de la combinaison de nos systèmes

Découvrez les solutions préanalytiques à 360° de SARSTEDT

workflow.sarstedt.com

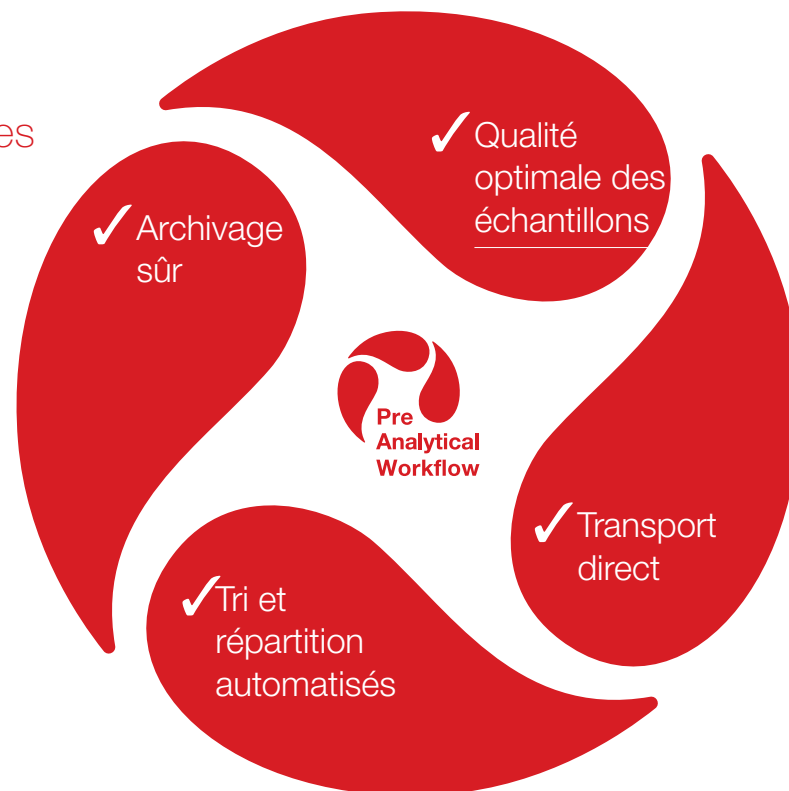

### Flacon à urine NFT de 100 ml

Référence	Volume	L x Ø	Version	Pureté	Emballage (boîte/carton)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	avec étiquette de sécurité et unité de transfert	stérile	200 / 200

### Flacon de recueil d'urine NFT de 3,0 l

Référence	Volume	L x l x H	Version	Pureté	Emballage (boîte/carton)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	avec unité de transfert et étiquette patient, diamètre d'ouverture de 80 mm	-	30 / 30

### Monovette urine Z - sans préparation

Référence	Volume	L x Ø	Version (jaune)	Pureté	Emballage (boîte/carton)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente, avec protection contre la lumière	-	64 / 512

### Monovette urine avec acide borique - avec stabilisateur pour examens microbiologiques

Référence	Volume	L x Ø	Version (verte)	Pureté	Emballage (boîte/carton)
10.256*	3,2 ml	75 x 13 mm	Étiquette en plastique, transparente	-	64 / 512
10.256.020*	3,2 ml	75 x 13 mm	Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.256.640**	3,2 ml	75 x 13 mm	Étiquette en plastique, transparente	stérile	64 / 512
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.253.640**	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente	stérile	64 / 512

Vous trouverez d'autres consommables pour le préanalytique de l'analyse d'urine à l'adresse [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

\*lancement prévu au premier trimestre 2024  
\*\*En cours de développement

## SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray  
Z.I. des Plantes  
70150 Marnay

Tél.: +33 384 31 95 95

Fax: +33 384 31 95 99

[info.fr@sarstedt.com](mailto:info.fr@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Pour plus d'informations,  
vidéos et pour toute  
commande d'échantillons:  
[sarstedt.com/nft-fr](http://sarstedt.com/nft-fr)

Pour toute question:  
Nous restons à votre écoute!

Consultez également notre site Internet: [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)