

NFT

Systeme de prélèvement d'urine

Prélèvement d'échantillon urinaire hygiénique
avec système clos sans aiguille



Pré-analytique

NFT Needle Free Transfer (transfert sans aiguille)

Le premier système de prélèvement d'urine de SARSTEDT conçu pour un recueil d'urine hygiénique, sans aiguille et en système clos

Préanalytique
de l'urine
2.0

Hygiénique. Pratique. Sécurisé.

Comment le prélèvement d'échantillons d'urine peut-il être encore plus sûr, plus hygiénique et plus simple ? La réponse à cette question se trouve dans les produits innovants du système NFT. Il s'agit du premier système de prélèvement d'urine en système clos et sans aiguille de SARSTEDT. Ce système innovant combine les nouveaux avantages de cette gamme et ceux des produits existants, le tout dans un solution tout-en-un.


De nouveaux standards pour le préanalytique de l'urine

- Disponible en version pot à urine de 100 ml et flacon de 3 litres pour le recueil d'urine sur 24 heures
- Système de prélèvement et sans aiguille
- Stockage et transport sécurisé
- Transfert simple et hygiénique avec la Monovette urine
- Aucune boîte à déchets pour OPCT* n'est nécessaire pour l'élimination des produits NFT



Tout simplement pratique

La Monovette urine permet le recueil hygiénique de l'urine et peut être utilisée comme tube d'analyse, pour les bandelettes de test et les dispositifs d'analyse, et comme tube à centrifuger pour le recueil de sédiment

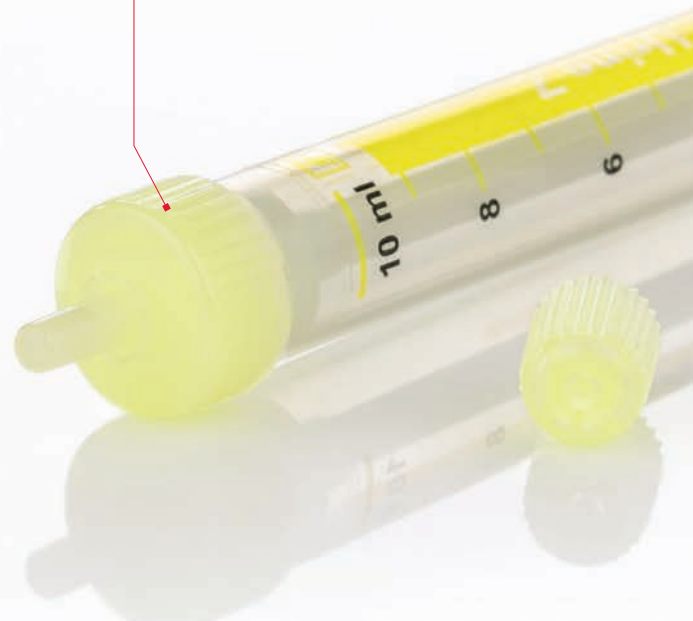


* OPCT = Objets Piquants Coupants Tranchants

Nouveau

Le site de prélèvement sans aiguille rend l'utilisation d'une canule de transfert inutile. La Monovette urine pénètre facilement dans la toute nouvelle membrane NFT.

Une fois le prélèvement réalisé en toute simplicité, le récipient est immédiatement à nouveau étanche et hygiénique, même après plusieurs prélèvements.

Il n'existe aucun risque d'infection lié à une blessure par piqûre.

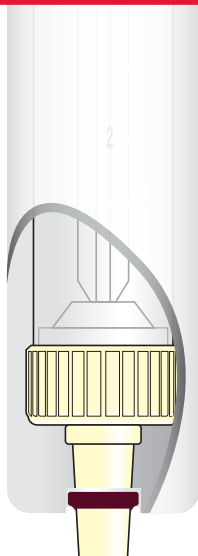

AVANTAGES DU SYSTÈME

- > **Risque réduit de blessures et sécurité d'utilisation accrue** pour le personnel et le patient grâce au prélèvement d'échantillon sans aiguille
- > **Réduction des dépenses liées à l'élimination**, car les composants du système NFT n'ont pas besoin d'être éliminés dans un récipient destiné aux aiguilles



Étanche aux liquides et aux odeurs
Bouchon à vis avec unité de transfert

Système scellé
L'étiquette de sécurité indique l'intégrité et la stérilité interne du flacon à urine NFT

Transparent
Récipient hautement transparent en polypropylène (PP) robuste permettant une bonne évaluation visuelle

Innovant
Unité de transfert sans aiguille avec membrane NFT percable

NFT

Systeme de prélèvement d'urine

Le meilleur des différents systèmes

Le système NFT avec la Monovette urine, pot à urine NFT et flacon de recueil d'urine NFT garantit des conditions de travail dans le respect des règles d'hygiène tout au long du processus de recueil de l'échantillon :

- La Monovette urine et l'embout d'aspiration fourni vous permettent de réaliser un prélèvement sans aiguille, même en cas de faibles volumes de remplissage. Aucune unité de transfert telle que celles des systèmes sous vide n'est nécessaire.
- La manipulation intuitive permet une prise en main rapide et sans formation approfondie.
- Au besoin, le processus de prélèvement peut être répété avec la Monovette urine selon le principe d'aspiration ; il n'existe aucun risque de perte fonctionnelle liée à une utilisation incorrecte.
- Grâce à la fonction de prélèvement sans aiguille sophistiquée, le risque de blessure est réduit, tant pour le personnel que pour le patient.
- Une fois le prélèvement terminé, les produits NFT n'ont pas besoin d'être éliminés dans un récipient dédié aux aiguilles, ce qui constitue un gain de temps et d'argent en comparaison avec les produits dotés d'une aiguille intégrée.

Systeme sophistique

Le flacon de recueil d'urine NFT avec un volume de 3 000 ml est doté d'une poignée ergonomique, d'un grand diamètre d'ouverture et d'une fenêtre de visualisation transparente avec échelle graduée par pas de 100 ml



Monovette urine – un travail dans le respect des règles d'hygiène nécessitant peu de manipulations

- La Monovette urine permet de prélever l'échantillon dans le respect des règles d'hygiène et sans aiguille à partir de flacons de recueil d'urine ou de systèmes de drainage urinaire.
- Il est possible de réaliser une analyse d'urine à l'aide d'une bandelette directement dans la Monovette urine.
- La Monovette urine est adaptée au transport et à l'expédition conformément aux instructions d'emballage P650 des réglementations ADR et IATA. Elle peut être utilisée pour le recueil de sédiment dans des centrifugeuses et dans des dispositifs d'analyse.



Manipulation simple: Flacon à urine NFT



Recueil d'urine simple sur 24 heures : Flacon de recueil d'urine NFT



Même pour le flacon de recueil d'urine NFT 3L, le recueil d'échantillon se fait dans des conditions d'hygiène optimales grâce à la fonction de prélèvement en système fermé.



Pour une manipulation simple des produits NFT, regardez le tutorial : sarstedt.com/nft-tu-fr

COMMANDEZ GRATUITEMENT UN ÉCHANTILLON DU PRODUIT



sarstedt.com/nft-sa-fr



Avec le système de prélèvement d'urine NFT, SARSTEDT pose de nouvelles bases


Un recueil réalisé dans des conditions d'hygiène irréprochables garantit des résultats d'analyse optimaux. Les produits du système NFT de SARSTEDT posent de nouvelles bases pour une procédure préanalytique adaptée à la routine du laboratoire et garantissent une sécurité maximale, tant pour l'utilisateur que pour le patient.



Les produits NFT n'ont
pas besoin d'être
éliminés dans des
récipients résistants

Le flux de travail préanalytique par SARSTEDT

Profitez de la synergie et
de la combinaison de nos systèmes

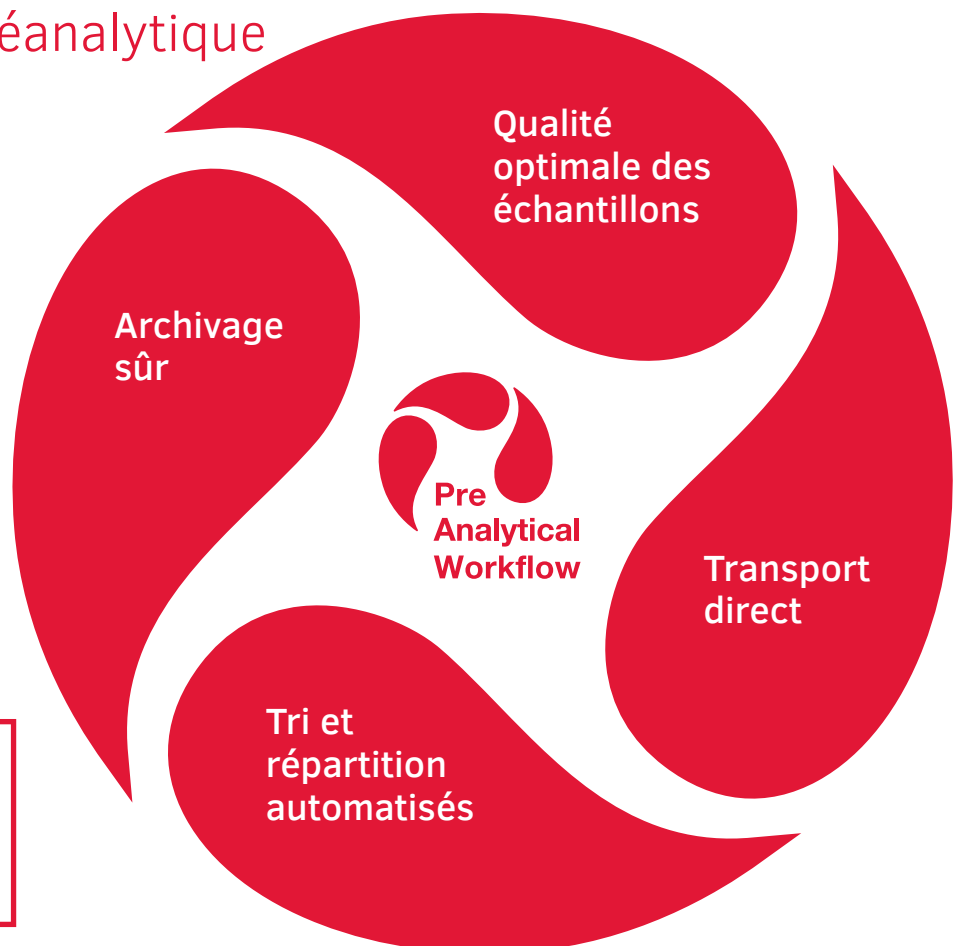

Découvrez les
solutions
préanalytiques
à 360° de SARSTEDT
sarstedt.com/nft-wf-fr

Flacon à urine NFT de 100 ml

Référence	Volume	L x Ø	Version	Pureté	Emballage (boîte/carton)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	avec étiquette de sécurité et unité de transfert	stérile	5 / 200

Flacon de recueil d'urine NFT de 3,0 l

Référence	Volume	L x l x H	Version	Pureté	Emballage (boîte/carton)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	avec unité de transfert et étiquette patient, diamètre d'ouverture de 80 mm	-	30 / 30

Monovette urine Z

sans préparation

Référence	Volume	L x Ø	Version (jaune)	Pureté	Emballage (boîte/carton)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente, avec protection contre la lumière	-	64 / 512

Monovette urine avec acide borique

avec stabilisateur pour examens microbiologiques

Référence	Volume	L x Ø	Version (verte)	Pureté	Emballage (boîte/carton)
10.256.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.256.021	3,2 ml	75 x 13 mm	Étiquette en papier, inscriptible, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.256.641**	3,2 ml	75 x 13 mm	Étiquette en papier, inscriptible	stérile	64 / 512
10.260.001*	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.260.021*	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.256.641**	8,5 ml	92 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible	stérile	64 / 512
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en plastique, transparente, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Étiquette en papier, inscriptible, emballage individuel sous blister	stérile	100 / 500

Vous trouverez d'autres consommables pour le préanalytique de l'analyse d'urine à l'adresse www.sarstedt.com

* lancement prévu au second trimestre 2024 ** En cours de développement

Pour toute question :
Nous restons à votre écoute !

Consultez également notre site Internet : www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.R.L.

Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel. : +33 384 31 95 95
Fax : +33 384 31 95 99

info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Pour plus d'informations,
vidéos et pour toute
commande d'échantillons :
sarstedt.com/nft-fr