

Micro-Aiguille


Manipulation aisée et écoulement optimal




Micro-Aiguille

- Perte minimale de sang, aucun volume résiduel
- Rainures de préhension pour un contrôle optimal
- Rotation possible à 360° pour les veines fragiles
- Écoulement optimal grâce à la qualité exceptionnelle de l'aiguille et à son ouverture libre



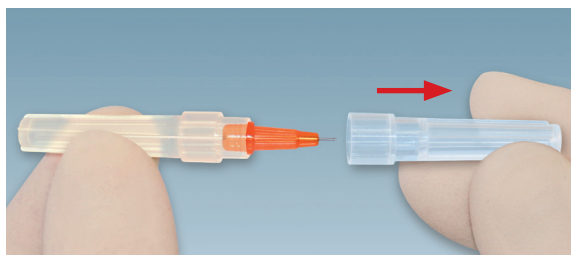

1 Retirer le capuchon.

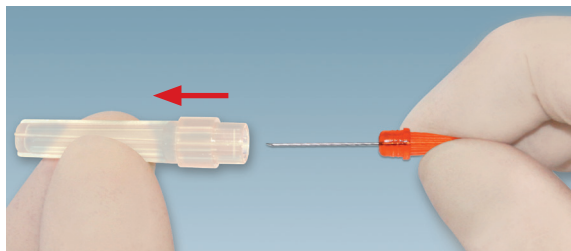

2 Dégager la Micro-Aiguille de sa protection.



3 Procéder au prélèvement sanguin.
Laisser le sang s'écouler dans un microtube prévu à cet effet.



4 Jeter la Micro-Aiguille dans une boîte à déchets adaptée.

Références pour commande

| Références | Désignation | Ø/Longueur | Conditionnement |
|------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 85.921 | Micro-Aiguille 21G x 3/4", verte | 0.8 mm / 36 mm | 50/boîte, 500/carton |
| 85.923 | Micro-Aiguille 23G x 3/4", bleue | 0.6 mm / 36 mm | 50/boîte, 500/carton |
| 85.925 | Micro-Aiguille 25G x 3/4", orange | 0.5 mm / 36 mm | 50/boîte, 500/carton |

Sarstedt S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay
Tel: +33 3 84 31 95 95
Fax: +33 3 84 31 95 99
info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com