


Otwieracz do drenów

Łatwe i bezpieczne pobieranie próbek z segmentów drenów

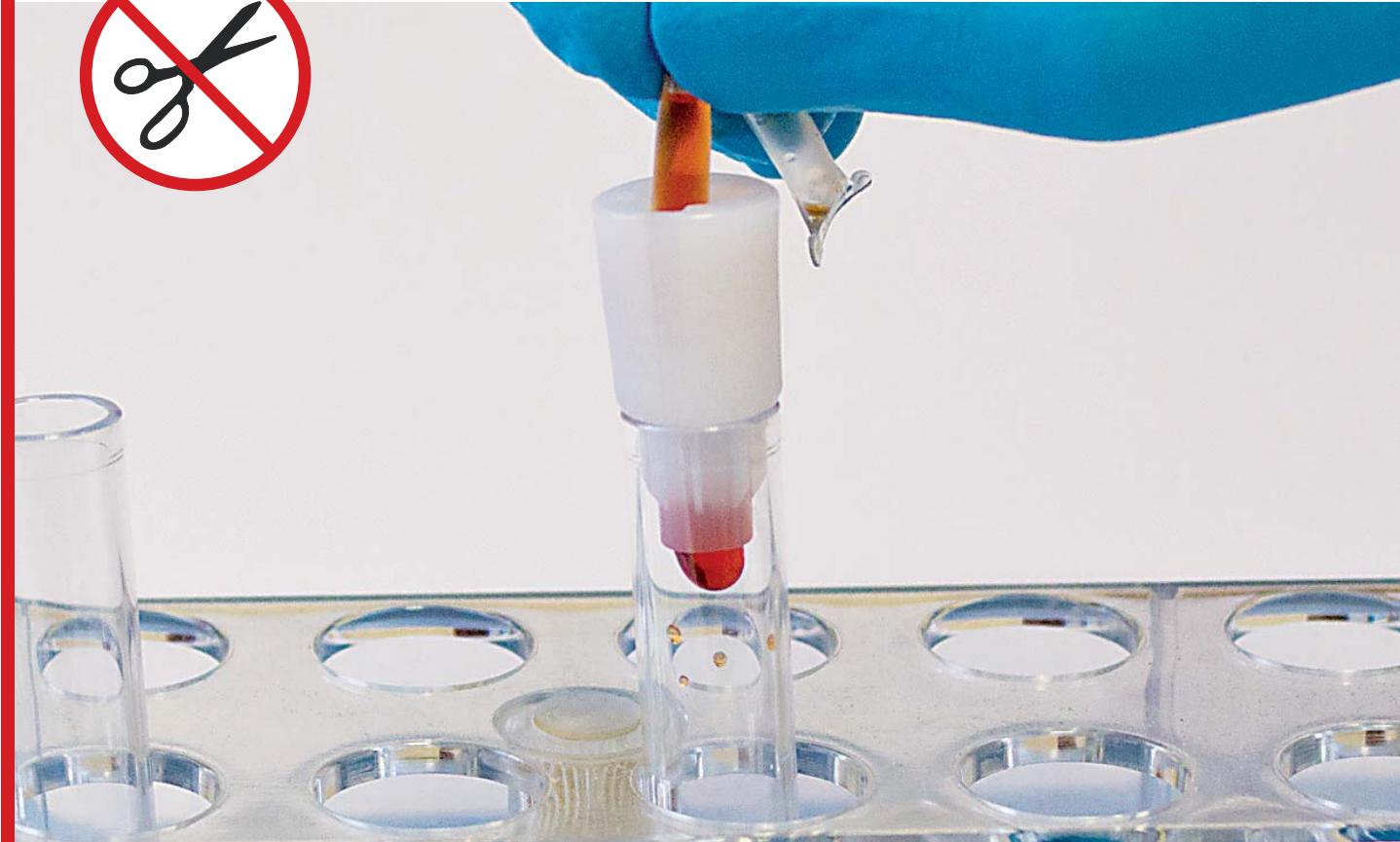

Otwieracz do drenów


- Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia próbki
- Brak konieczności stosowania innych narzędzi takich jak noże czy nożyczki
- Prosta i bezpieczna obsługa




Otwieracz do drenów



Umieść segment drenu lekko pochylony w otworze otwieracza do drenów i popchnij go do przodu, nie ściskając drenu.

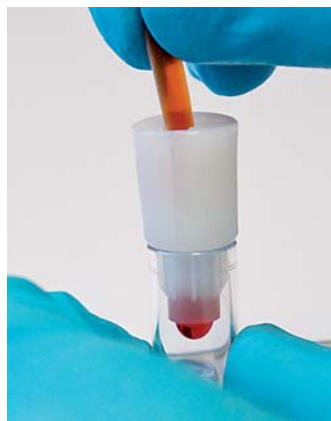

Ściśnij końcówkę drenu jednokrotnie, by uwolnić niewielką ilość krwi.

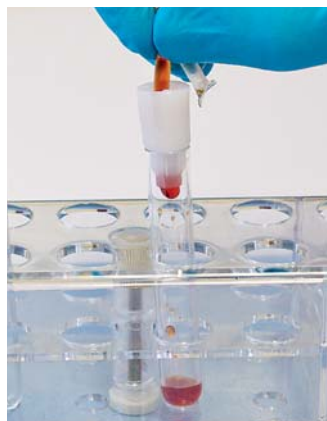

Złożyć i ścisnąć dren, aby całkowicie go opróżnić. Uwolnienie ciśnienia z drenu przed odłączeniem go od otwieracza zapobiega kapaniu.



Informacje dla

Numer kat.	Opis	Opakowanie
95.1000	Otwieracz do drenów	2,000/kartonik
95.1000.476	Otwieracz do drenów z probówką 75x12 mm	400/kartonik, StackPack
95.1000.800	Otwieracz do drenów do probówek o śr.wew 8,2 mm	2,000/kartonik
55.476	Probówka 75 x Ø 12 mm, PS	2,000/kartonik, StackPack
55.476.005	Probówka 75 x Ø 12 mm, PS	2,000/kartonik
86.1509	Probówka 75 x Ø 11.5 mm, szkło	2,352/kartonik, StackPack

Sarstedt Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com