

SAHARA 4

Réchauffement à sec de produits sanguins

NOUVEAU !



La nouvelle génération – un réchauffement innovant et sûr

- Disponibilité rapide des produits sanguins par l'identification automatique de l'état solide et le remplacement confortable en cours de réchauffement
- Suivi indépendant de la température pour chaque produit sanguin
- Les risques de contamination par des germes humides pathogènes comme avec les bains-marie courants sont évités
- Le séchage actif de la surface de la poche permet d'obtenir de bonnes conditions hygiéniques à proximité immédiate du produit sanguin
- Gestion de données en option
- Usage intuitif par l'utilisateur grâce à l'écran couleur tactile 7"

Plaque chauffante

- 4 zones de chauffage séparées
- Agitation des poches par un mouvement d'inclinaison-oscillation innovant

Capteur infrarouge

- Mesure séparée de la température des produits sanguins pour chaque poche

Couvercle de boîtier


- Contrôle visuel des produits sanguins grâce au couvercle transparent et à l'éclairage interne

Commande et nettoyage

- Préréglage des temps de réchauffement non requis
- Usage intuitif par l'utilisateur grâce à l'écran couleur tactile
- Nettoyage aisé du dispositif grâce à la plaque chauffante et au bac de récupération amovibles

Test de fonctionnement intégré

- Vérification des fonctions du dispositif
- Utilisation d'appareils de mesure supplémentaires non requise
- Documentation possible via une clé USB

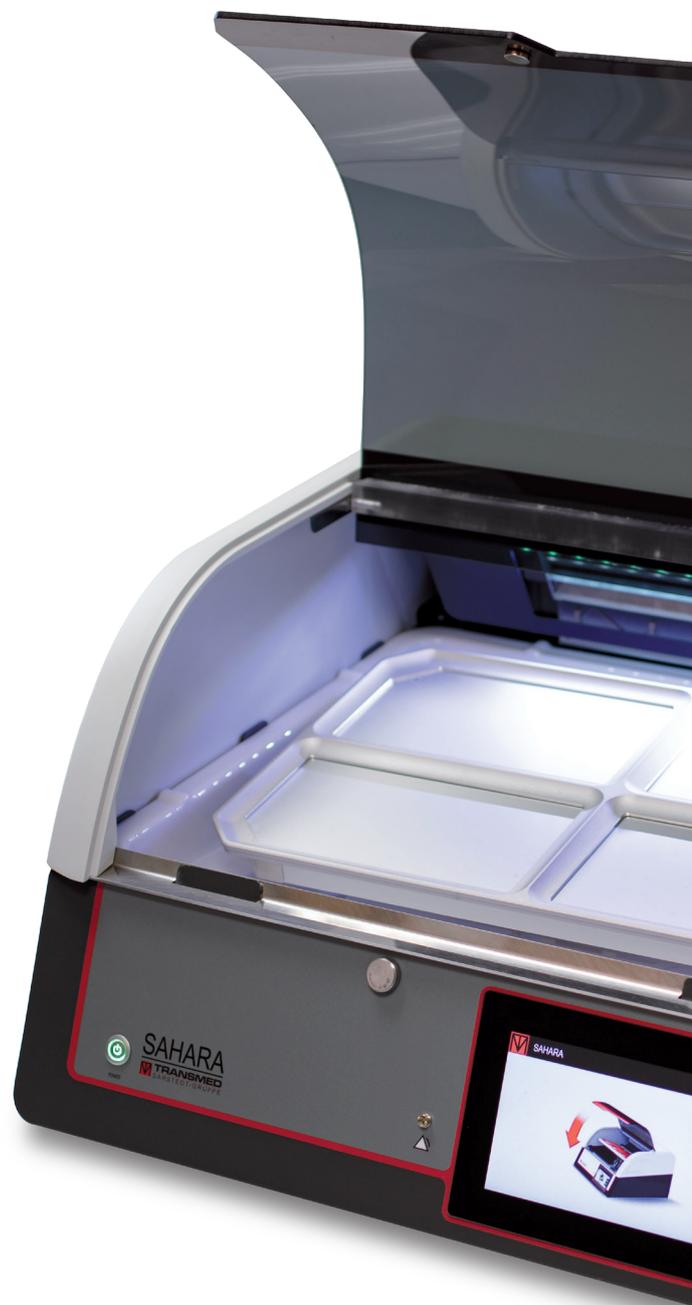

Suivi de la température

- Suivi séparé de la température et notification de disponibilité pour chaque produit sanguin à décongeler
- Identification automatique de l'état solide et remplacement confortable en cours de réchauffement
- Réchauffement à une température ambiante constante et pré-réglable (de 37 °C à 42 °C)
- Alarme de température excessive
- Rappel pour le retrait de chaque produit sanguin



Écran couleur tactile 7"


- Permet une utilisation intuitive et rapide
- La réaction retardée des touches prévient toute interruption involontaire du processus de tempérage

Gestion de données

- Utilisation facultative
- Lecture des données d'enregistrement par le biais d'un scanner de code-barres
- Documentation sur l'évolution de la température de chaque poche
- Transmission des données par clé USB
- Affichage d'état des ensembles de données

Menu d'options

- Choix entre différentes langues système
- Ajustement de la température cible
- Réglage du volume sonore des notifications et alarmes
- Activation de la gestion de données

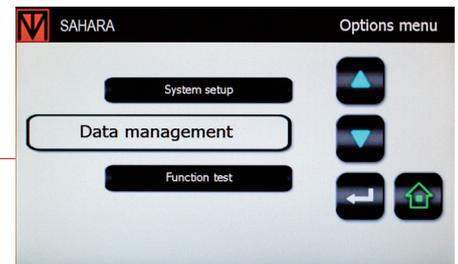

SAHARA 4

Références

Réf.	Désignation	Cdt
97.8720.500	SAHARA 4	1

Accessoires

Réf.	Désignation	Cdt
97.8720.440	Scanner TOUCH 65 PRO USB	1

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P) :	574x348x554 mm
Poids :	27,3 kg
Tension nominale :	100 – 240 V CA
Fréquence d'alimentation :	50/60 Hz
Puissance absorbée max. :	1000 W

Mentions légales:

SAHARA 4 - Réchauffeur à sec de produits sanguins - Dispositif Médical de Classe 1 conforme au règlement MDR 2017/745 - Fabricant: Transmed - Groupe Sarstedt, Allemagne

Distribué par :

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com

