

# SAHARA 4

Suche rozmrażanie produktów krwiopochodnych

**NOWOŚĆ!**



## Nowa generacja – innowacyjne i bezpieczne regulowanie temperatury

- Szybka dostępność produktów krwiopochodnych dzięki automatycznemu wykrywaniu i wygodnej zmianie stanu skupienia podczas trwającego procesu regulacji temperatury
- Temperatury poszczególnych produktów krwiopochodnych monitorowane są oddzielnie
- Nie ma ryzyka zanieczyszczenia mokrymi patogennymi drobnoustrojami jak ma to miejsce w przypadku procesów na bazie wody
- Aktywne suszenie powierzchni rozmrażanego materiału umożliwia zapewnienie higienicznych warunków w bezpośrednim otoczeniu produktu krwiopochodnego
- Opcjonalne zarządzanie wykorzystywanymi danymi
- Intuicyjna obsługa na 7-calowym, kolorowym wyświetlaczu dotykowym

## Płyta grzewcza

- 4 oddzielne strefy grzewcze
- Mieszanie materiału rozmrażanego za pomocą innowacyjnego mechanizmu przechylającego i obracającego

## Czujnik podczerwieni

- Indywidualna rejestracja temperatury dla każdego z rozmrażanych produktów

## Kłapka obudowy


- Kontrola wzrokowa produktów krwiopochodnych możliwa jest dzięki przezroczystej kłapce obudowy oraz oświetleniu wewnętrznemu

## Obsługa i czyszczenie

- Brak konieczności wstępnego ustawiania czasów regulacji temperatury
- Intuicyjna obsługa na kolorowym wyświetlaczu dotykowym
- Urządzenie można łatwo wyczyścić dzięki wyjmowanej płycie grzewczej i tacce ociekowej

## Zintegrowana funkcja testowa

- Sprawdzanie funkcji urządzenia
- Brak konieczności stosowania dodatkowego sprzętu pomiarowego
- Możliwość protokolowania za pomocą pamięci USB

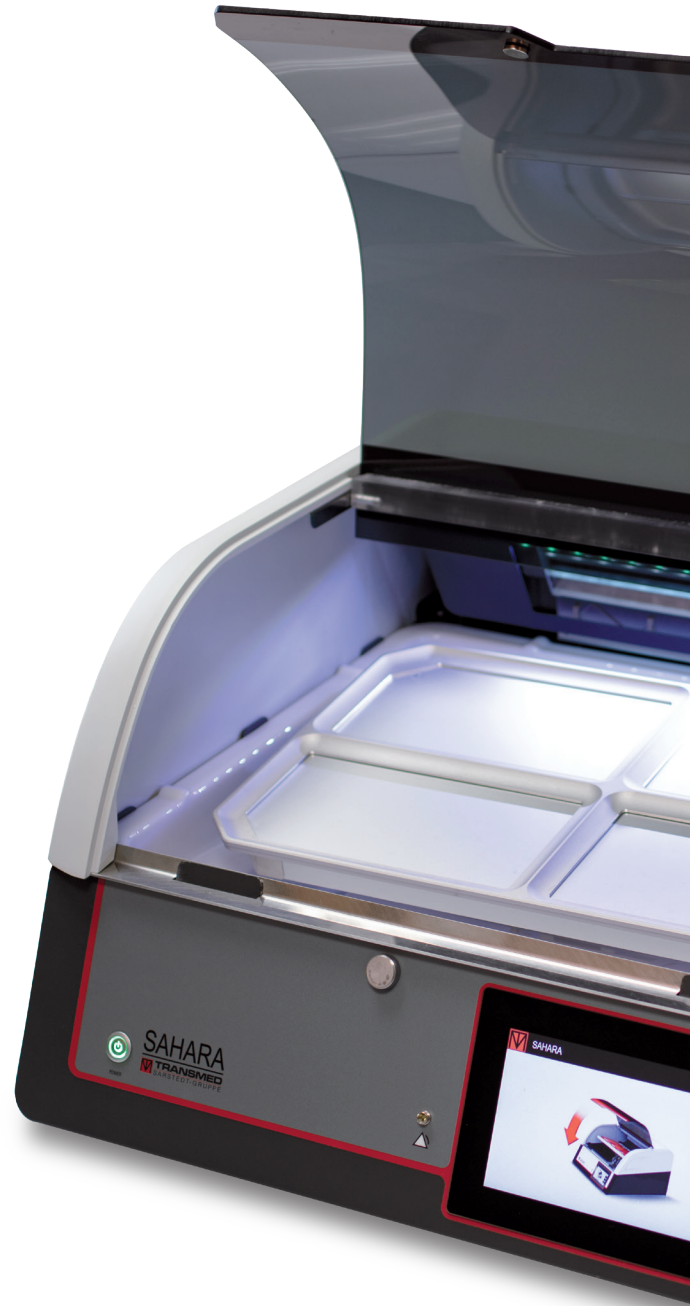

## Monitorowanie temperatury

- Osobne monitorowanie temperatury i komunikat „Gotowe do wyjęcia” podczas rozmrażania produktu
- Automatyczne wykrywanie i wygodna zmiana stanu skupienia podczas trwającego procesu kontroli temperatury
- Regulacja temperatury w stałej, wstępnie ustawionej temperaturze otoczenia (w zakresie od 37°C do 42°C)
- Alarm przekroczenia temperatury
- Przypomnienie o konieczności wyjęcia dla każdego produktu krwiopochodnego



## 7-calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy


- Intuicyjna i szybka obsługa
- Opóźniona reakcja przycisku zapobiegająca niezamierzonemu zakończeniu procesu regulacji temperatury

## Zarządzanie danymi

- Stosowanie opcjonalne
- Wczytywanie danych rejestracyjnych za pomocą skanera kodów kreskowych
- Dokumentacja profilu temperaturowego dla poszczególnych materiałów konserwowanych
- Transfer danych przez pamięć USB
- Wyświetlanie stanu rejestru danych

## Menu opcji

- Wybór różnych języków systemu
- Regulacja temperatury docelowej
- Regulacja głośności wskazówek i alarmów
- Aktywacja zarządzania danymi

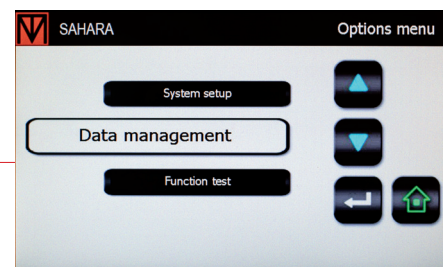

# SAHARA 4

## Szczegóły zamówienia

Numer zamówienia	Oznaczenie artykułu	Jedn. opak.
97.8720.500	SAHARA 4	1

## Aksesoria

Numer zamówienia	Oznaczenie artykułu	Jedn. opak.
97.8720.440	Skaner TOUCH 65 PRO USB	1

## Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.):	574x348x554 mm
Masa:	27,3 kg
Napięcie znamionowe:	100 – 240 V AC
Częstotliwość zasilania:	50/60 Hz
Maks. pobór mocy:	1000 W

### Dystrybucja:

SARSTEDT AG & Co. KG  
P.O. Box 12 20  
D-51582 Nümbrecht  
Phone: +49 2293 305 0  
Fax: +49 2293 305 3992  
export@sarstedt.com  
www.sarstedt.com