


SAHARA 4

Suchý ohrev krvných produktov

NOVINKA!

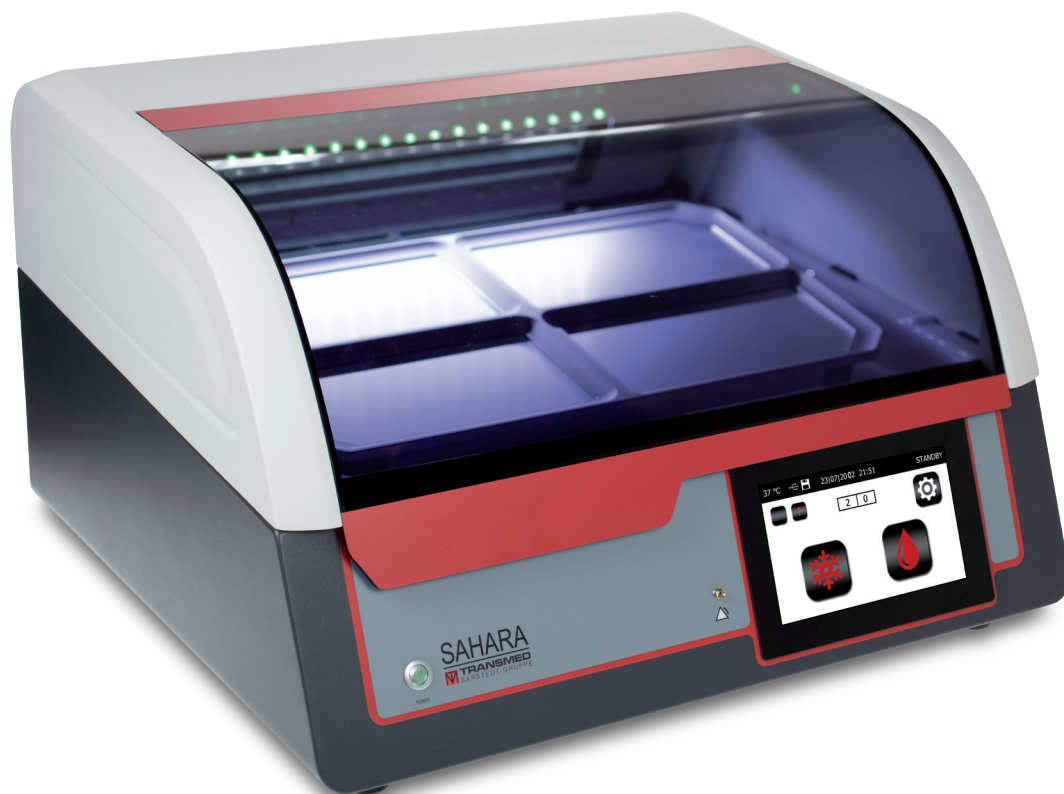

Nová generácia - inovatívne a bezpečné temperovanie

- Rýchla dostupnosť krvných produktov pomocou automatického rozpoznávania skupenstva a jeho zmien v priebehu temperovacieho procesu
- Samostatné sledovanie teploty každého krvného produktu
- Zabránenie riziku kontaminácie vodnými patogénmi spojenými s ohrevom vo vodnom kúpeli
- Aktívne sušenie povrchu vaku zaisťuje hygienické podmienky v okolí krvného vaku
- Voliteľná správa údajov
- Intuitívne navádzanie užívateľa prostredníctvom 7" farebného dotykového displeja

Vyhrievacia platňa

- 4 samostatné vyhrievacie zóny
- Miešanie krvných vakov pomocou inovatívneho nakláňacieho a otočného pohybu

Infračervený senzor

- Samostatné meranie teploty každého krvného vaku

Uzáver prístroja


- Vizuálna kontrola krvných produktov cez priehľadný uzáver a vďaka vnútornému osvetleniu

Prevádzka a čistenie

- Prednastavenie času temperovania nie je potrebné
- Intuitívne navádzanie používateľa pomocou farebného dotykového displeja
- Jednoduché čistenie vďaka odnímateľnej vyhrievacej platni a zbernej miske

Integrovaný funkčný test

- Kontrola funkcií prístroja
- Používanie ďalších meracích prístrojov nie je potrebné
- Možnosť prihlasovania pomocou USB kľúča

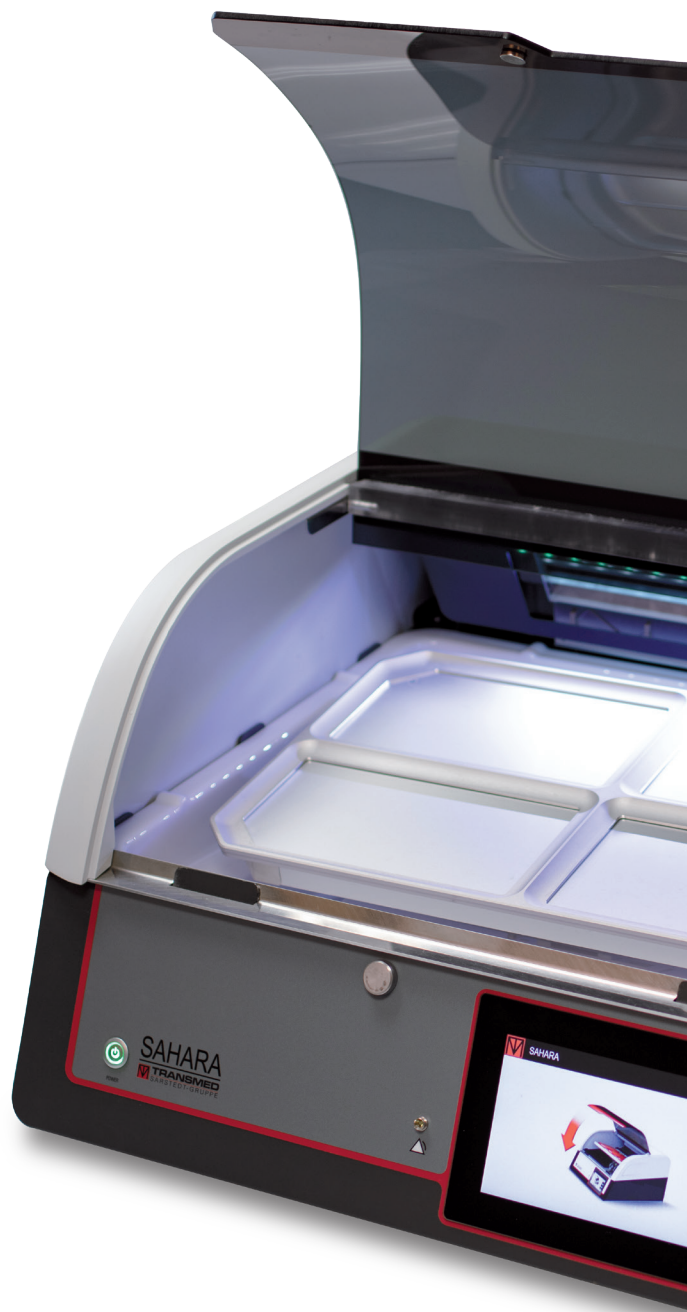

Monitorovanie teploty

- Samostatné sledovanie teploty a indikácia stavu bez ľadu každého krvného produktu
- Automatické rozpoznávanie stavu skupenstva a pohodlná zmena počas procesu temperovania
- Temperovanie pri konštantnej, predvoliteľnej teplote okolia medzi 37 °C a 42 °C
- Alarm prehriatia
- Pripomenka na vybratie krvných produktov



7" farebný dotykový displej


- Intuitívne a rýchle navádzanie užívateľa
- Oneskorená reakcia tlačidiel zabráni náhodnému ukončeniu procesu temperovania

Správa údajov

- Voliteľné
- Čítanie registračných údajov pomocou skenera čiarových kódov
- Dokumentácia teplotného profilu pre každý krvný vak
- Prenos údajov cez USB kľúč
- Indikácia stavu záznamov

Nastavenia

- Výber z rôznych jazykov systému
- Úprava cieľovej teploty
- Nastavenie hlasitosti pre nápovedy a alarmy
- Aktivácia správy údajov

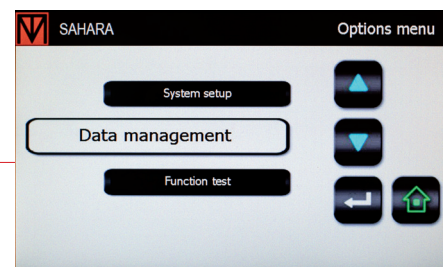

SAHARA 4

Informácie pre objednanie

Objednávacie číslo	Popis	Balenie.
97.8720.500	SAHARA 4	1

Príslušenstvo

Objednávacie číslo	Popis	Balenie.
97.8720.440	Skener TOUCH 65 PRO USB	1

Technické údaje

Rozmery (Š x V x H):	574x348x554 mm
Váha:	27,3 kg
Nominálne napätie:	100 – 240 V AC
Frekvencia napájania:	50/60 Hz
Maximálny príkon:	1000 W

Distributed by:

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com