

12 ml konik tabanlı tüp


Çok sayıda laboratuvar uygulamaları ve hassas analizler, numunenin görsel kontrolünün ve hacim tahmininin yapılmasını gerektirmektedir. Sarstedt özellikle bu uygulamalar için cam gibi berrak, transparan polistrenden 12 ml konik tabanlı tüpler sunmaktadır.

0,5 ml'lik adımlara sahip kabartma skala koyu ve bulanık sıvılarda dahi dolun miktarının güvenli kontrolünü sağlar. Yüksek yoğunlukta katı maddelerin düşük miktarları dahi konik yapı sayesinde santrifüj sırasında güvenilir şekilde tüp tabanında toplanır.

Sarstedt, çeşitli uygulama alanlarında en uygun kullanım için polistrenden 110 x 17 mm santrifüj tüplerini pratikte kendini kanıtlamış istif paketi ve steril varyant olarak da sunmaktadır. Termal, kimyasal ve mekanik zorlanmaların yüksek olduğu uygulamalarda alternatif olarak son derece dayanıklı ve otoklavlanabilir polipropilenden üretilen konik tabanlı tüpler kullanılabilir. Bu genişletilmiş ürün gamı 105 x 16,8 mm ve 95 x 16,8 mm konik tabanlı tüplere üniversal bir alternatif oluşturur.

Ürünün başlıca avantajları:

- Kolay hacim kontrolü
- İstif paketi sayesinde %40 yer tasarrufu
- Kapağı takılı steril versiyon

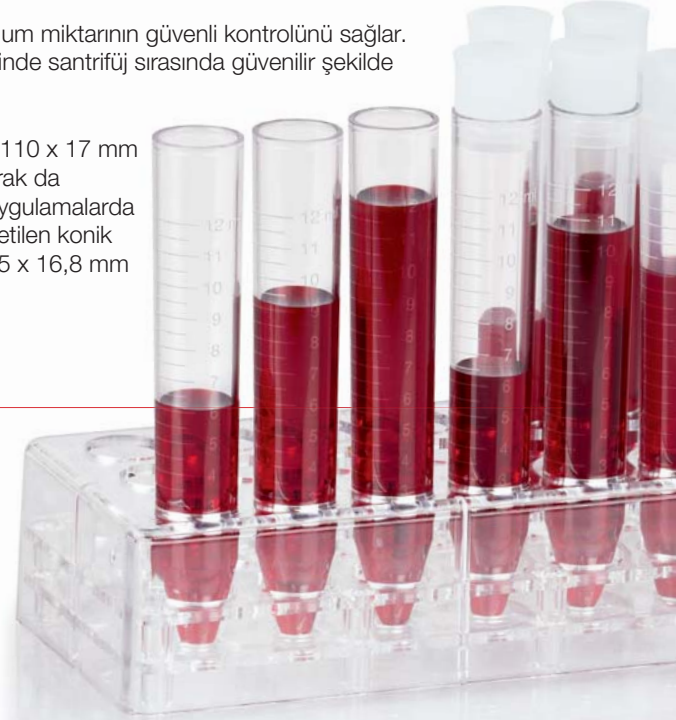

ÖNERİ

Son derece transparan polipropilenden üretilmiş 10 ml konik tabanlı tüplerimizi de deneyin. Büyük yazı alanı, net ve dayanıklı işaretleme için yeterli yer sunar. Basılı beyaz skala doluluk seviyesi kontrolünü daha da kolaylaştırır.

Sipariş bilgileri

Sipariş no.	Materyal	Versiyon	Uygun kapak	Ambalaj	Alternatif teşkil ettiği ürün
57.462	Polistiren	Torba	65.793 65.816	1.000/Kutu 500/Torba	57.464.005 57.469
57.462.015	Polistiren	İstif paketi	65.793 65.816	1.000/Kutu 250/İstif paketi	57.464
57.462.001	Polistiren	steril, kapağı takılı	---	500/Kutu 100/Torba	57.464.001
57.527	Polipropilen	Torba	65.793 65.816	1.000/Kutu 500/Torba	57.513 57.519

Sipariş bilgisi - 10 ml konik tabanlı tüp

Sipariş no.	Materyal	Uygun kapak	Ambalaj
62.9924.272	Polipropilen	65.816 65.720 65.793	1.000/Karton 500/Torba

SARSTEDT INTERNATIONAL GmbH
TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSU
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A Giriş
Kat:27, D:158 İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 216 29018 65
Fax: +90 216 290 18 64
info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com