


Low Profile PCR-Artikel

Optimiert für die „Fast-PCR“

NEU!

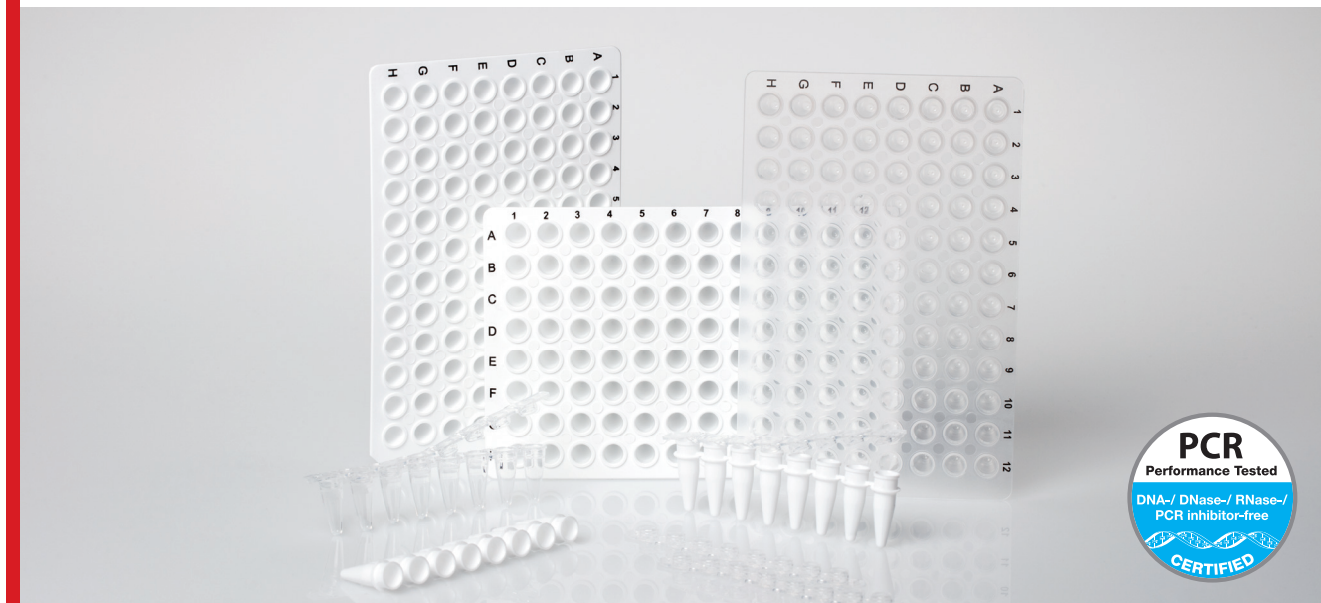

Die neuen Low Profile PCR-Ketten und -Platten sind speziell für kleine Reaktionsansätze unter 20 µl geeignet und werden für sogenannte „Fast PCR Thermocycler“ (Blockformat 0,1 ml) benötigt.

Produktfeatures:

- Durch die kürzere Bauweise steht dem flüssigen PCR-Ansatz beim Erhitzen weniger Luftraum für den Übertritt in die Gasphase zur Verfügung, wodurch weniger Kondensation an den seitlichen Wänden auftritt und die Reaktionsbedingungen konstanter gehalten werden.
- Extrem gleichmäßiges und dünnwandiges Design für eine schnelle Temperaturübertragung in den Reaktionsraum.
- Für eine optimale Fluoreszenzdetektion bei der qPCR stehen weiß eingefärbte Varianten zur Verfügung.
- Zertifiziert, frei von humaner DNA, bakterieller DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren und damit optimal auf die Anforderungen bei der Arbeit mit Nukleinsäuren ausgelegt.

Bestellinformation

Bestell Nummer	Bezeichnung	Verpackung
72.982.002	Multiply®-µStripPro LP, transparent; inklusive Deckelkette	125/1.250
72.982.092	Multiply®-µStripPro LP, weiß; inklusive Deckelkette	125/1.250
72.1977.202	Multiply® PCR-Platte LP, transparent	20/100
72.1977.232	Multiply® PCR-Platte LP, weiß	20/100

SARSTEDT AG & Co. KG
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon: +49 2293 305 0
Telefax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**