


# ロープロファイルPCR製品

Fast PCRに最適

NEW!

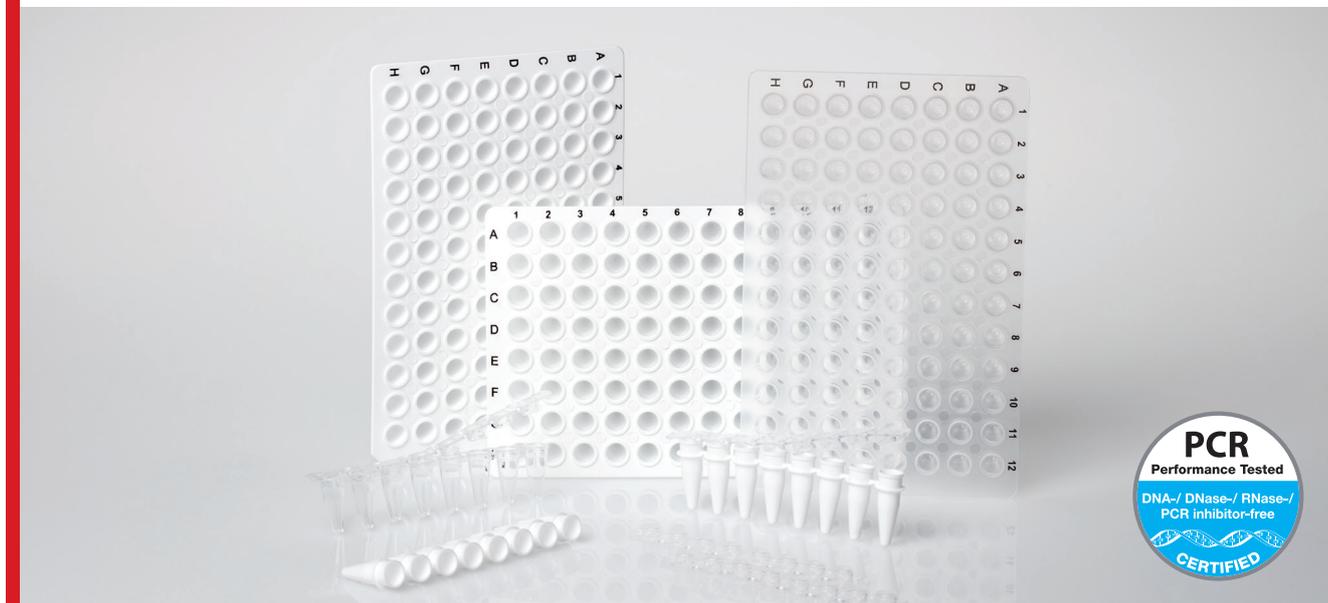

新タイプのロープロファイルPCR8連チューブとプレートは20  $\mu$ l以下の小容量で「Fast PCRサーモサイクラー」(0.1 ml ブロックフォーマット)に適しています。

## 特徴

- ロープロファイルデザインの小容量設計でPCR試薬やサンプルが加熱されても、気相に触れるスペースが少ないためPCR作業の加熱中にチューブ内壁に結露ができるのを防ぎ、反応効率を一定に保つことができます。
- 均一・肉薄設計でリアクションチャンバーへの迅速な熱伝導が可能。
- qPCR時の蛍光検出に最適な白色のタイプもご用意しています。
- ヒトDNA、バクテリアDNA、DNase、RNaseおよびPCR inhibitorフリーであることが認定されており、核酸を扱うのに便利です。

## オーダーインフォメーション

Art. No.	仕様	包装単位
72.982.002	Multiply® $\mu$ StripPro LP、ナチュラル (ナチュラルキャップ同梱)	125 / 1,250
72.982.092	Multiply® $\mu$ StripPro LP、白色 (ナチュラルキャップ同梱)	125 / 1,250
72.1977.202	Multiply® PCRプレート LP、ナチュラル	20 / 100
72.1977.232	Multiply® PCRプレート LP、白色	20 / 100

ザルスタット株式会社  
〒101-0047  
東京都千代田区内神田2-16-11  
内神田渋谷ビル 8階  
Tel: (03)3526 3530  
Fax: (03)3526 0870  
info.jp@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**