

S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT


Bescherming tegen licht – vanaf
bloedafname tot opslag



- Bescherming tegen licht vanaf het begin
- Bescherming tegen licht uit hele uv-bereik
- Meer duurzaamheid op de werkplek door het vermijden van aluminiumfolie
- Gebruikelijke duidelijke monsteridentificatie dankzij altijd leesbare etiketten
- Procesgeschikte preanalyse

Met de S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT hoeft het bloedmonster niet meer in bijvoorbeeld aluminiumfolie gewikkeld te worden. De directe afleesbaarheid en dus de gebruikelijke gemakkelijke monsteridentificatie blijft behouden. Bovendien kan men een eenvoudige bijdrage leveren aan meer duurzaamheid op de werkplek door grondstoffen (aluminiumfolie) te besparen.

Bescherming tegen licht is gegarandeerd in het relevante uv-bereik (190-380 nm). De lichtdoorlaatbaarheid in dit bereik is gemiddeld minder dan 1%.

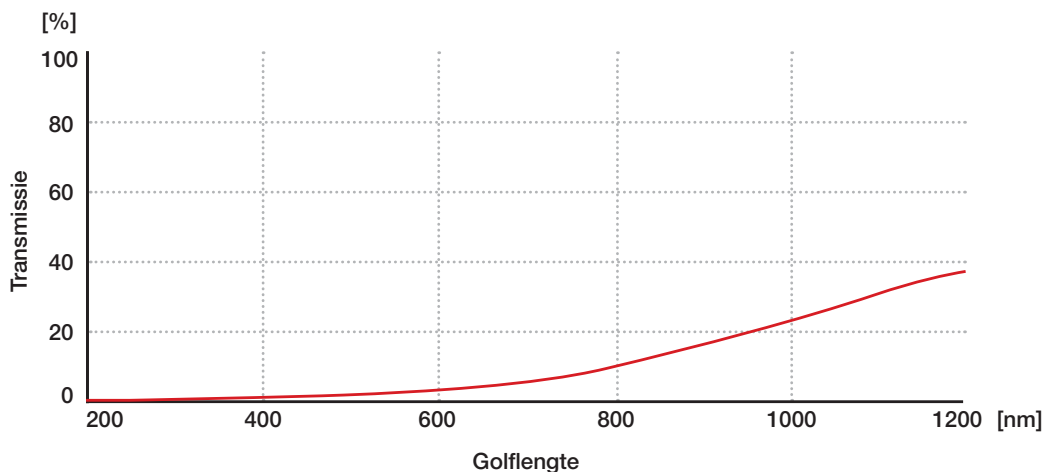

Afb. 1: Transmissie van de S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT-buiswand



Art.-nr.	Vorbereitung	Volume	Lengte / Ø	Verpakking
04.1925.003	S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT	4,0 ml	75x13 mm	500/verpakking 50/binnenverpakking

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com