

SC 2700

Centrífuga de mesa de alto rendimiento con rotor basculante



- Centrifugado hasta **máx. 2.700 x g**
- Manejo sencillo gracias a programas preinstalados
- Funcionamiento silencioso y prestaciones de calidad



El funcionamiento extremadamente silencioso (≤ 54 dB(A)) permite trabajar sin interferir en la rutina diaria de la consulta

Pantallas de gran tamaño para ajuste e indicación de los valores NOMINALES/ REALES, así como del tiempo de funcionamiento restante

Cámara con rotor basculante de 6 posiciones para una capa de separación óptima



Programas preinstalados y un programa de ajuste variable

Alta calidad – „made in German“ conforme a IvD según la norma (UE) 2017/746

Información técnica

- Capacidad máx.: 6x10 ml
- FCR máx.: 2.700 x g
- RPM máx.: 4.310 min⁻¹
- Nivel de ruido máx.: ≤ 54 dB(A)
- Peso: 16,5 kg
- Dimensiones: 350x430x260 mm (A x L x H)

Programas preinstalados para un manejo intuitivo

- Gracias a los programas preinstalados, puede centrifugar sangre y orina con los ajustes ideales con solo pulsar un botón. El manejo incorrecto es prácticamente imposible.
- Dispone de un programa variable para sus condiciones de centrifugado individuales. El ajuste de la velocidad y el tiempo se realiza mediante los botones “+” y “-”, el control a través de las amplias pantallas.

Rotor basculante de hasta 2.700xg

- Gracias al alto rendimiento de hasta 2.700 x g puede centrifugar tubos de suero-gel habituales en el mercado en solo 8 minutos. Una importante ventaja temporal de unos 5 minutos frente a otras centrifugas.
- El rotor basculante de 6 posiciones proporciona una capa de separación horizontal limpia en sus muestras.



Centrifugado de Salivette® para la obtención de saliva.



Centrifugado de S-Monovette® para la obtención de suero/plasma.

Funcionamiento muy silencioso

- Gracias al funcionamiento silencioso se puede realizar el centrifugado sin interferir en la rutina diaria de la consulta.

Conforme a IvD según la norma (UE) 2017/746

- SC 2700 es sinónimo de máxima precisión, fiabilidad y seguridad.

Fabricación de alta calidad – made in Germany

- La utilización de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil de la centrifuga.

Interfaz de usuario intuitiva

Puede elegir entre 3 ajustes:

- Programa 1: Sangre, 2.700 x g durante 8 minutos
- Programa 2: Orina, 500 x g durante 5 minutos
- Programa 3: ajuste variable

Centrífuga basculante SC 2700



Capa de separación óptima gracias al rotor basculante

La centrífuga SC 2700 está especialmente diseñada para el uso en consultas médicas o pequeñas unidades de laboratorio y puede utilizarse para todos los tubos de muestras habituales con una longitud máx. de 100 mm y un diámetro máx. de 18 mm. Gracias al rotor basculante se crea una barrera de gel fiable en los tubos de suero o plasma. Esta barrera de difusión garantiza una estabilidad exacta de la muestra.

Calculadora para centrifugado:




www.sarstedt.com/service/zentrifugation

Centrifugado con rotor basculante (SC 2700)


- Capa de separación gruesa y estable
- Más material disponible para análisis

Para la formación óptima de la capa de gel, recomendamos utilizar **rotors basculantes** para el centrifugado de la S-Monovette®.

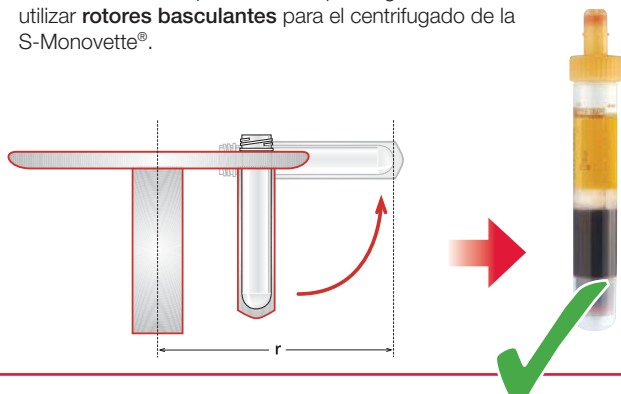

Centrifugado con rotor de ángulo fijo

- Capa de separación fina e inestable
- Menos material de análisis

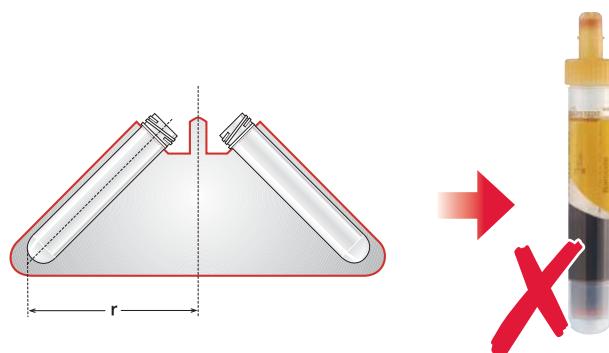

Información

Referencia	Descripción	Volumen de suministro
90.183.000	Centrífuga SC 2700	Centrífuga, fuente de alimentación, rotor basculante, 6 soportes de tubos
90.183.100	Soporte de tubo SC 2700 hasta una longitud de 100 mm	2 uds./bolsa
90.183.200	Adaptador para centrifugado de tubos pequeños	2 uds./bolsa
90.183.300	Rotor basculante incl. soportes de tubos	Rotor basculante, 6 soportes de tubos

Descubra las soluciones 360° para su preanalítica de SARSTEDT



workflow.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriol
08430 La Roca del Vallès
Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78
info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**