

SC 2700

Kraftig bordsentrifuge med swing-out rotor



- Sentrifugering opptil **maks. 2700 x g**
- Enkel betjening takket være forhåndsinstallerte programmer
- Høy kvalitet og stillegående drift



Meget stillestående drift (≤ 54 dB(A)) muliggjør arbeid uten begrensninger i praksisens åpningstider

Store displayer til innstilling og visning av MÅL-/FAKTISK-verdi samt gjenværende løpetid

Rotorkammer med 6-delt swing-out rotor for et optimalt skillelag



Forhåndsinstallerte programmer samt et variabel innstillbart program

Høy kvalitet – «made in Germany»
IvD-samsvar iht. (EU) 2017/746

Teknisk informasjon

- Maks. kapasitet: 6x10 ml
- Maks. RZB (g-kraft): 2700xg
- Maks. o/min: 4310 min⁻¹
- Maks. støynivå: ≤ 54 dB(A)
- Vekt: 16,5 kg
- Dimensjoner: 350x430x260 mm (BxDxH)

Forhåndsinstallerte programmer for intuitiv betjening

- Takket være de forhåndsinstallerte programmene sentrifugeres blod og urin ved optimale innstillinger med bare ett knappetrykk. Feilbetjening er så godt som utelukket.
- Et variabelt program er også tilgjengelig for dine individuelle sentrifugeringsbetingelser. Innstillingen av turtall og varighet gjøres med «+»- og «-»-tastene, mens kontroll skjer via de store displayene.

Swing-out rotor med opptil 2700 x g

- Takket være den høye effekten på opptil 2700 x g kan du sentrifugere alle standard serumgelrør på bare 8 minutter. Dette gir en tidsfordel på opptil 5 minutter i forhold til sammenlignbare sentrifuger.
- Den 6-delte utsvingrotoren sørger for et rent, vannrett skillelag mellom prøvene dine.



Sentrifugering av Salivetter for spyttutvinning.



Sentrifugering av S-Monovetter for serum-/plasmautvinning.

Meget stillestående drift

- Den meget stillestående driften muliggjør sentrifugering i løpet av praksisverdagen, helt uten begrensninger.

IvD-samsvar i henhold til (EU) 2017/746

- SC 2700 står for den høyeste presisjon, pålitelighet og sikkerhet.

Høykvalitets utførelse – produsert i Tyskland

- Fremstillingen med høykvalitets materialer garanterer at sentrifugen har en lang levetid.

Intuitivt brukergrensesnitt

Du kan velge mellom 3 innstillinger:

- Program 1: Blod, 2700 x g i 8 minutter
- Program 2: Urin, 500 x g i 5 minutter
- Program 3: kan innstilles variabelt

Utsvingsentrifugen SC 2700



Optimalt skillelag takket være swing-out rotor

Sentrifugen SC 2700 er utformet spesielt for bruk på legekontorer eller små laboratorieenheter, og kan benyttes til alle standard prøverør med maks. 100 mm lengde og maks. 18 mm diameter. Takket være den medfølgende swing-out rotoren oppnås en pålitelig gelbarriere i serum- eller plasmarør. Denne diffusjonsbarrieren garanterer en nøyaktig prøvestabilitet.

Sentrifugeringskalkulator:




www.sarstedt.com/service/zentrifugation

Sentrifugering med swing-out rotor (SC 2700)


- Tykt og stabilt skillelag
- Mer materiale tilgjengelig for analysesystemer

For optimal dannelse av gellaget anbefaler vi bruken av **utsvingrotorer** ved sentrifugering av S-Monovette®.

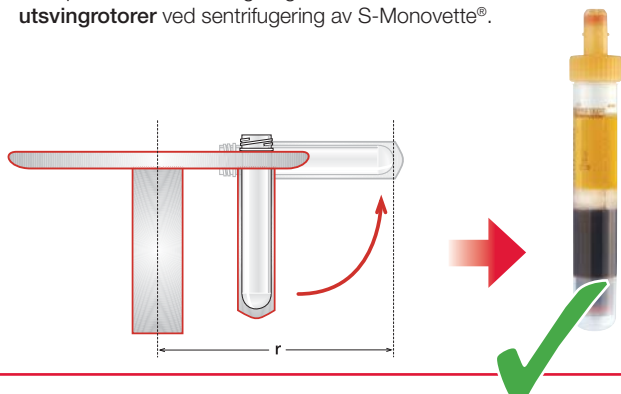

Sentrifugering med fastvinkelrotor

- Tynt og ustabilt skillelag
- Mindre materiale tilgjengelig for analysesystemer

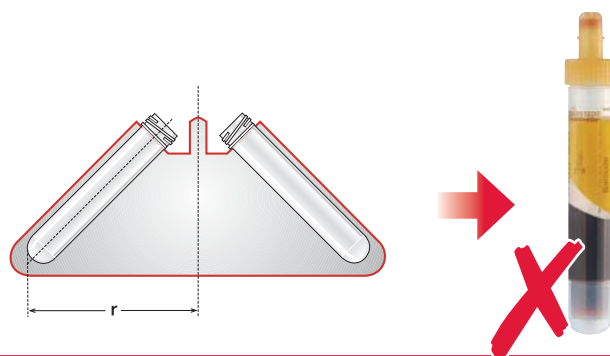

Bestillingsinformasjon

Bestillingsnr.	Betegnelse	Leveringsomfang
90.183.000	Sentrifugen SC 2700	Sentrifuge, swing-out rotor, 6 stk. rørholdere
90.183.100	Rørholder til SC 2700 med opptil 100 mm lengde	2 stk./pose
90.183.200	Adapter for sentrifugering av korte rør	2 stk./pose
90.183.300	Swing-out rotor inkl. rørholdere	Swing-out rotor, 6 stk. rørholdere

Oppdag 360°-løsningene for preanalyse fra SARSTEDT



workflow.sarstedt.com

SARSTEDT AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tel: +47 64 85 68 20
info.no@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**