

# Urindrainage

Produktlösungen für  
die individuelle Patienten-  
versorgung



# A06 W

- ✓ Nadelfreie, flache Entnahmestelle
- ✓ Anschluss des Wechselbeutels mit Bajonett-Verschluss
- ✓ Universeller Einsatz durch Haltebänder und Befestigungshaken
- ✓ Wechselbeutel mit 2.000 ml und 3.000 ml Fassungsvermögen erhältlich




Das System, wenn präzises ablesen erforderlich ist



Die präzise, leicht ablesbare Graduierung ermöglicht eine Milliliter genaue Erfassung von Kleinstmengen. Das Gesamtmessvolumen von 500 ml sowie die übersichtliche und klare Graduierung erlauben exakte Bilanzierung auch bei hohen Ausscheidungsraten. Mengen über 500 ml werden automatisch durch den Überlauf in den gut ablesbaren Auffangbeutel geleitet.

Hygienische & benutzerfreundliche Handhabung des Wechselbeutels

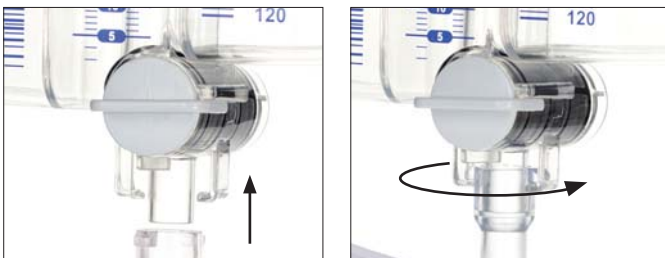

Der Bajonett-Verschluss ermöglicht ein schnelles und hygienisches Wechseln sowie einen sicheren Anschluss an die Messkammer.

DEHP frei



Nadelfreie Probenentnahme



Flache Entnahmestelle zur sicheren Desinfektion und Probenentnahme.

# UD 3PLUS

- ✓ Nadelfreie, flache Entnahmestelle
- ✓ Großer Doppelhaken
- ✓ 2 Schlauchlängen: 100 cm und 120 cm
- ✓ 2.000 ml Fassungsvermögen



## Das System für den immobilen Patienten

Geschlossenes Drainage-System für die hygienische Versorgung von Katheterträgern mit dauerhafter Bettlägerigkeit.

## Großer Doppelhaken



Der große Doppelhaken ermöglicht leichtes und sicheres Anbringen an den Bettenholmen.

## Tropfkammer



Mit hydrophober Belüftungsfläche für optimalen Druckausgleich und Ablaufverhalten des Urins. Die Tropfkammer ermöglicht besten Schutz vor ascendierender Keimwanderung.

Das horizontal angeordnete Membran-Rückschlagventil gewährleistet optimales Öffnungsverhalten bei kleinsten sowie größten Urinabflussmengen und verhindert den Urinrückfluss unabhängig von der Lage des Beutels.

DEHP frei



## Nadelfreie Probenentnahme



Flache Entnahmestelle zur sicheren Desinfektion und Probenentnahme.

# TUR-BAG

- ✓ Nadelfreie, flache Entnahmestelle
- ✓ Mit und ohne Pumpball erhältlich
- ✓ 4.000 ml Fassungsvermögen



## Der Beutel für die Blasenspülung

Ein geschlossenes Urindrainage-System für die postoperative Blasenspülung.

## Pumpball



Mit Pumpball zur kontrollierten postoperativen Blasenspülung, insbesondere nach Prostataresektion.

## Nadelfreie Probenentnahme



Flache Entnahmestelle zur sicheren Desinfektion und Probenahme.

DEHP frei





# DRAINAGEBEUTEL

- ✓ Universeller Stufenkonnektor mit integrierter Durchstechmembrane zur Urinprobenabnahme
- ✓ Großlumiger, knickstabiler Drainageschlauch bietet optimalen Harnfluss
- ✓ 2.000 ml Fassungsvermögen



DEHP frei

## Optimale Patientenversorgung mit dem Drainagebeutel

Der Drainagebeutel zeichnet sich durch eine extra starke Folie und eine bakteriendichte, hydrophobe Beutelbelüftung aus. Dies bietet sich vor allem bei Kurzzeitkatheterisierung an.

## T-Tap Ablasshahn



Praktische Einhandbedienung und effektiver Schutz vor Kontamination

## Nadelfreie Probenentnahme



Flache Entnahmestelle zur sicheren Desinfektion und Probenentnahme.




# URIN- & SEKRETBEUTEL

- ✓ Universeller Stufenkonnektor
- ✓ Urin- und Sekretbeutel mit 1.500 ml und 2.000 ml Fassungsvermögen erhältlich
- ✓ Schlauchlänge 90 cm
- ✓ Steril und unsteril erhältlich



## Rückschlagventil

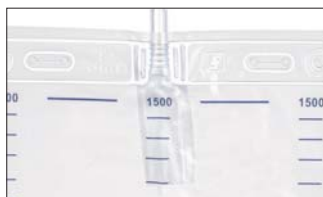


Das Folienrückschlagventil verhindert zuverlässig den Rücklauf von Urin.

## Push-Pull Ablassventil




Das Push-Pull Ablassventil ermöglicht eine schnelle und einfache/hygienische Entleerung des Beutels.

## Luer-Lock Anschluss

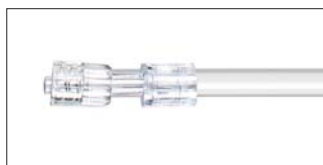

Bei dem Gallensekretbeutel stellt der (männliche) Luer-Lock Anschluss eine sichere Verbindung mit der (Gallen-) Drainage her.

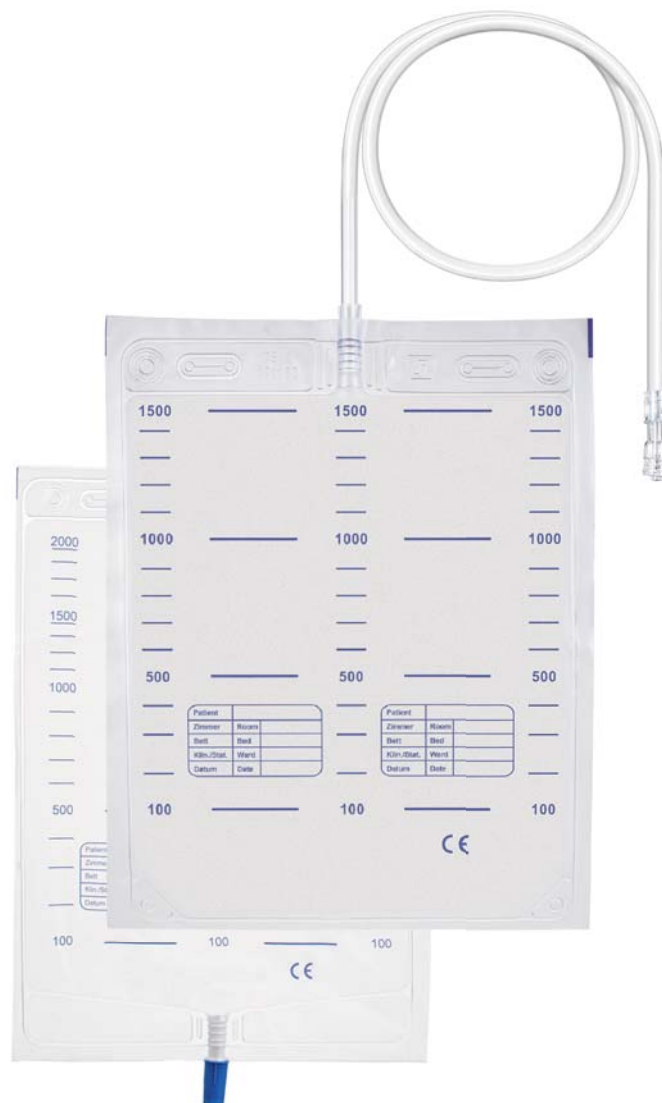

# UROSTRETCH

- ✓ Keinerlei Kontakt des Beinbeutels mit der Haut
- ✓ Fixierung des Beutels über die gesamte Fläche
- ✓ Dämpfung von Flüssigkeitsgeräuschen



## UroStretch Beinbeutel-Befestigung



Die elastische, textile Schlauchbandage zur Beinbeutelfixierung. Einsetzbar bei allen Urin-Beinbeuteln bis 750 ml Füllvolumen. Der UroStretch ist mehrmals verwendbar, waschbar (40 °C) und bietet einen hohen Tragekomfort.



# BESTELL- INFORMATIONEN



## Urinmesssystem A06 W

Bestell-Nr.	Beschreibung	Verpackung
74.5681.200	Urinmesssystem A06 W 500 ml mit beiliegendem 2,0 l Wechselbeutel ohne Ablasshahn mit Haltebändern und Befestigungshaken, einzeln steril verpackt	10
74.5684.001	Wechselbeutel 2,0 l für A06 W ohne Ablasshahn, einzeln steril verpackt	50
74.5684.002	Wechselbeutel 2,0 l für A06 W mit Ablasshahn, einzeln steril verpackt	50
74.5685.001	Wechselbeutel 3,0 l für A06 W ohne Ablasshahn, einzeln steril verpackt	50
74.5685.002	Wechselbeutel 3,0 l für A06 W mit Ablasshahn, einzeln steril verpackt	50

## UD 3plus

Bestell-Nr.	Beschreibung	Verpackung
74.5330.500	UD 3plus Urindrainage-System 2,0 l, mit Doppelhaken, Schlauchlänge 100 cm, einzeln steril verpackt	20
74.5330.520	UD 3plus Urindrainage-System 2,0 l, mit Doppelhaken, Schlauchlänge 120 cm, einzeln steril verpackt	20

## TUR-BAG

Bestell-Nr.	Beschreibung	Verpackung
74.5340.500	TUR-BAG 4,0 l mit Pumpball, Schlauchlänge 100 cm, einzeln steril verpackt	10
74.5340.501	TUR-BAG 4,0 l ohne Pumpball, Schlauchlänge 100 cm, einzeln steril verpackt	20

## Drainagebeutel

Bestell-Nr.	Beschreibung	Verpackung
74.5485.005	Urin-Drainagebeutel 2,0 l, mit Folienrückschlagventil, T-Tap Ventil, Schlauchlänge 100 cm, einzeln steril verpackt	50





### Urin- und Sekretbeutel

Bestell-Nr.	Beschreibung	Verpackung
74.5218.101	Urinbeutel 1,5 l, mit Folienrückschlagventil, Push-Pull Ventil, Schlauchlänge 90 cm, unsteril	150
74.5228.101	Urinbeutel 2,0 l, mit Folienrückschlagventil, Push-Pull Ventil, Schlauchlänge 90 cm, unsteril	150
74.5228.005	Urinbeutel 2,0 l, mit Folienrückschlagventil, Push-Pull Ventil, Schlauchlänge 90 cm, einzeln steril verpackt	100
74.5283.101	Urinbeutel 1,5 l, mit Folienrückschlagventil, Schlauchlänge 90 cm, unsteril	200
74.5283.005	Urinbeutel 1,5 l, mit Folienrückschlagventil, Schlauchlänge 90 cm, einzeln steril verpackt	100
74.5284.101	Urinbeutel 2,0 l, mit Folienrückschlagventil, Schlauchlänge 90 cm, unsteril	200
74.5284.005	Urinbeutel 2,0 l, mit Folienrückschlagventil, Schlauchlänge 90 cm, einzeln steril verpackt	100
74.5281.101	Urin- und Sekretbeutel 1,5 l, Schlauchlänge 90 cm, unsteril	200
74.5281.005	Urin- und Sekretbeutel 1,5 l, Schlauchlänge 90 cm, einzeln steril verpackt	100
74.5282.101	Urin- und Sekretbeutel 2,0 l, Schlauchlänge 90 cm, unsteril	200
74.5282.005	Urin- und Sekretbeutel 2,0 l, Schlauchlänge 90 cm, einzeln steril verpackt	100
74.5286.005	Gallensekretbeutel 1,5 l ohne Bodenablauf, mit Luer-Lock, Schlauchlänge 90 cm, einzeln steril verpackt	100

### Beinbeutelbefestigung

Bestell-Nr.	Beschreibung	Verpackung
74.5767.001	UroStretch, Größe S	10
74.5767.002	UroStretch, Größe M	10
74.5767.003	UroStretch, Größe L	10
74.5767.004	UroStretch, Größe XL	10

## SARSTEDT AG & Co. KG

Postfach 12 20  
D-51582 Nümbrecht

Tel.: +49 2293 305 0  
Fax: +49 2293 305 3450

Kundenservice Deutschland  
Telefon 0800 0 83 305 0

[info@sarstedt.com](mailto:info@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)