

NFT

Sistema de colheita de urina

Colheita higiênica, em sistema fechado e sem agulha



NFT Transferência sem agulha

Pré-análise de urina
2.0

O primeiro sistema de colheita de urina da SARSTEDT, para a colheita higiênica e sem agulha de amostras de urina

Higiênico. Prático. Seguro.

Como tornar a colheita de amostras de urina ainda mais segura, higiênica e fácil? A resposta a esta questão pode ser encontrada nos inovadores produtos do sistema NFT. Como o primeiro sistema de colheita de urina fechado e sem agulha da SARSTEDT, a nova família de produtos combina as vantagens dos produtos existentes numa só solução.


Novos padrões para pré-análise de urina



- Disponível na versão de contentor de urina de 100 ml e também na de 3 litros, para colheita de urina de 24 horas
- Sistema de colheita sem agulha
- Armazenamento e transporte seguros
- Transferência de urina simples e higiênica com a Monovette® de Urina
- Os contentores NFT não necessitam de ser eliminados em contentores de corto-perfurantes

Simplesmente prático

A Monovette® de Urina permite a colheita higiênica de urina e também é apropriada, como tubo primário, para uso com tiras de teste e analisadores e também como tubo de centrifuga, para a recolha de sedimento urinário

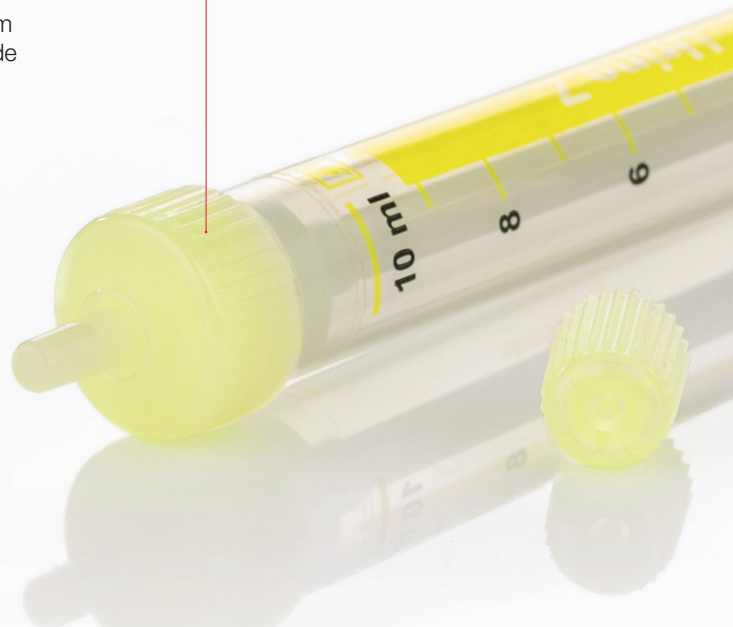


Novidade

Com a nova função de colheita sem agulha, estas deixam de ser necessárias. A Monovette® de Urina penetra facilmente a inovadora membrana NFT.


Após a colheita fácil, o acesso veda novamente de forma firme e higiênica, mesmo após múltiplas colheitas.

Não existe risco de infecção por ferimentos com agulhas.

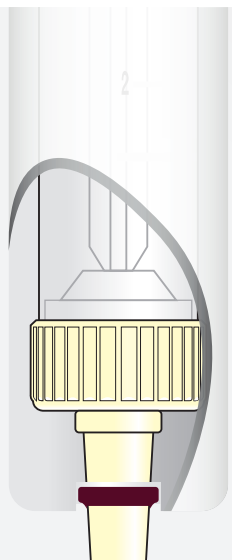

CONVINCENTE

- ✓ **Minimização do risco de lesões e mais segurança na aplicação** para profissionais de saúde e pacientes, através do sistema de colheita sem agulha
- ✓ **Economia na eliminação**, pois os componentes do sistema NFT não têm de ser eliminados, separadamente, em contentores de corto-perfurantes

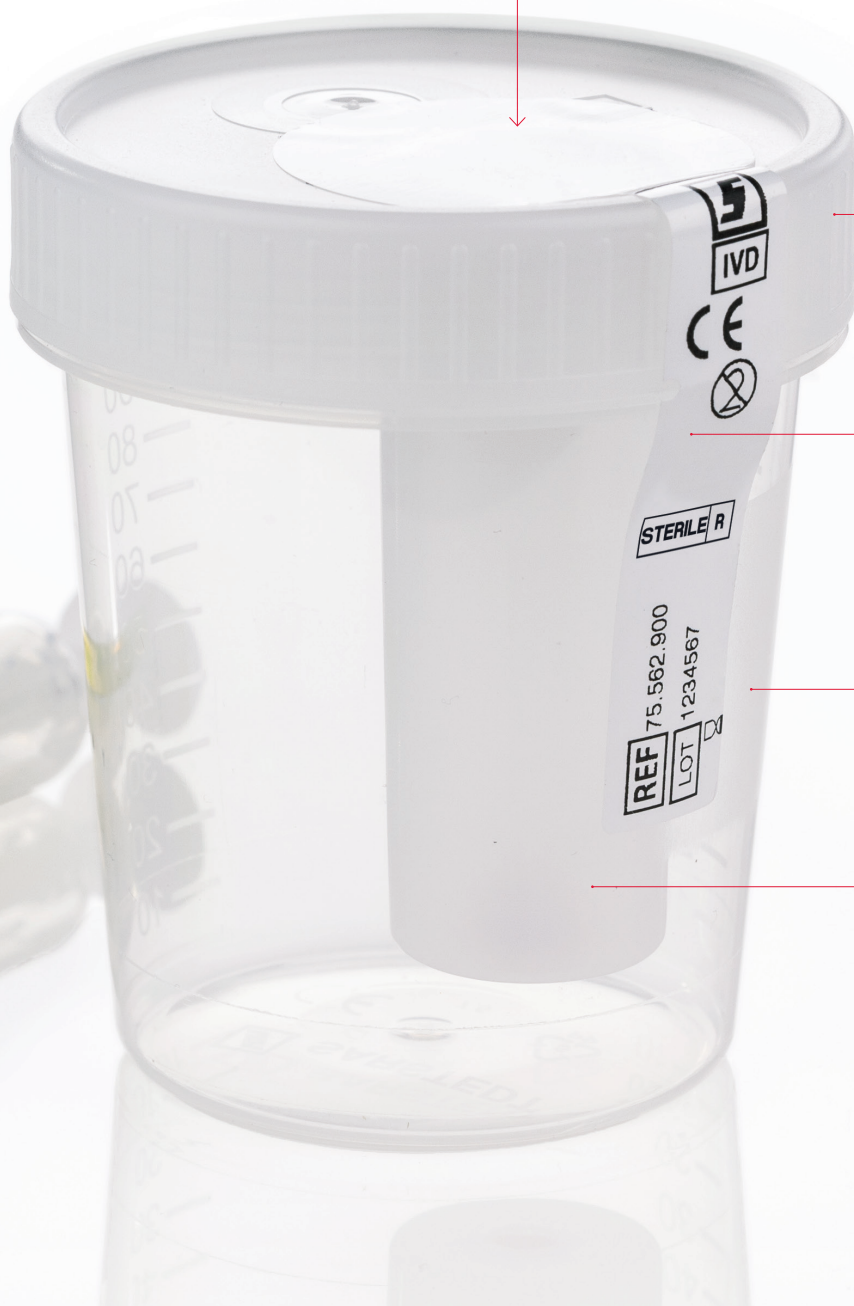

Estanque a líquidos e odores

Tampa de rosca com unidade de transferência

Selado

Quando intacta, a etiqueta de segurança indica a esterilidade interna do contentor NFT

Transparente

Recipiente robusto e altamente transparente, feito em polipropileno (PP), para uma boa visualização

Inovador

Unidade de transferência sem agulha, com membrana NFT perfurável

NFT

Sistema de colheita de urina

O melhor de todos os sistemas

O sistema NFT composto pela Monovette® de Urina, o contentor NFT e pelo contentor de urina de 24 horas NFT, garantem condições de trabalho higiénicas durante todo o processo de colheita de amostras:

- Com a Monovette® de Urina e a respetiva cânula incluída, é possível realizar o processo de colheita sem agulha, mesmo com uma quantidade muito pequena de amostra. Não é necessária uma unidade de transferência separada, como sucede com os sistemas de vácuo.
- O manuseamento é intuitivo e pode ser aprendido rapidamente e sem elevado nível de formação.
- Com a Monovette® de Urina, o processo de colheita pode ser repetido, se necessário, graças ao princípio de aspiração. Não existe risco de perda de função devido a um uso incorreto.
- Graças à sofisticada função de colheita sem agulha, o risco de lesões para funcionários e pacientes é minimizado.
- Após a colheita, os produtos do sistema NFT não têm de ser eliminados em separado o que poupa tempo e dinheiro em comparação com produtos com agulha integrada.

Bem idealizado

O contentor opaco de urina de 24 horas NFT com 3 litros de volume e pega ergonómica, tem também uma ampla abertura de tampa e uma janela de inspeção transparente, graduada em incrementos de 100 ml



Monovette® de Urina – trabalho higiénico em apenas algumas etapas

- A Monovette® de Urina permite a colheita higiénica de amostras, sem recurso a agulhas, a partir de contentores de colheita de urina ou de sistemas de drenagem de urina.
- A análise de urina com tiras de teste disponíveis comercialmente, pode ser realizada diretamente na Monovette® de Urina.
- A Monovette® de urina é adequada para transporte e expedição, de acordo com o regulamento para embalagens P650 da ADR e IATA. Pode ser usada em centrífugas e em analisadores de sedimento urinário.



Manuseamento fácil: Contentor NFT de 100 ml



Conveniente para colheita de urina de 24 horas: Contentor NFT de 3 litros



O contentor NFT de 3 litros garante que a colheita de urina seja realizada de forma higiénica, graças à função de colheita de urina em sistema fechado.



Consulte o tutorial para o manuseamento fácil dos produtos NFT:
sarstedt.com/nft-tu-pt

PEÇA UMA AMOSTRA GRATUITA



sarstedt.com/nft-sa-pt

A SARSTEDT está a definir novos padrões com o sistema de colheita de urina NFT

Apenas a colheita limpa e correta de amostras garante resultados analíticos corretos. Os produtos do sistema NFT da SARSTEDT estabelecem o padrão para uma pré-análise precisa, adequada a uma utilização de rotina e que combina com a máxima segurança para utilizadores e pacientes.




Os produtos NFT não têm de ser eliminados em separado.

Fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia
de sistemas coordenados.

Descubra as
soluções de 360°
para os seus
sistemas
pré-analíticos
da SARSTEDT

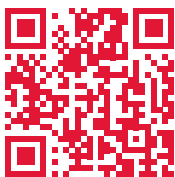

sarstedt.com/nft-wf-pt



Contentor NFT 100 ml

Ref. ^a	Volume	C x Ø	Modelo	Integridade	Embalagem (caixa interna/caixa externa)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	com etiqueta de segurança e unidade de transferência	estéril	200 / 200

Contentor NFT 3,0 l

Ref. ^a	Volume	C x L x A	Modelo	Integridade	Embalagem (caixa interna/caixa externa)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	com unidade de transferência e etiqueta do paciente, diâmetro de abertura 80 mm	-	30 / 30

Monovette[®] Z para urina - sem preparação

Ref. ^a	Volume	C x Ø	Modelo (amarelo)	Integridade	Embalagem (caixa interna/caixa externa)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente, individualmente embalada em blister	estéril	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente, individualmente embalada em blister	estéril	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente, com proteção contra a luz	-	64 / 512

Monovette[®] para urina ácido bórico - com estabilizador para testes microbiológicos

Ref. ^a	Volume	C x Ø	Modelo (verde)	Integridade	Embalagem (caixa interna/caixa externa)
10.256.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.256.021	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel, gravável, individualmente embalada em blister	estéril	100 / 500
10.260.001*	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.260.021*	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável, individualmente embalada em blister	estéril	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente, individualmente embalada em blister	estéril	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável, individualmente embalada em blister	estéril	100 / 500

Outros consumíveis para pré-análise de urina podem ser consultados em www.sarstedt.com

*Novo lançamento previsto para o 2.º trimestre de 2024

SARSTEDT S.A.

Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra

Tel.: +351 21 915 6010

Fax: +351 21 915 6019

info.pt@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Mais informações,
vídeos e pedidos de amostras:
sarstedt.com/nft-pt

Em caso de dúvidas:
Teremos todo o gosto em ajudar!

Visite o nosso site: www.sarstedt.com