

NFT

system na odber moču

Hygienický, uzavretý odber vzoriek
bez použitia ihly



NFT

Needle Free Transfer

Preanalytika
moču
2.0

Prvý systém na odber moču od spoločnosti SARSTEDT na hygienicky uzavretý odber vzoriek bez použitia ihly

Hygienické. Praktické. Bezpečné.

Ako môže byť odber vzoriek moču ešte bezpečnejší, hygienickejší a jednoduchší? Odpoveď na túto otázku poskytujú inovatívne produkty systému NFT. Ako prvý uzavretý systém na odber moču bez použitia ihly od spoločnosti SARSTEDT spája nový rad produktov a výhody existujúcich produktov do jedného riešenia.

Nové trendy v preanalytike moču



- k dispozícii ako pohár na moč NFT aj ako 3-litrová fľaša NFT na 24-hodinový zber moču
- systém na odber bez kovov a ihliel
- bezpečné skladovanie a bezpečná preprava
- jednoduchý a hygienický prenos moču pomocou skúmavky Urin Monovette®
- na likvidáciu výrobkov NFT nie je potrebná nádoba odolná proti prepichnutiu

Jednoducho praktické

Skúmavka Urin Monovette® umožňuje hygienický spôsob odberu vzorky moču a je vhodná aj ako skúmavka na analýzu testovacími prúžkami a do analyzátorov, aj ako centrifugačná skúmavka na získanie sedimentu




Novinka

Nová funkcia bezihlového odberu vzoriek už nevyžaduje ihlu. Skúmavka Urin Mono-vette® ľahko prenikne cez novú membránu NFT.


Po pohodlnom odbere sa prístup okamžite opäť tesne a hygienicky uzavrie, a to aj po niekoľkých odberoch.

Riziko infekcie v dôsledku poranenia ihlou nehrozí.

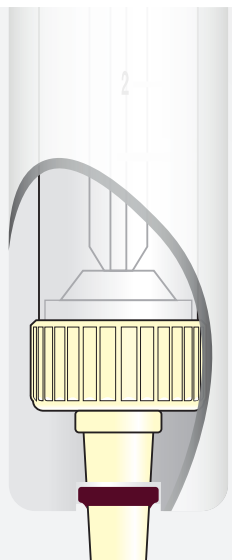

PRESVEDČIVÉ

- ✓ **Minimálne riziko poranenia a vyššia bezpečnosť pri používaní** pre personál a pacienta vďaka odberu vzorky bez použitia ihly
- ✓ **Úspora nákladov na likvidáciu**, pretože komponenty systému NFT sa nemusia likvidovať oddelene v nádobe odolnej proti prepichnutiu

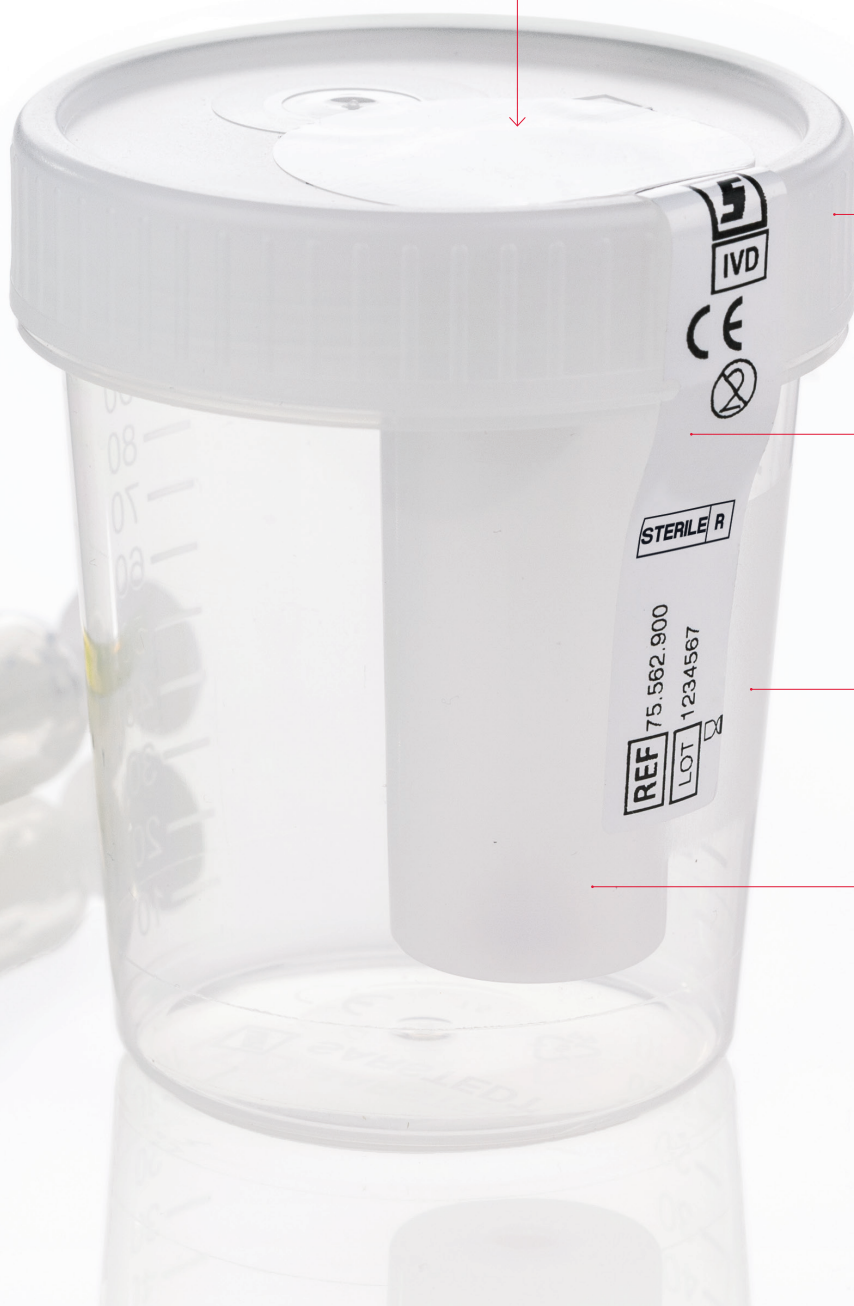

Nepriepustnosť kvapalín a zápachov
Skrutkovací uzáver s transferovou jednotkou

Zapečatené
Neporušená bezpečnostná etiketa zaisťuje vnútornú sterilitu pohára na moč NFT

Priehľadné
Vysoko priehľadná nádoba z pevného polypropylénu (PP) na dobré vizuálne posúdenie

Inovatívne
Bezihlová transferová jednotka s prepichnuteľnou membránou NFT

NFT

System na odber moču

To najlepšie spomedzi rôznych typov systémov

NFT systém so skúmavkou Urin Monovette®, pohárom na moč NFT a fľašou na zber moču NFT zabezpečuje hygienické pracovné podmienky počas celého procesu odberu vzorky:

- Pomocou skúmavky Urin Monovette® a priloženej nasávacej špičky môžete vzorku odobrať aj v prípade veľmi malého množstva bez použitia ihly. Samostatná transferová jednotka, podobne ako pri vákuových systémoch, nie je potrebná.
- Intuitívna manipulácia sa dá naučiť rýchlo a bez dlhého tréningu.
- Pri použití skúmavky Urin Monovette® je možné vďaka princípu aspirácie v prípade potreby zopakovať odber vzorky – nehrozí riziko straty funkcie v dôsledku nesprávnej aplikácie.
- Vďaka dômyselnej funkcii odberu vzorky bez použitia ihly sa minimalizuje riziko poranenia personálu a pacienta.
- Výrobky systému NFT sa po odbere vzorky nemusia likvidovať samostatne v nádobe odolnej proti prepichnutiu – šetrí to čas a peniaze v porovnaní s výrobkami s integrovanou ihlou.

Premyslené

Fľaša na zber moču NFT s objemom 3000 ml, s ergonomickou rukoväťou, veľkým priemerom otvoru a priezorom so stupnicou po 100 ml



Skúmavka Urin Monovette® – hygienická práca len s niekoľkými úkonmi

- Skúmavka Urin Monovette® umožňuje odber vzorky moču zo zbernej nádoby na moč alebo z drenážneho systému bez použitia ihly.
- Analýzu moču pomocou bežne dostupných testovacích prúžkov možno vykonať priamo v naplnenej skúmavke Urin Monovette®.
- Skúmavka Urin Monovette® je vhodná na prenos a odoslanie v súlade s nariadením o obaloch P650 ADR a IATA. Môže sa používať na získavanie sedimentu v centrifúge a v analyzátoroch.



Používateľsky prívetivá manipulácia: Pohár na moč NFT



Pohodlné používanie pri 24-hodinovom zbere moču: Zberná fľaša na moč NFT



Aj v prípade veľkoobjemovej zbernej fľaše na moč NFT prebieha odber vzorky čisto vďaka funkcii uzavretého odberu.



Pozrite si návod na jednoduchú manipuláciu s výrobkami NFT: sarstedt.com/nft-tu-sk

OBJEDNAJTE SI BEZPLATNÚ VZORKU VÝROBKU



sarstedt.com/nft-sa-sk



So systémom na odber moču NFT nastavuje SARSTEDT nové kritériá

Len čistý a správny odber vzoriek zaručuje správne výsledky analýzy. Výrobky systému NFT od SARSTEDT nastavujú kritériá pre rutinnú a spoľahlivú preanalytiku v kombinácii s najvyššou bezpečnosťou pre používateľa a pacienta.



Výrobky NFT sa nemusia likvidovať v nádobách na likvidáciu ostrých predmetov.

Preanalytical Workflow made by SARSTEDT

Využite synergiu našich
koordinovaných systémov.

Objavte 360°
riešenie pre vašu
preanalytiku od
spoločnosti
SARSTEDT



sarstedt.com/nft-wf-sk



Pohár na moč NFT 100 ml

Objednávacie číslo	Objem	D x Ø	Verzia	Čistota	Balenie (vnút. balenie/kartón)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	s bezpečnostným štítkom a transferovou jednotkou	sterilné	200 / 200

Fľaša na zber moču NFT 3,0 l

Objednávacie číslo	Objem	D x Š x V	Verzia	Čistota	Balenie (vnút. balenie/kartón)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	s transferovou jednotkou a priloženým štítkom na zápis údajov o pacientovi, priemer otvoru 80 mm	-	30 / 30

Skúmavka Urin Monovette® Z – bez preparácie

Objednávacie číslo	Objem	D x Ø	Verzia (žltá)	Čistota	Balenie (vnút. balenie/kartón)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Papierový štítok, popisovateľný	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Plastový štítok, priehľadný	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Papierový štítok, popisovateľný	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Plastový štítok, priehľadný, jednotlivo v blistri	sterilné	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Plastový štítok, priehľadný	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Papierový štítok, popisovateľný	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Plastový štítok, priehľadný, jednotlivo v blistri	sterilné	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Plastový štítok, priehľadný, s ochranou pred svetlom	-	64 / 512

Skúmavka Urin Monovette® s kyselinou boritou – so stabilizátorom pre mikrobiologické vyšetrenia

Objednávacie číslo	Objem	D x Ø	Verzia (zelená)	Čistota	Balenie (vnút. balenie/kartón)
10.256.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Papierový štítok, popisovateľný	-	64 / 512
10.256.021	3,2 ml	75 x 13 mm	Papierový štítok, popisovateľný, jednotlivo v blistri	sterilné	100 / 500
10.260.001*	8,5 ml	92 x 15 mm	Papierový štítok, popisovateľný	-	64 / 512
10.260.021*	8,5 ml	92 x 15 mm	Papierový štítok, popisovateľný, jednotlivo v blistri	sterilné	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Plastový štítok, priehľadný	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Papierový štítok, popisovateľný	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Plastový štítok, priehľadný, jednotlivo v blistri	sterilné	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Papierový štítok, popisovateľný, jednotlivo v blistri	sterilné	100 / 500

Ďalší spotrebný materiál na preanalytiku moču nájdete na stránke www.sarstedt.com

*Plánované nové uvedenie na trh 2. štvrťrok 2024

SARSTEDT spol. s r. o.

Pri smaltovni 4
851 01 Bratislava

Tel: +421 232 184 930

info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Ďalšie informácie,
videá a objednávky vzoriek:
sarstedt.com/nft-sk

V prípade otázok
Vám radi pomôžeme!

Navštívte našu webovú stránku: www.sarstedt.com