



NFT

İdrar Toplama Sistemi

İğnesiz, hijyenik, kapalı örnek alımı



NFT Needle Free Transfer

İdrar
Preeanalitik
2.0

SARSTEDT'in hijyenik kapalı ve iğnesiz numune alımı için ilk idrar toplama sistemi

Hijyenik. Pratik. Güvenli.

İdrar numunelerinin alımı nasıl daha güvenli, hijyenik ve daha kolay hale getirilebilir. Bu sorunun cevabını NFT sisteminin yenilikçi ürünleri vermektedir. SARSTEDT'in ilk kapalı ve iğnesiz idrar alım sistemi olarak yeni ürün ailesi mevcut ürünlerin avantajlarını bir çözümde birleştirir.


İdrar preanalitiği için Yeni Standartlar



- NFT İdrar Kabı ve 24 saatlik idrar toplama için 3 litrelik NFT İdrar Toplama Kabı olarak temin edilebilir
- Metalsiz ve iğnesiz alım sistemi
- Güvenli depolama ve güvenli taşıma
- İdrar Monovette® ile kolay ve hijyenik idrar taşıma
- NFT ürünlerinin bertarafı için kesici delici atık kabı gerekli değil

Çok pratik

İdrar Monovette®, hijyenik idrar alımını sağlar ve test stripleri ve analiz cihazları için de analiz haznesi ve ayrıca çökelti toplamaya yönelik santrifüj tüpü olarak da uygundur

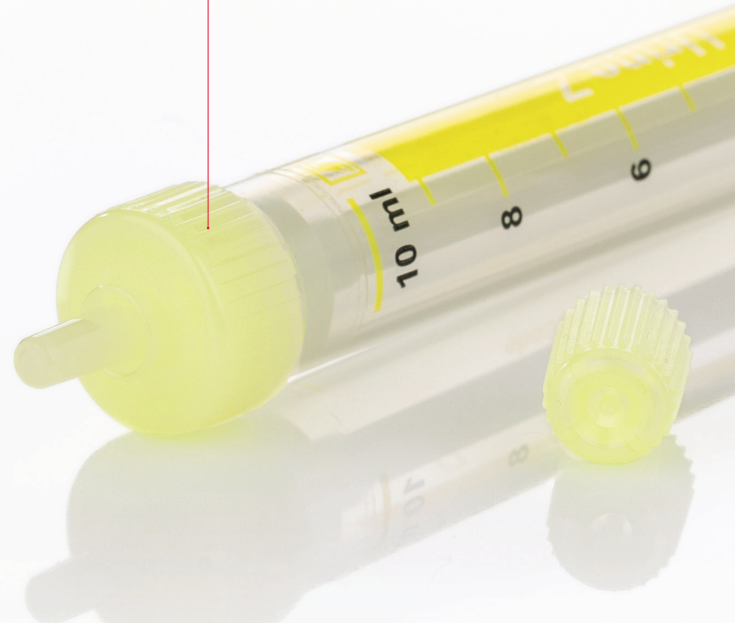


Yeni

Yeni iğnesiz alım fonksiyonunda artık iğne gerekli değildir. İdrar Monovette®, yeni NFT membranından kolayca geçer.


Rahat alım ve birden fazla alımdan sonra da erişim yine hemen sızdırmaz ve hijyenik olarak kapalıdır.

İğne yaralanmasından kaynaklanan enfeksiyon riski yoktur.

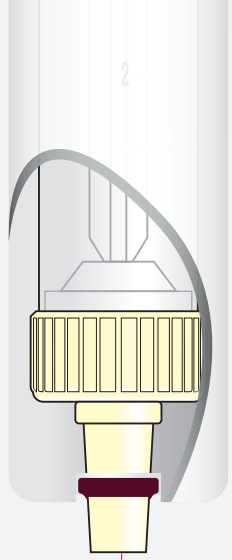

İKNA EDİCİ

- ✓ **Minimum yaralanma tehlikesi** ve iğnesiz numune alımı sayesinde personel ve hasta için **daha fazla uygulama güvenliği**
- ✓ NFT sisteminin bileşenlerinin ayrı şekilde delinmeye karşı korumalı olarak bertaraf edilmesi gerektiğinden **bertaraf edilirken tasarruf sağlar**

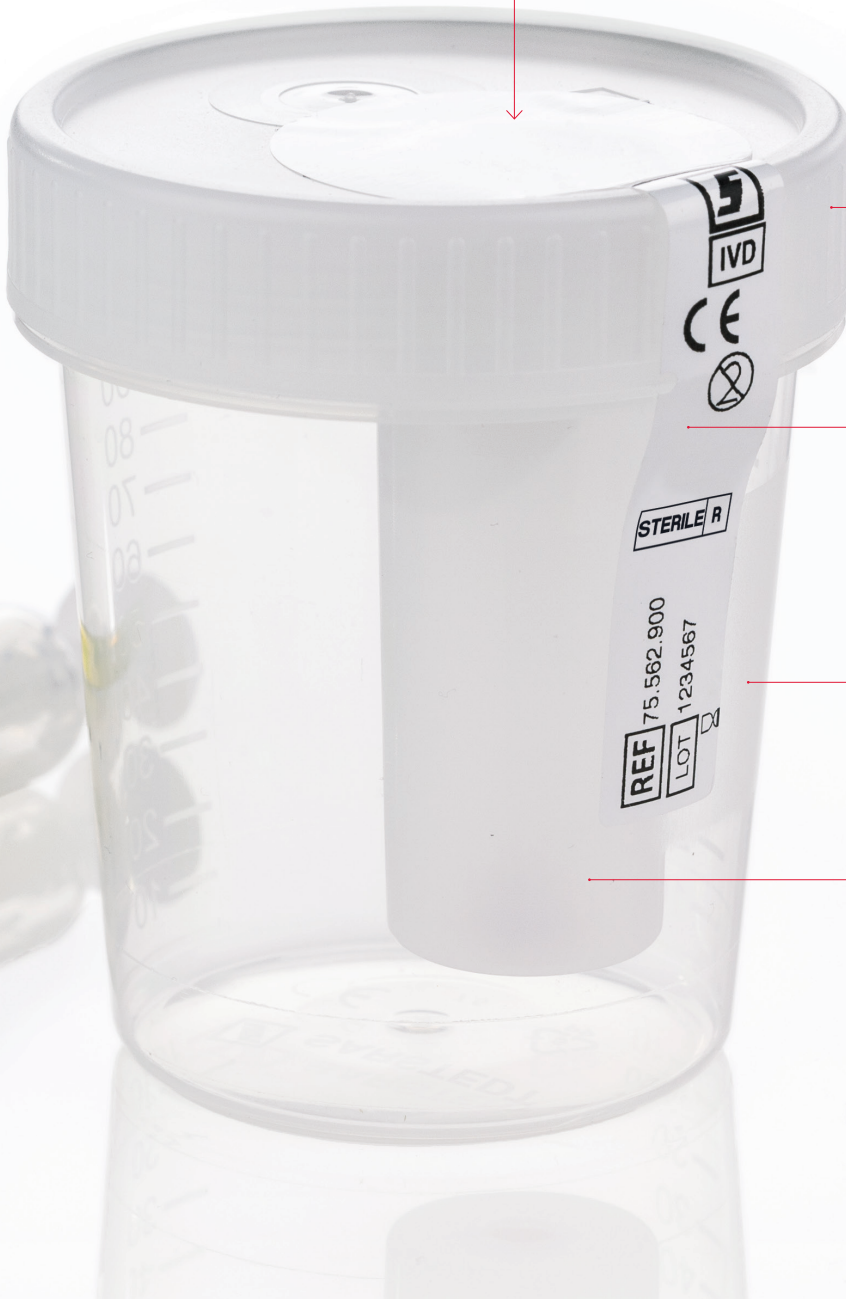

Sıvı ve koku geçirmez

Aktarma ünitesi vidalı kapak

Mühürlü

Emniyet etiketi hasarsızlık durumunda NFT idrar kabının iç sterilliğini belirtir

Her şey ortada

İyi görsel değerlendirme için sağlam polipropilenden (PP) yüksek şeffaflıkta hazne

Yenilikçi

Geçilebilen NFT membranlı iğnesiz aktarma ünitesi

NFT

İdrar Alma Sistemi

Çeşitli sistemlerden en iyisi

İdrar Monovette®'li, NFT idrar kaplı ve NFT idrar toplama kaplı NFT sistemi, tüm numune alma süreci sırasında hijyenik çalışma koşullarını sağlar:

- İdrar Monovette® ve beraberinde bulunan emme ucuyla alma işlemini çok düşük dolum miktarlarında da iğnesiz gerçekleştirebilirsiniz. Vakum sistemlerinde olduğu gibi ayrı bir aktarma ünitesi gerekli değildir.
- Yenilikçi kullanım hızlıca ve büyük bir eğitim gereksinimine gerek duyulmadan öğrenilebilir.
- İdrar Monovette® ile aspirasyon prensibiyle alma işlemi gerektiğinde tekrarlanabilir – hatalı uygulama nedeniyle bir fonksiyon kaybı tehlikesi söz konusu değildir.
- İyi düşünülmüş, iğnesiz alma fonksiyonu sayesinde personel ve hasta için yaralanma riski en aza indirilir.
- Alım sonrasında NFT sisteminin ürünlerinin delinmeye karşı korumalı şekilde bertaraf edilmesine gerek yoktur – bu entegre iğneli ürünlerle karşılaştırıldığında zaman ve para tasarrufu sağlar.

İyi düşünülmüş

3.000 ml kapasiteli, ergonomik tutuculu, büyük açılma çaplı ve 100 ml'lik adımlardaki derecelere sahip şeffaf gözetleme camlı NFT idrar toplama kabı



İdrar Monovette® – birkaç adımda hijyenik çalışma

- İdrar Monovette®, idrar toplama kaplarından veya idrar drenaj sistemlerinden hijyenik ve iğnesiz numune alımını sağlar.
- Bilinen test stripleriyle yapılan idrar analizi doğrudan doldurulmuş İdrar Monovette® ile gerçekleştirilebilir.
- İdrar Monovette® ADR ve IATA'nın P650 ambalajlama talimatı doğrultusundaki taşıma ve gönderim için uygundur. Çökelti alımı için santrifüje ve analiz cihazlarına yerleştirilebilir.



Kullanımı kolay: NFT idrar kabı



24 saatlik idrar toplamada konforlu: NFT idrar toplama kabı



Büyük hacimli NFT idrar toplama kabında da numune alma işlemi, kapalı alma fonksiyonu sayesinde temiz şekilde gerçekleşir.



NFT ürünlerinin kolay kullanımıyla ilgili eğitime göz atın:
sarstedt.com/nft-tu-tr

ÜCRETSİZ BİR ÜRÜN NUMUNESİ SİPARİŞ EDİN



sarstedt.com/nft-sa-tr



NFT idrar alma sistemiyle SARSTEDT yeni standartlar ortaya koyuyor

Numunelerin sadece temiz ve doğru toplanması doğru analiz sonuçları verir. SARSTEDT'in NFT sisteminin ürünleri rutine uygun ve bilinçli preanalitik için kullanıcı ve hasta için yüksek güvenli yeni standartlar belirliyor.



NFT ürünlerinin ayrı şekilde kesici delici atık olarak bertaraf edilmesine gerek yoktur.

Preanalitiş İş Akışı SARSTEDT tarafından

Senkronize sistemlerimizin oluşturduğu sinerji ile avantaj sağlayın

SARSTEDT ile preanalitik süreçleriniz için 360° çözümleri keşfedin



sarstedt.com/nft-wf-tr



SARSTEDT

NFT idrar kabı 100 ml

Sipariş No.	Hacmi	U x Çap	Model	Safılık	Ambalajlama (IK/UK)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	emniyet etiketli ve aktarma ünitesi	steril	200 / 200

NFT idrar toplama kabı 3,0 l

Sipariş No.	Hacmi	U x G x Y	Model	Safılık	Ambalajlama (IK/UK)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	aktarma ünitesi ve hasta etiketi beraberinde, açılma çapı 80 mm	-	30 / 30

İdrar Monovette® Z - Katkısız/Düz tüp

Sipariş No.	Hacmi	U x Çap	Model (sarı)	Safılık	Ambalajlama (IK/UK)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Plastik etiket, şeffaf	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Plastik etiket, şeffaf, tekli blister ambalajda	steril	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Plastik etiket, şeffaf	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Plastik etiket, şeffaf, tekli blister ambalajda	steril	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Plastik etiket, şeffaf, ışık korumalı	-	64 / 512

İdrar Monovette® Borik Asit - mikrobiyolojik incelemeler için stabilizatörlü

Sipariş No.	Hacmi	U x Çap	Model (yeşil)	Safılık	Ambalajlama (IK/UK)
10.256.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir	-	64 / 512
10.256.021	3,2 ml	75 x 13 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir, tekli blister ambalajda	steril	100 / 500
10.260.001*	8,5 ml	92 x 15 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir	-	64 / 512
10.260.021*	8,5 ml	92 x 15 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir, tekli blister ambalajda	steril	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Plastik etiket, şeffaf	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Plastik etiket, şeffaf, tekli blister ambalajda	steril	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Kağıt etiket, üzerine yazılabilir, tekli blister ambalajda	steril	100 / 500

İdrar preanalitikle ilgili diğer sarf malzemelerini www.sarstedt.com adresinde bulabilirsiniz

*Pazara planlanan yeni sunum 2024 yılının 2. çeyreği

SARSTEDT International GmbH
MERKEZİ ALMANYA İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ
Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158
Üsküdar – İstanbul

Tel.: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64

info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Diğer bilgiler, videolar
ve numune siparişi:
sarstedt.com/nft-tr

Sorularınızın olması durumunda:
Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

Web sitemizi de ziyaret edin: www.sarstedt.com