

SAHARA-III

Сухой подогрев компонентов крови



Безопасный способ подогрева

- Исключаются риски контаминации патогенными микроорганизмами из влажной среды, как в традиционных водяных банях
- Активное подсушивание поверхности ёмкости с кровью обеспечивает гигиеничность в непосредственной близости от компонентов крови
- Температура разогревающей платформы и циркулирующего воздуха регулируется так, чтобы достигалось равнозначное качество препаратов крови по сравнению с водяными банями
- Стандартизированный процесс размораживания и подогрева
- Задержка реакции на нажатие клавиш предотвращает случайное прерывание процесса подогрева

- Предварительное выставление времени подогрева и температуры окружающей среды не требуется

Мониторинг температуры

- Бесконтактное определение температуры компонентов крови посредством инфракрасного датчика
- Быстрая доступность компонентов крови за счёт распознавания оттаивания
- Индикация температуры компонентов крови в диапазоне от 29°C до 37°C с шагом 1°C
- Возможно документирование с помощью принтера протоколов



Модуль принтера протоколов

- Документирование изменения температуры компонентов крови
- Документирование теста системы
- Документирование сообщений об ошибках в случае сбоя

Модульное строение

- Быстрый переход с базовой модели на MAXITHERM и наоборот
- Возможность добавления функций, например, подогрев инфузионных растворов


Модуль разогревающей платформы

- Быстрое оттаивание или разогрев компонентов крови за счёт дополнительного контактного тепла



Модуль MAXITHERM

- Расширяет ёмкость SAHARA-III до 6 консервированных компонентов

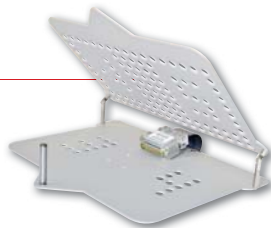


Модуль подогрева инфузионных растворов

- Подогрев до 37°C для
- инфузионных растворов
 - туб
 - инструментов
 - контрастных веществ и др.



Сборная чашка из нержавеющей стали

- Позволяет улавливать вытекающую плазму из повреждённых пакетов
- Облегчает очистку SAHARA-III

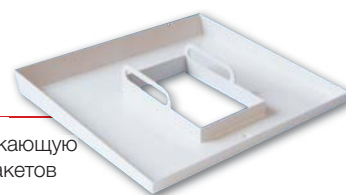

Перемешивание компонентов

- Бережное перемешивание в целях достижения равномерного распределения температуры компонентов крови и исключения механических изменений

Функция быстрого подогрева

- Быстрое оттаивание и разогрев компонентов крови

Функция 37°C

- Подогрев при постоянной температуре окружающей среды от 37°C
- Одновременный подогрев различных компонентов крови
- Одновременный подогрев компонентов различного объёма

Встроенный тест системы

- Проверка функций прибора
- Калибровка датчиков температуры
- Использование дополнительных измерительных приборов не требуется
- Возможно документирование с помощью принтера протоколов



Каковы источники микробиологического загрязнения компонентов крови экзогенными возбудителями?

Экзогенные бактерии могут заноситься с кожи донора крови, из воды, воздуха или другого окружения, с поверхностей или с рук медперсонала. Они могут переноситься во время взятия крови, а также обработки и хранения компонентов крови.

Особенно при обработке и хранении компонентов крови от механического воздействия могут возникать небольшие трещины в пакетах (особенно в замороженном состоянии), через которые микроорганизмы впоследствии могут проникнуть в консервированный компонент крови. При разогреве крови и её компонентов также может произойти контаминация препаратов (см. иллюстрацию), конечно в том случае, если

- контаминировано непосредственное окружение компонента (напр., подогревающая среда) или
- наружная поверхность пакета заселена микроорганизмами.

Так, при оттаивании ранее не контаминированных СЗП и криопреципитатов при помощи водяных бань наблюдались различные случаи переноса pseudomonas species.^{4,5}

- Montag T. et al. **Bakterielle Kontamination von Blutkomponenten**, Bundesgesundheitsbl. - Gesundheitsforsch. - Gesundheitsschutz 42, 132-142, 1999
- Sazama K. **Bacteria in Blood for Transfusion**, Arch. Pathol. Lab. Med., 118, 350-365, 1994
- Puckett A. **Bacterial contamination of blood for transfusion: a study of the growth characteristics of four implicated organisms** Med. Lab. Sci. 43, 252-257, 1986
- Centers for Disease Control **Follow-up on nosocomial Pseudomonas cepa cia infection**, MMWR Morb. Mortal Wkly Rep., 28, 409, 1979
- Casewell M. W. et al. **Operating theatre water-baths as a cause of Pseudomonas septicaemia**, J. Hosp. Infect., 2, 237-240, 1981Centers for Disease Control Follow-up on nosocomial Pseudomonas cepacia infection, MMWR Morb. Mortal Wkly Rep., 28, 409, 1979

Дополнительные затраты

Фирма TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. KG гарантирует, что использование систем сухого подогрева "базовая модель SAHARA-III" и "SAHARA-III MAXITHERM" не связано с дополнительными затратами вследствие применения одноразовых изделий и расходных материалов.

Техобслуживание

Фирма TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. KG гарантирует, что применение систем сухого подогрева "базовая модель SAHARA-III" и "SAHARA-III MAXITHERM" не связано с дополнительными затратами вследствие использования одноразовых изделий и расходных материалов.

Проверка функций прибора, в т.ч. калибровка датчиков температуры, может проводиться пользователем путём активации встроенного теста системы самостоятельно и без использования дополнительных измерительных устройств.

Информация для заказа

Кат. №	Наименование артикула
97.8710.500	SAHARA-III базовая модель
97.8710.502	SAHARA-III базовая модель 115V
97.8710.800	SAHARA-III MAXITHERM
97.8710.802	SAHARA-III MAXITHERM 115V

Принадлежности

Кат. №	Наименование артикула
97.8710.501	Сборная чашка из нержавеющей стали
97.8710.550	Модуль подогрева инфузионных растворов для SAHARA-III
97.8710.570	Модуль принтера протоколов для SAHARA
79.8710.575	Рулон бумаги для принтера протоколов
79.8710.577	Красящая лента для принтера протоколов SP742MD
97.8710.580	Модуль MAXITHERM для базовой модели SAHARA-III
97.8710.590	Модуль разогревающей платформы для SAHARA-III MAXITHERM

Технические характеристики

Наружные размеры:	Ш x B x Г: 320 мм x 325 мм x 493 мм	
Масса:	SAHARA-III базовая модель:	13,7 кг
	SAHARA-III базовая модель 115V:	13,7 кг
	SAHARA-III MAXITHERM:	13,4 кг
	SAHARA-III MAXITHERM 115V:	13,4 кг
Номинальное напряжение (±10%):	SAHARA-III базовая модель:	230VAC
	SAHARA-III базовая модель 115V:	115VAC
	SAHARA-III MAXITHERM:	230VAC
	SAHARA-III MAXITHERM 115V:	115VAC
Макс. потребляемая мощность:	655 Вт	

Сбыт:

SARSTEDT AG & Co. KG
 P.O. Box 12 20
 D-51582 Nümbrecht
 Phone +49 2293 305 - 0
 Fax +49 2293 305 - 3992
 export@sarstedt.com
 www.sarstedt.com