

Roller do drenów AST-2



Automatyczne i szybkie rolowanie
drenów worków na krew

- Wydajny roller do drenów z silnikiem o dużej mocy
- Zasilany bateryjnie lub z sieci
- Opcjonalna funkcja automatycznego zatrzymania
- Urządzenie nastołowe z funkcją automatycznego zatrzymania ze sterowaniem nożnym

Rollery do drenów AST-2

Model podstawowy AST-2

Roller do łatwego i niemęczącego rolowania drenów worków na krew




AST-2S z funkcją auto-stop

Posiada te same funkcje co roller podstawowy (AST-2), doposażonym w funkcję auto-stop. Zatrzymuje pracę silnika przy worku na krew



Urządzenie nastołowe AST-2F

Urządzenie posiada te same funkcjonalności co model podstawowy (AST-2). Doposażony jest w funkcje auto-stop, zatrzymującą pracę silnika przy worku z krwią oraz przycisk nożny do sterowania pracą silnika. Pozwala na obsługę worka i drenu za pomocą obu rąk

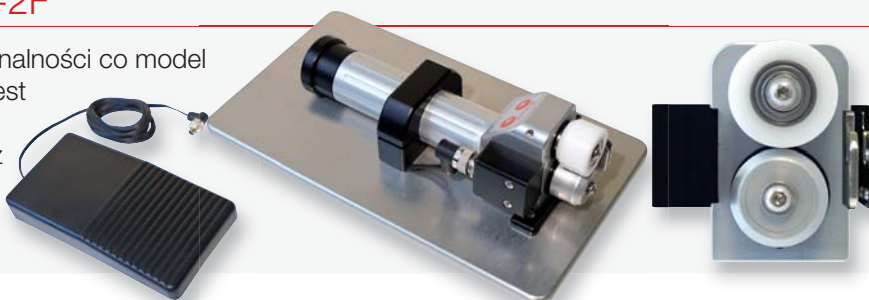

Dane techniczne

Model	AST-2	AST-2S	AST-2F
Nr katalogowy	87.7709.029	87.7709.025	87.7709.035
Prawo- lub leworęczny	✓	podać podczas zamówienia	-
Zabezpieczenie przeciążeniowe	✓	✓	✓
Ruch do przodu i do tyłu	✓	✓	✓
Funkcja zatrzymania	-	✓	✓
Przełącznik nożny	-	-	✓
Zasilanie sieciowe	✓	✓	✓
Zasilanie bateryjne	✓	✓	✓
Ciężar	690 g	690 g	1 480 g
Silnik dużej mocy	9V 20 W	9V 20 W	9 V 20 W
Wymiary urządzenia z zasilaczem (dł. x szer. x wys. w mm)	225x39x62	225x47x62	250x140x71
Walizka transportowa	✓	✓	-
Opcjonalne wyposażenie dodatkowe		AST-2, AST-2S, AST-2F	
Zasilacz uniwersalny WEJŚCIE: 100 V - 240 V AC +/- 10%, 50-60 Hz, 700 mA WYJŚCIE: 7,5 V DC 3,3 A		87.7709.033	
i/lub akumulatory NiMh 7,2 V 700mA		87.7709.031	
Ładowarka uniwersalna PRI: 100 V - 240 V AC, 50-60 Hz 17 VA SEC: 4,8 V - 12 V DC max. 800 mA 9,6 VA		87.7709.032	

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22 722 05 43
Fax: +48 22 722 07 95
info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com