

Lanceta de seguridad y lanceta de incisión

Punción fácil, segura y confortable para el paciente



Preanalítica



Lanceta de seguridad



1. Seguridad para usuario y paciente

- La aguja y la cuchilla permanecen dentro de la carcasa de la lanceta antes y después del uso.

2. Fácil de utilizar

- Botón de disparo seguro, sin riesgo de disparo accidental.

3. Confort para el paciente

- Menor sensación de dolor
- Profundidades de punción predefinidas: resultados óptimos garantizados en niños y adultos

Información

Descripción	Calibre de la aguja	Profundidad de punción	Referencia
Mini	28 G	1,6 mm	85.1015
Normal	21 G	1,8 mm	85.1016
Extra	18 G	1,8 mm	85.1017
Super	Cuchilla de 1,5 mm	1,6 mm	85.1018
Neonatal	Cuchilla de 1,5 mm	1,2 mm	85.1019






Lanceta de incisión Safety-Heel®

Obtención de la cantidad máxima de sangre con una profundidad de punción mínima

Las metabolopatías congénitas y endocrinopatías se deben detectar de forma temprana para poder iniciar un tratamiento adecuado y eficaz. Para ello, se debe extraer sangre mediante un "screening neonatal" (en general, por punción en el talón). Debido a que con las lancetas convencionales la punción se realiza por medio de un pinchazo vertical, el riesgo de lesión (penetración hasta el hueso) y de formación de hematomas es muy alto.


El procedimiento resulta muchas veces doloroso. Con la lanceta de incisión Safety-Heel® dispone en estos casos de una opción óptima para reducir la sensación de dolor y optimizar al mismo tiempo la obtención de sangre.

La trayectoria de incisión semicircular y la reducida profundidad de punción previene la formación de hematomas. Este procedimiento permite una extracción de sangre mucho más cuidadosa, especialmente en los pacientes de corta edad.

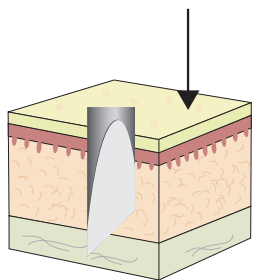

Lanceta estándar

- Dirección vertical de disparo de la cuchilla
- Punción cilíndrica
- Formación de hematoma

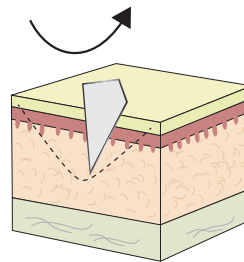

Lanceta de incisión

- Incisión con forma de semicírculo
- Menor profundidad de punción
- Se evita la formación de hematomas

Innovadora lanceta de alta velocidad con técnica de corte semicircular

- Flujo óptimo de sangre sin necesidad de masajear
- Volumen de sangre suficiente
- Sensación de dolor notablemente reducida
- Cicatrización rápida, gracias a la baja profundidad de punción, se minimiza la formación de hematomas

Información

Descripción		Longitud de corte	Profundidad de la punción	Referencia
Prematuros	■	1,75 mm	0,85 mm	85.1025
Neonatos	■	2,5 mm	1,0 mm	85.1026



Si tiene alguna duda, estaremos encantados de atenderle.

Visite también nuestro sitio web:
www.sarstedt.com

Preanalytical Workflow made by SARSTEDT

Aproveche la sinergia de nuestros sistemas coordinados.



SARSTEDT S.A.U.

Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès

Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78

info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Descubra las
soluciones 360°
para su preanalítica
con SARSTEDT



workflow.sarstedt.com