

Lanceta de segurança e lanceta de incisão

Para uma punção segura, confortável e delicada



Pré-analítico



Lancetas de Segurança



1. Segurança para o usuário e o paciente

- A agulha e lâmina estão ocultas com segurança no corpo da lanceta, antes e depois da utilização

2. Manuseio simples

- O botão de disparo protegido evita a ativação e desativação acidental

3. Conforto para o paciente

- Para reduzir o desconforto do paciente, as lâminas siliconizadas ultra-afiadas e as pontas das agulhas triplamente afiadas minimizam a dor.
- A profundidade controlada de penetração elimina o risco de lesão óssea

Informações para pedidos

Descrição	Tipo e tamanho	Profundidade de penetração	N.º de pedido
Mini	28 G	1,6 mm	85.1015
Normal	21 G	1,8 mm	85.1016
Extra	18 G	1,8 mm	85.1017
Super	Lâmina 1,5 mm,	1,6 mm	85.1018
Neonatal	Lâmina 1,5 mm,	1,2 mm	85.1019






Lanceta de incisão Safety-Heel®


Coleta de sangue máxima com profundidade mínima de punção

Doenças metabólicas e distúrbios endócrinos congênitos devem ser detectados precocemente, a fim de introduzir um tratamento adequado e eficaz. Para isso, o sangue deve ser coletado através de uma “triagem neonatal” (na maioria das vezes, através de punção do calcanhar). Como a punção com lancetas comuns é realizada por uma picada vertical, o risco de ferimentos (perfuração até o osso) e de formação de hematomas é muito alto. Muitas vezes, este é um processo doloroso. A lanceta de incisão Safety-Heel® oferece uma possibilidade ideal de minimizar esta sensação de dor e, ao mesmo tempo, otimizar a coleta de sangue. O corte em semicírculo e a pouca profundidade da punção neutralizam a formação de hematomas. Este procedimento permite uma coleta muito mais suave nos pequenos pacientes.

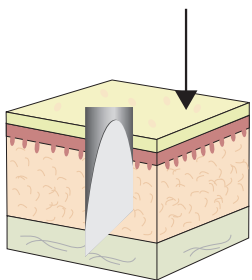

Lanceta padrão

- Sentido vertical de disparo da agulha
- Corte cilíndrico
- Formação de hematoma

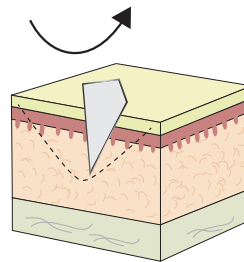

Lanceta de incisão

- Corte em semicírculo
- Menor profundidade de penetração
- Minimiza a formação de hematomas

Lanceta inovadora de alta velocidade com tecnologia de corte suave em semicírculo

- Excelente fluxo de sangue sem esfregamento ou massageamento adicional
- Volume de sangue suficiente
- Sensação de dor significativamente reduzida
- Cura rápida graças à pouca profundidade da punção, minimiza a formação de hematomas

Informações para pedidos

Área de utilização	Comprimento de corte	Profundidade de penetração	N.º de pedido
Prematuros	1,75 mm	0,85 mm	85.1025
Recém-nascidos	2,5 mm	1,0 mm	85.1026



Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!

Visite o nosso site:
www.sarstedt.com

Fluxo de trabalho pré-analítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia de sistemas
coordenados.



SARSTEDT Ltda.

Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Descubra as
soluções 360° para
a sua pré-análise
da SARSTEDT



workflow.sarstedt.com