

Micro-Agulha


Características ideais de fluxo e manuseamento




Micro-Agulha

- Desperdício de sangue mínimo sem perda de volumes residuais no adaptador
- Pega estriada para controlo ideal da agulha
- Possibilidade de rotação a 360° para veias frágeis
- Fluxo de sangue ideal devido à excepcional qualidade da agulha e saída sem obstrução



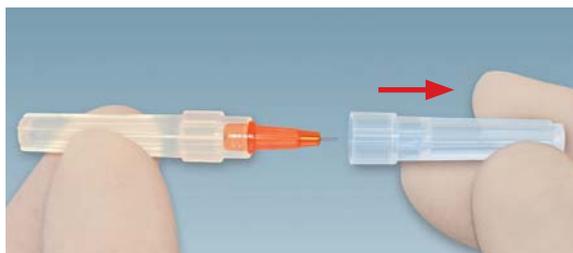

1 Remover a tampa.

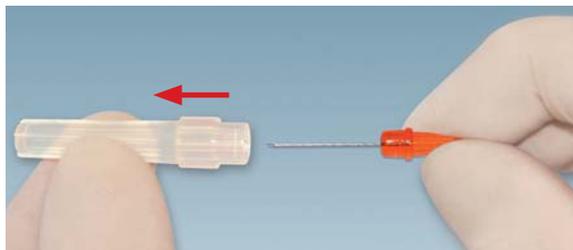

2 Remover a Micro-Agulha da proteção.



3 Efectuar a punção venosa e permitir que o sangue flua para um microtubo adequado.



4 Descartar a Micro-Agulha num contentor de cortantes apropriado.

Informação de Encomenda

Referência	Descrição	Ø/comprimento	Embalagem
85.921	Micro-Agulha 21G x 3/4", verde	0.8 mm / 36 mm	50/caixa interna, 500/caixa externa
85.923	Micro-Agulha 23G x 3/4", azul	0.6 mm / 36 mm	50/caixa interna, 500/caixa externa
85.925	Micro-Agulha 25G x 3/4", laranja	0.5 mm / 36 mm	50/caixa interna, 500/caixa externa

SARSTEDT S.A.
Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com