

SAHARA 4

Suche rozmrażanie produktów krwiopochodnych

NOWOŚĆ!



Nowa generacja – innowacyjne i bezpieczne regulowanie temperatury

- Szybka dostępność produktów krwiopochodnych dzięki automatycznemu wykrywaniu i wygodnej zmianie stanu skupienia podczas trwającego procesu regulacji temperatury
- Temperatury poszczególnych produktów krwiopochodnych monitorowane są oddzielnie
- Nie ma ryzyka zanieczyszczenia mokrymi patogennymi drobnoustrojami jak ma to miejsce w przypadku procesów na bazie wody
- Aktywne suszenie powierzchni rozmrażanego materiału umożliwia zapewnienie higienicznych warunków w bezpośrednim otoczeniu produktu krwiopochodnego
- Opcjonalne zarządzanie wykorzystywanymi danymi
- Intuicyjna obsługa na 7-calowym, kolorowym wyświetlaczu dotykowym

Płyta grzewcza

- 4 oddzielne strefy grzewcze
- Mieszanie materiału rozmrażanego za pomocą innowacyjnego mechanizmu przechylającego i obracającego

Czujnik podczerwieni

- Indywidualna rejestracja temperatury dla każdego z rozmrażanych produktów

Klapka obudowy

- Kontrola wzrokowa produktów krwiopochodnych możliwa jest dzięki przezroczystej klapce obudowy oraz oświetleniu wewnętrznemu

Obsługa i czyszczenie

- Brak konieczności wstępnego ustawiania czasów regulacji temperatury
- Intuicyjna obsługa na kolorowym wyświetlaczu dotykowym
- Urządzenie można łatwo wyczyścić dzięki wymowanej płycie grzewczej i tacce ociekowej

Zintegrowana funkcja testowa

- Sprawdzanie funkcji urządzenia
- Brak konieczności stosowania dodatkowego sprzętu pomiarowego
- Możliwość protokolowania za pomocą pamięci USB

Monitorowanie temperatury

- Osobne monitorowanie temperatury i komunikat „Gotowe do wyjęcia” podczas rozmrażania produktu
- Automatyczne wykrywanie i wygodna zmiana stanu skupienia podczas trwającego procesu kontroli temperatury
- Regulacja temperatury w stałej, wstępnie ustawionej temperaturze otoczenia (w zakresie od 37°C do 42°C)
- Alarm przekroczenia temperatury
- Przypomnienie o konieczności wyjęcia dla każdego produktu krwiopochodnego

7-calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy


- Intuicyjna i szybka obsługa
- Opóźniona reakcja przycisku zapobiegająca niezamierzonemu zakończeniu procesu regulacji temperatury

Zarządzanie danymi

- Stosowanie opcjonalne
- Wczytywanie danych rejestracyjnych za pomocą skanera kodów kreskowych
- Dokumentacja profilu temperaturowego dla poszczególnych materiałów konserwowanych
- Transfer danych przez pamięć USB
- Wyświetlanie stanu rejestru danych

Menu opcji

- Wybór różnych języków systemu
- Regulacja temperatury docelowej
- Regulacja głośności wskazówek i alarmów
- Aktywacja zarządzania danymi

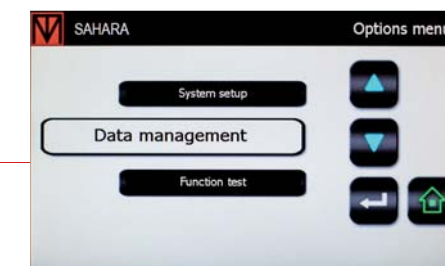

SAHARA 4

Szczegóły zamówienia

Numer zamówienia	Oznaczenie artykułu	Jedn. opak.
97.8720.500	SAHARA 4	1

Akcesoria

Numer zamówienia	Oznaczenie artykułu	Jedn. opak.
97.8720.440	Skaner TOUCH 65 PRO USB	1

Dane techniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.):	574x348x554 mm
Masa:	27,3 kg
Napięcie znamionowe:	100 – 240 V AC
Częstotliwość zasilania:	50/60 Hz
Maks. pobór mocy:	1000 W

Dystrybucja:

SARSTEDT AG & Co. KG
P.O. Box 12 20
D-51582 Nümbrecht
Phone: +49 2293 305 0
Fax: +49 2293 305 3992
export@sarstedt.com
www.sarstedt.com

