

# Sisteme de recoltare a sângelui pentru pediatrie



Pre-analytics

# Pediatrie

Copiii – cel mai sensibil grup de pacienți – necesită un sistem special și delicat de recoltare a sângelui

## Pacienții noștri (cei mai) mici

Niciun alt grup de persoane nu impune cerințe comparabile unui sistem de recoltare a sângelui.

Din acest motiv, ne-am specializat exact în aceste nevoi și am dezvoltat sisteme optime de recoltare a sângelui care permit recoltarea delicată și nedureroasă de la pacienții mici și cei mai mici. Am pus un accent deosebit pe minimizarea absolută a volumului de umplere respectiv, pentru a menține pierderea de sânge pentru diagnostic cât mai scăzută posibil. În funcție de vârstă, greutate și volumul de sânge, puteți alege dintr-un portofoliu extins de produse pentru recoltarea sângelui venos și capilar.



Nou-născuți



Copii mici



Elevi



Găsiți S-Monovette®  
potrivit pentru  
aplicația dvs.:

[sarstedt.com/  
s-monovette-de](https://sarstedt.com/s-monovette-de)

Avem soluția pentru diferitele cerințe ale grupurilor de vârstă respective







# Neonatologie – Nou-născuți

Volum minim al probelor pentru cei mai mici pacienți

## Microcanulă și microtuburi pentru probe

Microcanula a fost proiectată pentru nevoile speciale ale neonatologiei și are un mâner cu nervuri care asigură o puncție optimă și sigură. Aceasta este disponibilă în trei diametre diferite. Designul scurt al canulei minimizează volumul mort în timpul recoltării probelor. În plus față de puncția sigură, mânerul microcanulei oferă și opțiunea de a roti canula în venă. Acest lucru facilitează eliminarea oricărui

blocaj al orificiului canulei. Microtuburile pentru probe cu capace filetate sau dopuri și tuburile Microvette pentru cele mai mici cantități de probe sunt disponibile cu diverse substanțe preparate. Volumul nominal variază de la 100  $\mu$ l la un maximum de 1,3 ml, în funcție de tipul de tub și de substanța preparată.

## Safety-Heel®

Bolile metabolice congenitale și endocrinopatiile trebuie să fie recunoscute într-un stadiu incipient pentru a iniția un tratament adecvat și eficient. În acest scop, sângele este prelevat prin intermediul unui „screening pentru nou-născuți” (de obicei prin puncție în călcâi). În timp ce în cazul lansetelor convenționale puncția se realizează printr-o puncție verticală, riscul de lezare (puncția mai multor straturi de piele până la os) și formarea de hematoame sunt foarte ridicate.

Deoarece aceasta este adesea o procedură dureroasă, lanseta de incizie Safety-Heel® este modalitatea ideală de a reduce senzația de durere și de a optimiza recoltarea sângelui. Cu Safety-Heel®, formarea hematoamelor este contracarată printr-o incizie semicirculară și o adâncime mică a puncției, asigurând astfel o examinare mult mai confortabilă a micului dumneavoastră pacient.



Microcanulă, microtuburi pentru probe & Safety-Heel®

## Utilizare ușoară



Mânerul canelat al microcanulei permite o puncție ușoară și sigură. Pentru picurare, este disponibil un microtub pentru probe adecvat.

Safety-Heel®. Prelevare delicată a sângelui cu lanseta din călcâi...



# Bebeluș – Copil mic

Colectarea de sânge capilar pentru copii mici

## Lansetă de Safety și Microvette®

În funcție de cerințe, tubul Microvette® este disponibil cu o formă cilindrică sau conică a tubului interior și cu un volum cuprins între 100 și 500  $\mu$ l. Există opțiunea de recoltare de sânge capilar utilizând un așa-numit capilar End-to-End sau de recoltare cu marginea de recoltare. În plus, tuburile

Versiunile diferite ale lansetei de Safety îi permit utilizatorului să adapteze în mod ideal adâncimea de puncție și volumul de sânge necesare la condițiile anatomice ale micului pacient.





Microvette®, Microvette® APT și lansetă de Safety

## Diferite opțiuni de puncție cu lanseta de Safety



## Microvette® – Mai multă flexibilitate datorită a două tehnici de recoltare



Microvette® 100/200 –  
Recoltarea sângelui cu capilar End-to-End

Microvette® 300/500 –  
Recoltarea sângelui cu marginea  
de recoltare



# Copil mic – Școlar

Recoltare de sânge venos cu cel mai mic volum al probelor

## Canulă Safety-Multifly® și S-Monovette®

Sensibilitatea sistemelor moderne de analiză permite reducerea volumului necesar al probelor, chiar și pentru analize de rutină extinse. Datorită designului său special cu dimensiuni reduse și volum nominal redus, S-Monovette® pentru pediatrie îndeplinește în mod ideal aceste cerințe


ridicate. S-Monovette® pentru pediatrie este o soluție optimă pentru condițiile venoase dificile din pediatrie, datorită posibilității de prelevare delicată a sângelui cu ajutorul tehnologiei de aspirație.





Canulă Safety-Multifly® și S-Monovette®

**Siguranță optimă și confort pentru pacient și utilizator**

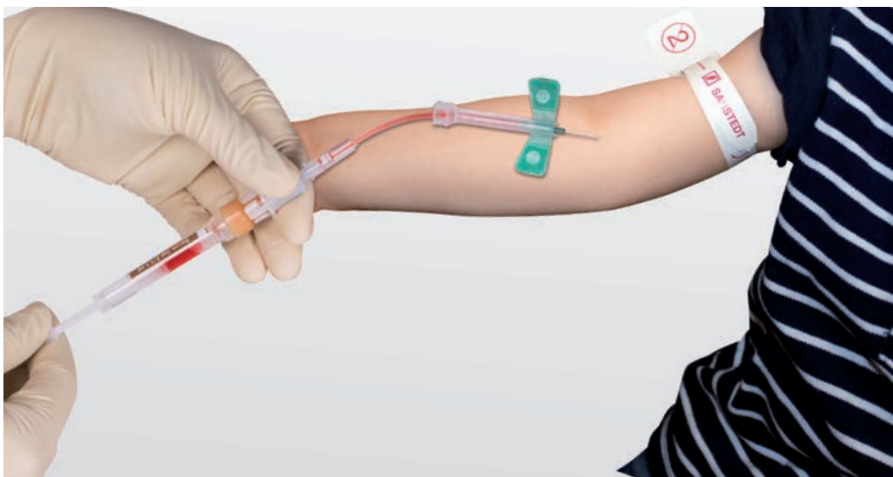

## S-Monovette®

### Ser-gel CAT

| Substanțe preparate                                                               | Volum nominal | Lungime fără/<br>cu blocare x Ø | Culoarea<br>capacului | Ambalaj<br>(UV/IK/UK) | Nr. de comandă<br>cu etichetă<br>transparentă | Nr. de comandă<br>cu etichetă de hârtie<br>colorată | Nr. de comandă<br>cu etichetă cu cod de<br>bare preimprimat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 1,1 ml        | 66/82 x 8 mm                    | ■                     | 50/50/500             |                                               | 06.1667.001                                         |                                                             |

### Ser CAT

| Substanțe preparate                                                               | Volum nominal | Lungime fără/<br>cu blocare x Ø | Culoarea<br>capacului | Ambalaj<br>(UV/IK/UK) | Nr. de comandă<br>cu etichetă<br>transparentă | Nr. de comandă<br>cu etichetă de hârtie<br>colorată | Nr. de comandă<br>cu etichetă cu cod de<br>bare preimprimat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 1,2 ml        | 66/82 x 8 mm                    | □                     | 50/50/500             |                                               | 06.1663.001                                         |                                                             |
|                                                                                   | 1,6 ml        | 75/91 x 13 mm                   | □                     | 50/50/500             | 04.2911                                       | 04.2911.001                                         |                                                             |

### Heparină cu litu și gel LH

| Substanțe preparate                                                               | Volum nominal | Lungime fără/<br>cu blocare x Ø | Culoarea<br>capacului | Ambalaj<br>(UV/IK/UK) | Nr. de comandă<br>cu etichetă<br>transparentă | Nr. de comandă<br>cu etichetă de hârtie<br>colorată | Nr. de comandă<br>cu etichetă cu cod de<br>bare preimprimat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 1,1 ml        | 66/82 x 8 mm                    | ■                     | 50/50/500             |                                               | 06.1669.001                                         |                                                             |

### Heparină cu litu LH

| Substanțe preparate                                                               | Volum nominal | Lungime fără/<br>cu blocare x Ø | Culoarea<br>capacului | Ambalaj<br>(UV/IK/UK) | Nr. de comandă<br>cu etichetă<br>transparentă | Nr. de comandă<br>cu etichetă de hârtie<br>colorată | Nr. de comandă<br>cu etichetă cu cod de<br>bare preimprimat |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 1,2 ml        | 66/82 x 8 mm                    | ■                     | 50/50/500             |                                               | 06.1666.001                                         |                                                             |
|                                                                                   | 1,6 ml        | 75/91 x 13 mm                   | ■                     | 50/50/500             | 04.2913                                       | 04.2913.001                                         |                                                             |

### Citrat 9NC, 3,2 %

| Substanțe preparate                                                                 | Volum nominal | Lungime fără/<br>cu blocare x Ø | Culoarea<br>capacului | Ambalaj<br>(UV/IK/UK) | Nr. de comandă<br>cu etichetă<br>transparentă | Nr. de comandă<br>cu etichetă de hârtie<br>colorată | Nr. de comandă<br>cu etichetă cu cod de<br>bare preimprimat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 1,4 ml        | 66/82 x 8 mm                    | ■                     |                       |                                               | 06.1668.001                                         |                                                             |
|                                                                                     | 1,8 ml        | 75/91 x 13 mm                   | ■                     | 50/50/500             | 04.1955                                       | 04.1955.001                                         | 04.1955.088                                                 |

### EDTA K3E

| Substanțe preparate                                                                 | Volum nominal | Lungime fără/<br>cu blocare x Ø | Culoarea<br>capacului | Ambalaj<br>(UV/IK/UK) | Nr. de comandă<br>cu etichetă<br>transparentă | Nr. de comandă<br>cu etichetă de hârtie<br>colorată | Nr. de comandă<br>cu etichetă cu cod de<br>bare preimprimat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 1,2 ml        | 66/82 x 8 mm                    | ■                     |                       |                                               | 06.1664.001                                         |                                                             |
|                                                                                     | 1,6 ml        | 66/82 x 11 mm                   | ■                     | 50/50/500             | 05.1081                                       | 05.1081.001                                         |                                                             |
|                                                                                     | 1,6 ml        | 75/91 x 13 mm                   | ■                     | 50/50/500             | 04.1956(.001)*                                |                                                     |                                                             |
|                                                                                     | 1,8 ml        | 65/81 x 13 mm                   | ■                     | 50/50/500             | 04.1951                                       | 04.1951.001                                         | 04.1951.088                                                 |

### Fluorură EDTA FE

| Substanțe preparate                                                                 | Volum nominal | Lungime fără/<br>cu blocare x Ø | Culoarea<br>capacului | Ambalaj<br>(UV/IK/UK) | Nr. de comandă<br>cu etichetă<br>transparentă | Nr. de comandă<br>cu etichetă de hârtie<br>colorată | Nr. de comandă<br>cu etichetă cu cod de<br>bare preimprimat |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 1,2 ml        | 66/82 x 8 mm                    | ■                     |                       |                                               | 06.1665.001                                         |                                                             |

\* La cerere

## Canule Safety-Multifly®, microtuburi pentru probe și microcanule

### Canulă Safety-Multifly® pentru S-Monovette®

| Ilustrație                                                                        | Ø/lungime    | Cod color                                                                         | Variantă                 | Lungimea furtunului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM | Nr. comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----|-------------|
|  | 0,8 mm/19 mm |  | 21 G x 3/4" Multiadapter | 80 mm               | 1/120/480          | 480 | 85.1638.205 |
|  | 0,6 mm/19 mm |  | 23 G x 3/4" Multiadapter | 80 mm               | 1/120/480          | 480 | 85.1640.205 |
|  | 0,5 mm/19 mm |  | 25 G x 3/4" Multiadapter | 80 mm               | 1/120/480          | 480 | 85.1642.205 |

### Microtuburi pentru probe cu substanță preparată cu dop cu apăsare atașat și etichetă transparentă

| Ilustrație                                                                         | Substanțe preparate  | Volum nominal              | Ø/lungime     | Culoarea capacului                                                                  | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|
|  | Ser CAT              | 1,3 ml                     | 10,8 mm/40 mm |    | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1501.005*                          |
|                                                                                    | Ser-gel CAT          | 1,1 ml                     | 10,8 mm/40 mm |    | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1500.005*                          |
|                                                                                    | Heparină cu litiu LH | 1,3 ml                     | 10,8 mm/40 mm |    | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1503.005*                          |
|                                                                                    | EDTA K3E             | 1,3 ml                     | 10,8 mm/40 mm |    | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1504.005*                          |
|                                                                                    | Fluorură/heparină FH | 1,3 ml                     | 10,8 mm/40 mm |  | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1505.005*                          |
|                                                                                    | Citrat 9NC 3,2 %     | 1,3 ml<br>1,0 ml<br>0,5 ml | 10,8 mm/40 mm |  | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1506.005<br>41.1506<br>41.1506.002 |

\* Variantă disponibilă și cu etichetă de hârtie: Număr de încheiere .015

### Microtuburi pentru probe cu substanță preparată cu capac cu filet

| Ilustrație                                                                          | Substanțe preparate  | Volum nominal | Ø/lungime     | Culoarea capacului                                                                  | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------|
|  | Ser CAT              | 1,3 ml        | 10,8 mm/45 mm |  | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1392.005                |
|                                                                                     | Ser-gel CAT          | 1,1 ml        | 10,8 mm/45 mm |  | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1378.005                |
|                                                                                     | Heparină cu litiu LH | 1,3 ml        | 10,8 mm/45 mm |  | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1393.005                |
|                                                                                     | EDTA K3E             | 1,3 ml        | 10,8 mm/45 mm |  | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1395.005<br>41.3395.005 |
|                                                                                     | Fluorură/heparină FH | 1,3 ml        | 10,8 mm/45 mm |  | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1394.005                |
|                                                                                     | Citrat 9NC 3,2 %     | 1,3 ml        | 10,8 mm/45 mm |  | 100/100/1.000      | 1.000 | 41.1350.005                |

### Microcanulă

| Ilustrație                                                                          | Ø/lungime    | Cod color                                                                           | Variantă    | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM | Nr. comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----|-------------|
|  | 0,8 mm/36 mm |  | 21 G x 3/4" | 1/50/500           | 50  | 85.921      |
|  | 0,6 mm/36 mm |  | 23 G x 3/4" | 1/50/500           | 50  | 85.923      |
|  | 0,5 mm/36mm  |  | 25 G x 3/4" | 1/50/500           | 50  | 85.925      |



## Microvette® APT, Microvette® 100/200

### Microvette® APT cu tub cilindric în interior

| Ilustrație                                                                        | Substanțe preparate | Volum nominal | Lungime/Ø     | Culoarea capacului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM | Nr. comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----|-------------|
|  | EDTA K2E            | 250 µl        | 75 mm x 13 mm | ■                  | 50/50/500          | 500 | 20.1331     |
|  | EDTA K2E            | 500 µl        | 75 mm x 13 mm | ■                  | 100/100/500        | 500 | 20.1330     |

### Microvette® 100 cu tub conic în interior

| Ilustrație                                                                        | Substanțe preparate  | Volum nominal | Culoarea capacului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
|  | Ser CAT              | 100 µl        | □                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1280     |
|  | Heparină cu litiu LH | 100 µl        | ■                  | 100/100/500        | 500   | 20.1282     |

### Microvette® 100 cu tub cilindric în interior

| Ilustrație                                                                          | Substanțe preparate | Volum nominal | Culoarea capacului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
|  | EDTA K3E            | 100 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1278     |

### Microvette® 200 cu tub conic în interior

| Ilustrație                                                                          | Substanțe preparate  | Volum nominal | Culoarea capacului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
|  | Ser CAT              | 200 µl        | □                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1290     |
|  | Heparină cu litiu LH | 200 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1292     |
|  | Fluorură/heparină FH | 200 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1289     |

### Microvette® 200 cu tub conic în interior

| Ilustrație                                                                          | Substanțe preparate | Volum nominal | Culoarea capacului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
|  | Ser-gel CAT         | 200 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1291     |
|  | EDTA K3E            | 200 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1288     |

## Microvette® 300/500 și Microvette® CB 200 BSG

### Microvette® 300 cu tub conic în interior

| Ilustrație                                                                        | Substanțe preparate  | Volum nominal | Culoarea capacului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
|  | Ser CAT              | 300 µl        | □                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1308     |
|  | Heparină cu litiu LH | 300 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1309     |
|  | Fluorură/heparină FH | 300 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1307     |

### Microvette® 500 cu tub cilindric în interior

| Ilustrație                                                                          | Substanțe preparate  | Volum nominal | Culoarea capacului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|-------------|
|    | Ser CAT              | 500 µl        | □                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1343     |
|   | Ser-gel CAT          | 500 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1344     |
|  | Heparină cu litiu LH | 500 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1345     |
|  | Heparină cu litiu LH | 500 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1346     |
|  | EDTA K3E             | 500 µl        | ■                  | 100/100/1.000      | 1.000 | 20.1341     |

### Microvette® CB 200 BSG

| Ilustrație                                                                          | Substanțe preparate | Volum nominal | Culoarea capacului | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM | Nr. comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----|-------------|
|  | citrat              | 200 µl        | ■                  | 50/50/500          | 500 | 18.1325     |

## Lansete de Safety și de incizie, Monovette® urină și tuburi de transport

### Lansetă de Safety

| Ilustrație                                                                        | Substanțe preparate        | Ø ac/lățimea lamei | Adâncimea de pătrundere | Cod color                                                                          | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM   | Nr. comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------|
|  | Lansetă de Safety mini     | 28 G               | 1,6 mm                  |  | 200/200/1.200      | 1.200 | 85.1015     |
|  | Lansetă de Safety Neonatal | Lamă de 1,5 mm     | 1,2 mm                  |  | 200/200/1.200      | 1.200 | 85.1019     |
|  | Lansetă de Safety Super    | Lamă de 1,5 mm     | 1,6 mm                  |  | 200/200/1.200      | 1.200 | 85.1018     |

### Lansetă de incizie - Safety-Heel®

| Ilustrație                                                                         | Substanțe preparate  | Lățimea lamei | Adâncimea de pătrundere | Cod color                                                                          | Ambalaj (UV/IK/UK) | MBM | Nr. comandă |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------------|
|  | Nou-născuți prematur | 1,75 mm       | 0,85 mm                 |  | 50/50/200          | 200 | 85.1025     |
|                                                                                    | Nou-născuți          | 2,5 mm        | 1,0 mm                  |  | 50/50/200          | 200 | 85.1026     |

### Monovette® urinară

| Ilustrație                                                                          | Volum  | Lungimea tubului/Ø în mm | Variantă                                       | Ambalaj (IK/UK) | MBM | Nr. comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|
|  | 3,2 ml | 75/13 mm                 | cu etichetă de hârtie, incl. vârf de aspirație | 512/1           | 512 | 10.250.001  |

### Tuburi de transport pentru pediatrie S-Monovette®, microtuburi pentru probe, precum și Microvette® și Multivette® 600

| Ilustrație                                                                          | potrivit pentru                                                 | Lungime x Ø  | Forma fundului | Culoare                                                                             | Ambalaj (UV/IK/UK) | UV                                                                                    | MBM   | Nr. comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|  | S-Monovette® cu Ø 8 mm                                          | 54 x 11 mm   | Fund plat      |  | 250/250/1.000      |  | 1.000 | 55.1570     |
|                                                                                     | S-Monovette® cu Ø 8 mm                                          | 54 x 11 mm   | Fund plat      |  | 250/250/1.000      |  | 1.000 | 55.1570.002 |
|                                                                                     | S-Monovette® cu Ø 8 mm, Microvette® și microtuburi pentru probe | 65 x 13 mm   | Fund rotund    |  | 250/250/1.000      |  | 1.000 | 55.1571     |
|                                                                                     | S-Monovette® cu Ø 8 mm, Microvette® și microtuburi pentru probe | 65 x 13 mm   | Fund rotund    |  | 250/250/1.000      |  | 1.000 | 55.1571.051 |
|                                                                                     | S-Monovette® cu Ø 8 mm                                          | 55 x 13 mm   | Fund rotund    |  | 250/250/1.000      |  | 1.000 | 55.1572     |
|                                                                                     | Microvette® și microtuburi pentru probe cu capac cu filet       | 75 x 13 mm   | Fund rotund    |  | 250/250/2.000      |  | 2.000 | 55.525.002  |
|                                                                                     | Microvette® și microtuburi pentru probe cu capac cu filet       | 75 x 13 mm   | Fund rotund    |  | 250/250/2.000      |  | 2.000 | 55.525.003  |
|                                                                                     | Multivette® 600                                                 | 60 x 11,5 mm | Fund plat      |  | 250/250/1.000      |  | 1.000 | 55.1577     |
|                                                                                     | Multivette® 600                                                 | 60 x 11,5 mm | Fund plat      |  | 250/250/1.000      |  | 1.000 | 55.1577.002 |


# Preanalytic Workflow made by SARSTEDT

Utilizați sinergia sistemelor  
noastre coordonate.

Descoperiți soluțiile  
360° pentru  
preanalizele dvs.  
de la SARSTEDT:



[workflow.sarstedt.com](http://workflow.sarstedt.com)

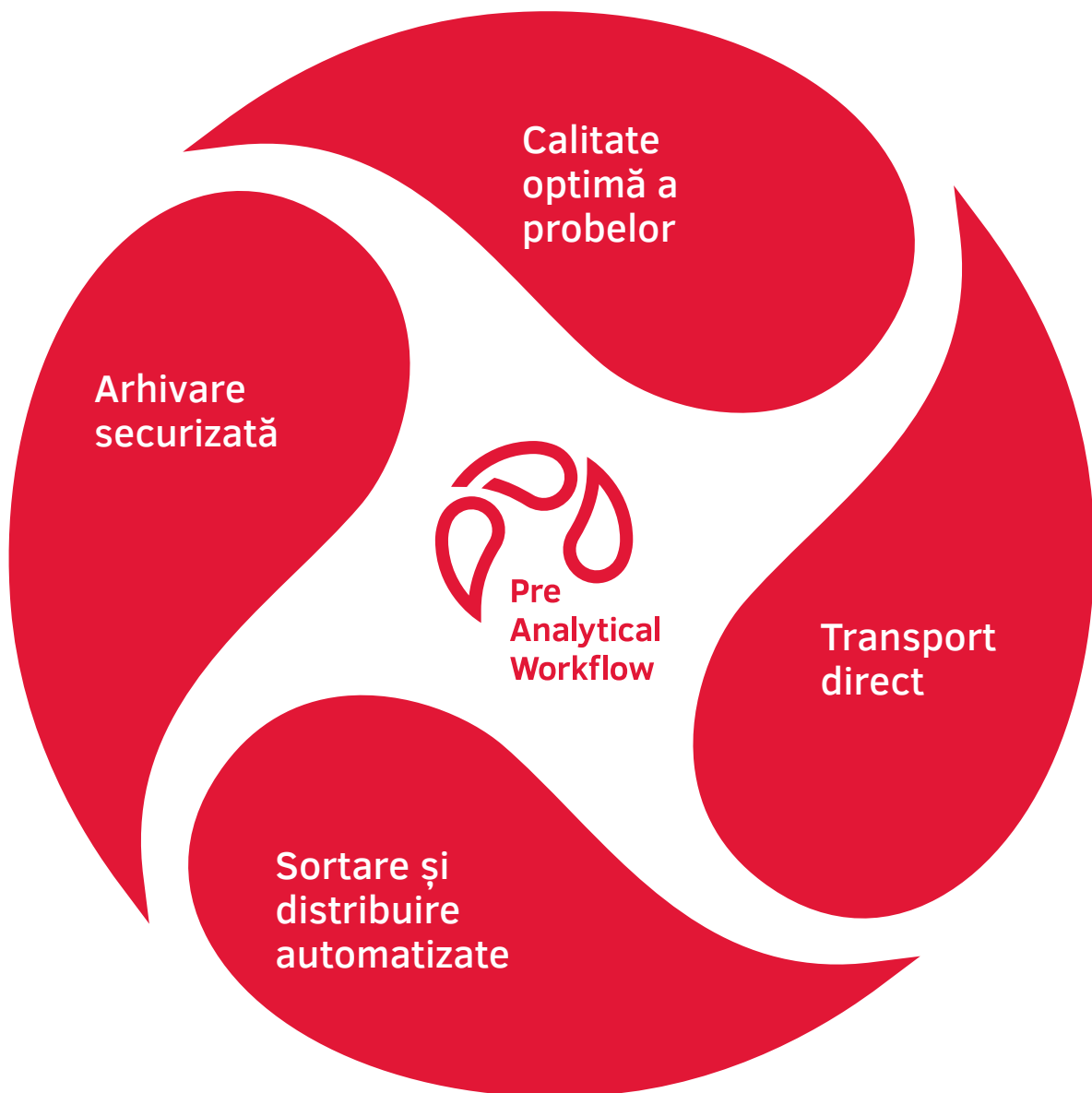



Dacă aveți întrebări:  
vom fi bucuroși să vă ajutăm!

Vă rugăm să vizitați și site-ul nostru:  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

## **SARSTEDT AG & Co. KG**

Sarstedtstraße 1  
D-51588 Nümbrecht

Phone: +49 2293 305 0

[export@sarstedt.com](mailto:export@sarstedt.com)  
[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)