

Blodprøvetakingsutstyr for pediatri



Pre-analytics

Pediatri

Barn – den mest sårbare pasientgruppen – har behov for et spesielt, skånsomt system for blodprøvetaking

Våre små pasienter

Ingen andre pasientgrupper har de samme kravene til system for blodprøvetaking. Det er nettopp derfor vi har spesialisert oss på disse behovene og utviklet optimale systemer for blodprøvetaking, som sikrer at prosedyren blir så skånsom og smertefri som mulig for de små pasientene.

Vi har lagt særlig vekt på å minimere volumet for å redusere det diagnostiske blodtapet til et absolutt minimum. Avhengig av alder, vekt og blodvolum, kan du velge fra en omfattende produktportefølje, både for kapillær og for venøs blodprøvetaking.



Finn den riktige
S-Monovette® til din
bruk:

[sarstedt.com/
s-monovette-de](https://sarstedt.com/s-monovette-de)

Vi har løsningen for de ulike kravene som stilles i de respektive aldersgruppene





Neonatologi – nyfødte

Minimalt prøvevolum for de minste pasientene

Mikro-kanyle og Mikro-prøverør

Mikro-kanylen har blitt utviklet for de spesielle behovene innen neonatologi og er utstyrt med et riflet gripestykke som garanterer en optimal og sikker punksjon. Den er tilgjengelig i tre forskjellige diametere. Takket være kanylens korte konstruksjon gir den et minimalt dødsvolum ved prøvetakingen. Gripestykket på kanylen er utformet slik at den enkelt kan dreies mens den er inne i venen. På denne måten kan man

enkelt fjerne eventuell blokkering av kanyleåpningen. Egnede mikroprøverør med skru eller trykkork, samt Microvette-rør for små prøvevolum er tilgjengelig med en rekke ulike tilsetninger. Det nominelle volumets område strekker seg fra 100 µl til maksimalt 1,3 ml, avhengig av beholderens type og preparering.

Safety-Heel®

Medfødte stoffskiftesykdommer og endokrinopater bør oppdages tidlig for å muliggjøre igangsetting av egnet og effektiv behandling. Til dette tas det prøver til en nyfødtscreening. Prøven tas i de fleste tilfeller ved en hælunksjon. Punksjon med konvensjonelle lansetter skjer med et vertikalt stikk og faren for personskafe (hvor det stikkes gjennom flere hudlag helt til beinet) og

hematomdannelse er stor. Da det her ofte er snakk om en smertefull prosess, har du med Safety-Heel®-lansetten en optimal mulighet til å redusere smertefølelsen og optimere blodinnsamlingen. Med Safety-Heel® blir dannelsen av hematomer motvirket med en halvsirkelformet innsnittretning og en liten innstikkdybde, og slik sørges det for en vesentlig behageligere prøvetaking av dine små pasienter.



Mikro-kanyle, mikro-prøverør og Safety Heel®

Enkel bruk



Mikro-kanylens riflede gripestykke muliggjør en lett og sikker punksjon. Det er en egnet mikro-prøverør tilgjengelig slik at blodet kan dryppe av.

Safety-Heel®. Den skånsomme lansetten for hælunksjon.



Baby – småbarn

Kapillær blodprøvetaking av småbarn

Safety-lansett og Microvette®

For å i møtekomme de ulike kravene som stilles så er Microvette® tilgjengelig både med sylindrisk eller konisk innvendig form, og med et volumområde som strekker seg fra 100 til 500 µl. Man har muligheten å innhente prøvematerialet enten ved å benytte seg av en såkalt end-to-end kapillær eller ved å samle prøvemateriale med oppsamlingskanten.

De ulike variantene av Safety-lansetten gir brukeren mulighet til å tilpasse innstikksdybden og blodmengden som kreves, slik at de små pasientenes anatomiske forhold kan ivaretas på en optimal måte.



Microvette®, Microvette® APT og Safety-lansett

Forskjellige punksjonsmuligheter med Safety-lansetten



Microvette® – Mer fleksibilitet grunnet to innhentingsteknikker



Microvette® 100/200 – Blodprøvetaking med end-to-end-kapillær



Microvette® 300/500 – Blodprøvetaking med oppsamlingskant



Småbarn – skolebarn

Venøs blodprøvetaking med minste prøvevolum

Safety-Multifly®-kanyler og S-Monovette®


De moderne analysesystemenes sensitivitet gjør det mulig å redusere det nødvendige prøvevolumet, selv for omfattende rutineundersøkelser. Gjennom det spesielle designet med de reduserte målene og det lille nominelle volumet, tilfredsstiller S-Monovette® Pediatri disse strenge kravene på en ideell måte.

Muligheten for skånsom blodprøvetaking ved bruk av aspirasjonsteknikk gjør S-Monovette® Pediatri til en optimal løsning for de utfordrende veneforholdene innen pediatriisk prøvetaking



Safety-Multifly®-kanyle og S-Monovette®

Optimal sikkerhet og komfort både for pasient og bruker

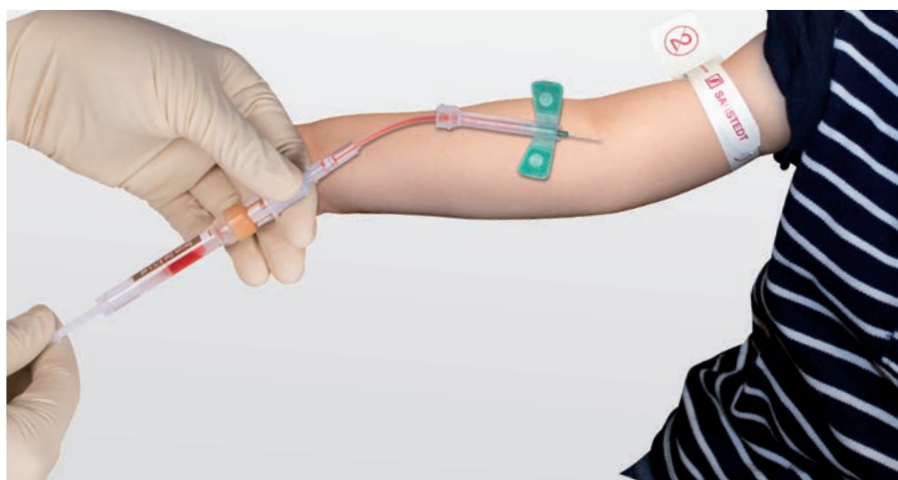

S-Monovette®

Serum Gel CAT

Preparering	Nominelt volum	Lengde uten/ med kork x Ø	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	Bestillingsnr. med transparent etikett	Bestillingsnr. med farget papiretikett	Bestillingsnr. med forhånds-strekkodet etikett
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1667.001	

Serum CAT

Preparering	Nominelt volum	Lengde uten/ med kork x Ø	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	Bestillingsnr. med transparent etikett	Bestillingsnr. med farget papiretikett	Bestillingsnr. med forhånds-strekkodet etikett
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1663.100	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.2911.200		

Litium-heparin gel LH

Preparering	Nominelt volum	Lengde uten/ med kork x Ø	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	Bestillingsnr. med transparent etikett	Bestillingsnr. med farget papiretikett	Bestillingsnr. med forhånds-strekkodet etikett
	1,1 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1669.100	

Litium-heparin LH

Preparering	Nominelt volum	Lengde uten/ med kork x Ø	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	Bestillingsnr. med transparent etikett	Bestillingsnr. med farget papiretikett	Bestillingsnr. med forhånds-strekkodet etikett
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■	50/50/500		06.1666.100	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.2913.200		

Citrat 9NC, 3,2 %

Preparering	Nominelt volum	Lengde uten/ med kork x Ø	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	Bestillingsnr. med transparent etikett	Bestillingsnr. med farget papiretikett	Bestillingsnr. med forhånds-strekkodet etikett
	1,4 ml	66/82 x 8 mm	■			06.1668.100	
	1,8 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500	04.1955.200	04.1955.100	04.1955.288

EDTA K3E

Preparering	Nominelt volum	Lengde uten/ med kork x Ø	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	Bestillingsnr. med transparent etikett	Bestillingsnr. med farget papiretikett	Bestillingsnr. med forhånds-strekkodet etikett
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■			06.1664.100	
	1,6 ml	66/82 x 11 mm	■	50/50/500	05.1081.200	05.1081.100	
	1,6 ml	75/91 x 13 mm	■	50/50/500		04.1956.100	
	1,8 ml	65/81 x 13 mm	■	50/50/500		04.1951.100	04.1951.288

Fluorid EDTA FE

Preparering	Nominelt volum	Lengde uten/ med kork x Ø	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	Bestillingsnr. med transparent etikett	Bestillingsnr. med farget papiretikett	Bestillingsnr. med forhånds-strekkodet etikett
	1,2 ml	66/82 x 8 mm	■			06.1665.100	

Safety-Multifly®-kanyler, mikro-prøverør og mikro-kanyler

Safety-Multifly®-kanyler for S-Monovette®

Illustrasjon	Ø /lengde	Fargekode	Utførelse	Slangelengde	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	0,8 mm / 19 mm	■	21G x 3/4" Multi-adapter	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1638.205
	0,6 mm / 19 mm	■	23G x 3/4" Multi-adapter	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1640.205
	0,5 mm / 19 mm	■	25G x 3/4" Multi-adapter	80 mm	1 / 120 / 480	480	85.1642.205

Preparerte mikro-prøverør med festet inntykkingspropp og transparent etikett

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Ø/lengde	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Serum CAT	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1501.105*
	Serum Gel CAT	1,1 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1500.105*
	Litium-heparin LH	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1503.105*
	EDTA K3E	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1504.105*
	Fluorid heparin FH	1,3 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1505.105*
	Citrat 9NC, 3,2 %	1,3 mL 1,0 ml 0,5 ml	10,8 mm / 40 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1506.105 41.1506.100 41.1506.102

* Utførelsen er dessuten tilgjengelig med papiretikett: Sluttnummer .015

Preparerte mikro-prøverør med skrukork

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Ø/lengde	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Serum CAT	1,3 mL	10,8 mm 45 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1392.105
	Serum Gel CAT	1,1 ml	10,8 mm - 45 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1378.105
	Litium-heparin LH	1,3 mL	10,8 mm 45 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1393.105
	EDTA K3E	1,3 mL	10,8 mm 45 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1395.105 41.3395.105
	Fluorid heparin FH	1,3 mL	10,8 mm 45 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1394.105
	Citrat 9NC, 3,2 %	1,3 mL	10,8 mm 45 mm	■	100 / 100 / 1.000	1.000	41.1350.105

Mikro-kanyler

Illustrasjon	Ø/lengde	Fargekode	Utførelse	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	0,8 mm/36mm	■	21 G x 3/4"	1 / 50 / 500	50	85.921
	0,6 mm/36 mm	■	23 G x 3/4"	1 / 50 / 500	50	85.923
	0,5 mm/36 mm	■	25 G x 3/4"	1 / 50 / 500	50	85.925

Microvette® APT, Microvette® 100 / 200

Microvette® APT med sylindrisk innvendig beholder

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Lengde / Ø	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	EDTA K2E	250 µl	75 mm x 13 mm	■	50 / 50 / 500	500	20.1331.100
	EDTA K2E	500 µl	75 mm x 13 mm	■	100 / 100 / 500	500	20.1330.100

Microvette® 100 med konisk innvendig beholder

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Serum CAT	100 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1280.100
	Litium-heparin LH	100 µl	■	100 / 100 / 500	500	20.1282.100

Microvette® 100 med sylindrisk innvendig beholder

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	EDTA K3E	100 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1278.100

Microvette® 200 med konisk innvendig beholder

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Serum CAT	200 µL	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1290.100
	Litium-heparin LH	200 µL	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1292.100
	Fluorid heparin FH	200 µL	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1289.100

Microvette® 200 med konisk innvendig beholder

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Serum Gel CAT	200 µL	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1291.100
	EDTA K3E	200 µL	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1288.100

Microvette® 300 / 500 og Microvette® CB 200 BSG

Microvette® 300 med konisk innvendig beholder

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Serum CAT	300 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1308.100
	Litium-heparin LH	300 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1309.100
	Fluorid heparin FH	300 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1307.100

Microvette® 500 med sylindrisk innvendig beholder

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Serum CAT	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1343.100
	Serum Gel CAT	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1344.100
	Litium-heparin LH	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1345.100
	Litium-heparin LH	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1346.100
	EDTA K3E	500 µl	■	100 / 100 / 1.000	1.000	20.1341.100

Microvette® CB 200 BSG

Illustrasjon	Preparering	Nominelt volum	Korkens farge	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Citrat	200 µL	■	50 / 50 / 500	500	18.1325.100

Lansetter, Urin-Monovette® og bærerør

Safety-lansett

Illustrasjon	Preparering	Nålens Ø / klingens bredde	Innstikkdybde	Fargekode	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Safety-lansett Mini	28 G	1,6 mm		200 / 200 / 1.200	1.200	85.1015
	Safety-lansett Neonatal	Lâmina de 1,5 mm	1,2 mm		200 / 200 / 1.200	1.200	85.1019
	Safety-lansett Super	Lâmina de 1,5 mm	1,6 mm		200 / 200 / 1.200	1.200	85.1018

Safety-Heel® Hællansett

Illustrasjon	Preparering	Klingens bredde	Innstikkdybde	Fargekode	Pakning (UV/IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	Premature	1,75 mm	0,85 mm		50 / 50 / 200	200	85.1025
	Nyfødte	2,5 mm	1,0 mm		50 / 50 / 200	200	85.1026

Urin-Monovette®

Illustrasjon	Volum	Rørlengde / Ø i mm	Utførelse	Pakning (IK/UK)	MBM	Bestillingsnr.
	3,2 ml	75 / 13 mm	med papiretikett inkl. sugespiss	512/1	512	10.250.001

Bærrør for pediatri S-Monovette®, mikro-prøverør samt Microvette® og Multivette® 600

Illustrasjon	passende for	Lengde x Ø	Bunnform	Farge	Pakning (UV/IK/UK)	UV	MBM	Bestillingsnr.
	S-Monovette® med Ø 8 mm	54 x 11 mm	Flat bunn		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1570
	S-Monovette® med Ø 8 mm	54 x 11 mm	Flat bunn		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1570.002
	S-Monovette® med Ø 8 mm, Microvette® og mikro-prøverør	65 x 13 mm	Rund bunn		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1571
	S-Monovette® med Ø 8 mm, Microvette® og mikro-prøverør	65 x 13 mm	Rund bunn		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1571.051
	S-Monovette® med Ø 8 mm	55 x 13 mm	Rund bunn		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1572
	Microvette® og mikro- prøverør med skrukork	75 x 13 mm	Rund bunn		250 / 250 / 2.000		2.000	55.525.002
	Microvette® og mikro- prøverør med skrukork	75 x 13 mm	Rund bunn		250 / 250 / 2.000		2.000	55.525.003
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	Flat bunn		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1577
	Multivette® 600	60 x 11,5 mm	Flat bunn		250 / 250 / 1.000		1.000	55.1577.002


Preanalytic Workflow made by SARSTEDT

Gjør deg nytte av synergien til våre systemer, som er tilpasset hverandre.

Oppdag 360°-
løsningene for
preanalytikk fra
SARSTEDT



workflow.sarstedt.com

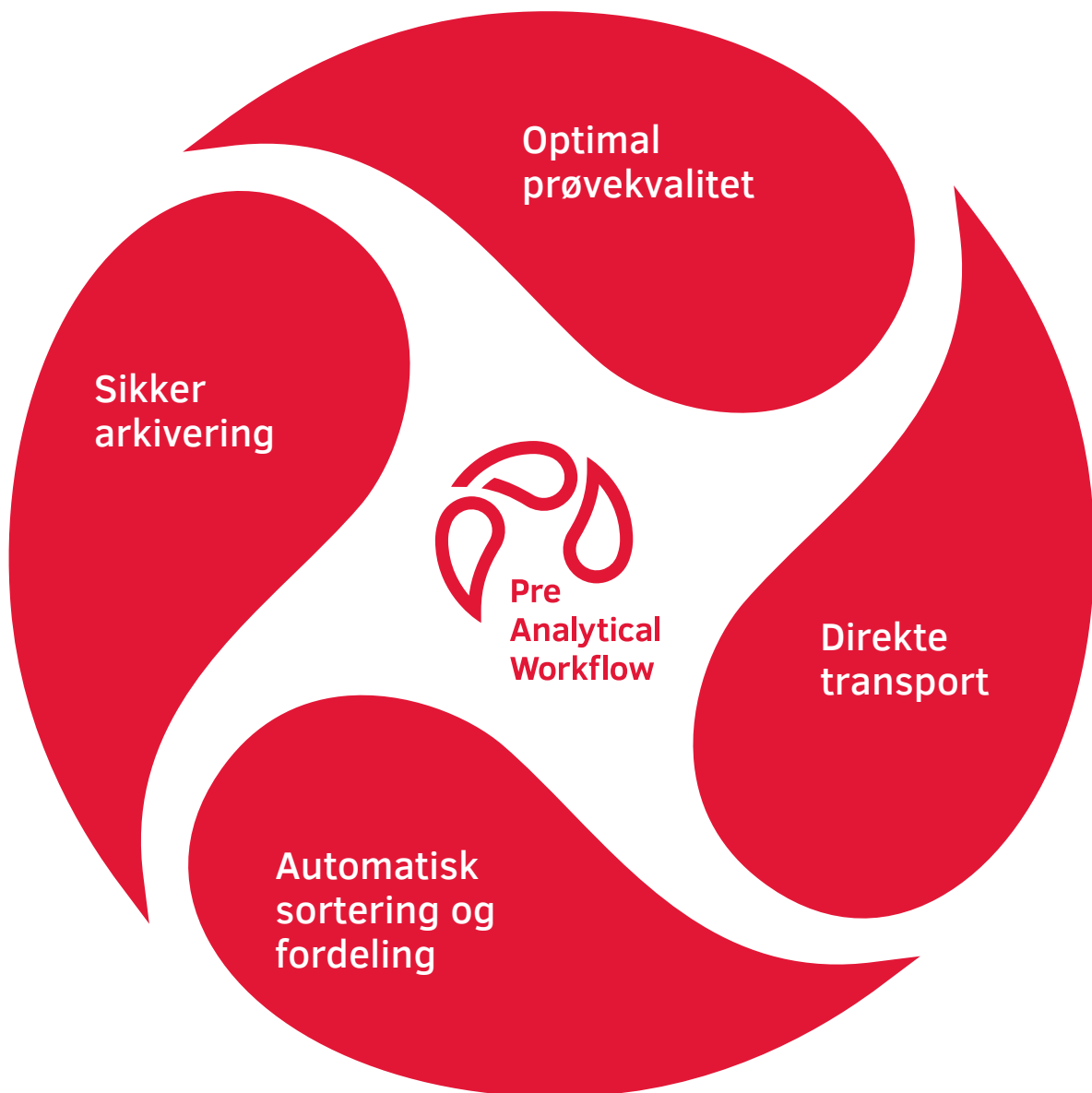

Hvis du har spørsmål:
Vi hjelper deg gjerne!

Besøk oss via vårt nettsted:
www.sarstedt.com

SARSTEDT AS

Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Tel: +47 64 85 68 20

info.no@sarstedt.com
www.sarstedt.com