

Provette con fondo conico da 12 ml

Numerose applicazioni di laboratorio e la precisione delle analisi esigono il controllo visivo e la valutazione del volume del campione. Per questi casi d'impiego particolari, Sarstedt propone provette con fondo conico da 12 ml in polistirolo trasparente simile al vetro.

La scala graduata a intervalli di 0,5 ml, realizzata ad iniezione, consente un controllo sicuro del livello di riempimento anche in presenza di liquidi scuri o torbidi. Grazie alla forma conica, durante la centrifugazione, si depositano sul fondo della provetta anche minime quantità di sostanze solide a densità elevata.


Per l'uso ottimale in svariati settori d'applicazione, Sarstedt propone le provette per centrifuga da 110 x 17 mm in polistirolo, anche nella confezione StackPack e in una versione sterile.

In alternativa è possibile utilizzare provette con fondo conico in polipropilene, resistenti e autoclavabili, per applicazioni con elevate sollecitazioni termiche, chimiche e meccaniche.

Questo ampliamento della nostra gamma di prodotti offre un'alternativa universale alle provette con fondo conico da 105 x 16,8 mm e 95 x 16,8 mm.

I vantaggi in breve:

- Semplice controllo del volume
- Risparmio del 40% di spazio grazie alla confezione StackPack
- Versione sterile con tappo assemblato

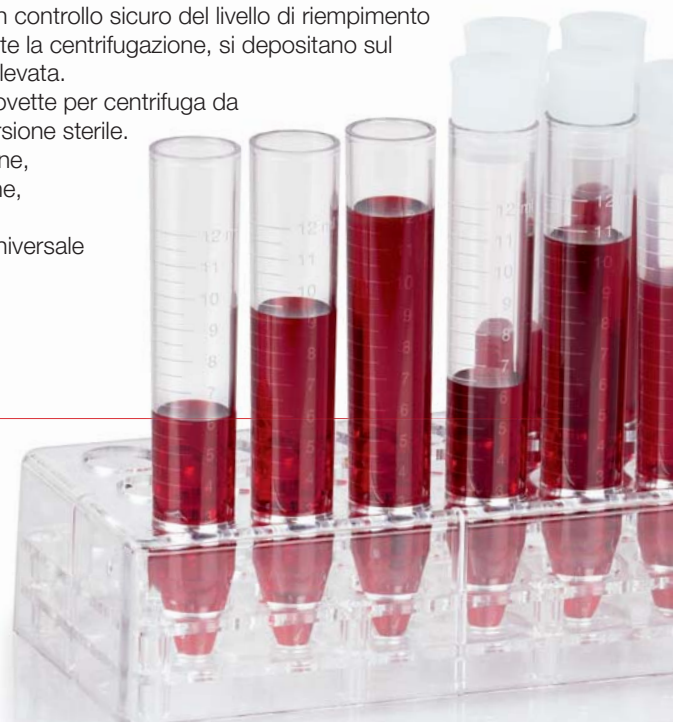

SUGGERIMENTO

Provate anche le provette con fondo conico da 10 ml in polipropilene particolarmente trasparente. L'ampia superficie di scrittura offre molto spazio per riportare diciture chiare e resistenti. La scala graduata bianca stampata rende ancora più semplice il controllo del livello di riempimento.

Dati per l'ordinazione

| Codice articolo | Materiale | Confezionamento | tappi compatibili | Confezione | Alternativa a |
|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| 57.462 | Polistirolo | Sacchetto | 65.793 65.816 | 1.000/cartone 500/sacchetto | 57.464.005 57.469 |
| 57.462.015 | Polistirolo | StackPack | 65.793 65.816 | 1.000/cartone 250/StackPack | 57.464 |
| 57.462.001 | Polistirolo | sterile, con tappo assemblato | --- | 500/cartone 100/sacchetto | 57.464.001 |
| 57.527 | Polipropilene | Sacchetto | 65.793 65.816 | 1.000/cartone 500/sacchetto | 57.513 57.519 |

Dati per l'ordinazione di provette con fondo conico da 10 ml

| Codice articolo | Materiale | tappi compatibili | Confezione |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 62.9924.272 | Polipropilene | 65.816 65.720 65.793 | 1.000/cartone 500/sacchetto |

SARSTEDT S.r.l.
Via della Siderurgia, 12
37139 Verona
Telefono +39 045 85 10 114
Telefax +39 045 85 10 118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com