

S-Monovette® súprava na odber POC

Kontrolovaný odber krvi a dávkovanie vzorky



Predchádza
chybám v
testovaní
Point-of Care



SARSTEDT

Pre VŠETKY venózne a arteriálne vzorky POC!

S-Monovette® súprava POC Collect

- Zníženie nákladov na testovacie kazety vďaka zníženiu počtu opakovaných meraní
- Jednoduché a kontrolované dávkovanie vzoriek
- Skrátenie času odozvy
- Zlepšenie starostlivosti o pacienta
- Maximálna bezpečnosť vďaka uzatvorenému systému krvi

S-Monovette® súprava na odber POC je vhodná na kontrolovaný venózny odber krvi z cievnych prístupov a kontrolované dávkovanie vzorky (po kvapkách) do testovacích kartuší „Point of Care“. Po nadávkovaní vzorky sa môže S-Monovette® zasláť priamo do laboratória, ak je potrebné vykonanie potvrdzovacieho testu; v záujme manažmentu krvi pacienta nie je potrebný ďalší odber krvi.

S-Monovette® súprava na odber POC výrazne znižuje chybovosť a konečnému používateľovi zabezpečuje spoľahlivosť procesu.

- vedúca laboratória nemocnice s 387 lôžkami



Odstráňte alebo znížte chyby, ktoré dokážete ovplyvniť:

- Preplnenie
- Nedostatočné naplnenie
- Vzduchové bubliny
- Komplikované zaobchádzanie

Tri hlavné nemocnice vykonali celkovo 27 630 testov „Point of care“. Nová S-Monovette® súprava na odber POC znižuje počet chýb z priemerných 15 % na menej ako 1 %. A to bez jedinej preplnenej testovacej kazety, čo je najčastejšie sa vyskytujúca chyba.

NOVÉ



Nemocnica A - počet chýb sa znížil na 1,06 %

Kde	Celkový počet testovacích kaziet	Doba trvania	Počet nenameraných testovacích kaziet	Relevantný podiel nenameraných testovacích kaziet
Nemocnica celkovo	5 015	7 mesiacov	53	1,06 %

Nemocnica B - počet chýb sa znížil na 0,95 %

Kde	Celkový počet testovacích kaziet	Doba trvania	Počet nenameraných testovacích kaziet	Relevantný podiel nenameraných testovacích kaziet
Nemocnica celkovo	7 976	12 mesiacov	76	0,95 %

Nemocnica C - počet chýb sa znížil na 0,65 %

Kde	Celkový počet testovacích kaziet	Doba trvania	Počet nenameraných testovacích kaziet	Relevantný podiel nenameraných testovacích kaziet
Nemocnica celkovo	14 639	9 mesiacov	95	0,65 %

Súčasti súpravy:


- Multi-Adaptér Luer-Lock na pripojenie k vaskulárnym prípojkám
- Multi-Adaptér s trňom pre dávkovanie presného objemu krvi
- S-Monovette® 1,2ml lítium-heparín na odber a dávkovanie vzoriek

Objednávacie informácie



Objednávacie č.	Popis	Balenie
51.5100.100	S-Monovette® súprava na odber POC	1 súprava / vrecko so zipsom 50 kus./ kartón



Manipulácia

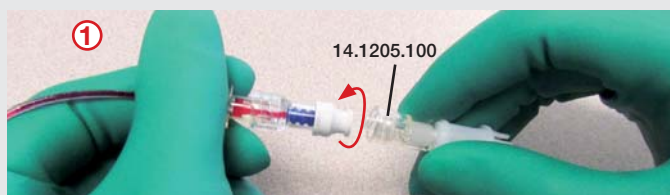

Prípravte vaskulárny prístup na odber vzoriek v súlade s Vašimi internými predpismi. Prepojte Multi-Adaptér Luer-Lock s vaskulárnym prístupom.

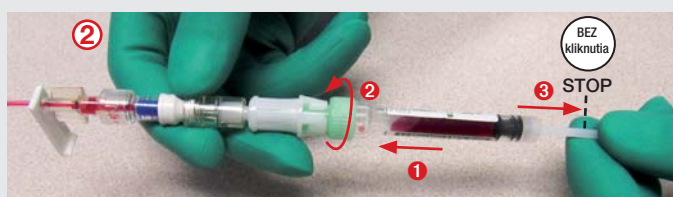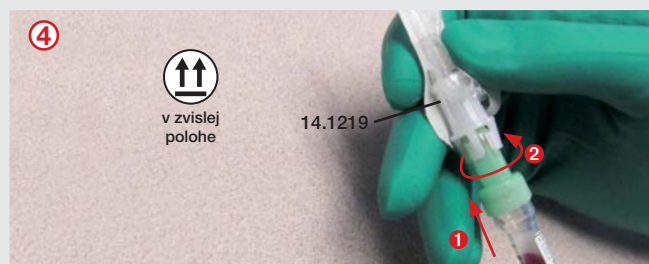

1. Zlikvidujte prvú kvapku/kvapky v súlade s požiadavkami zariadenia alebo testu a
2. dávajte vzorku do testovacej kazety tak, že chytíte spodný okraj piestu a opatrne pohnete piestom dopredu.

