


Artigos Low Profile para PCR

Otimizados para “Fast PCR”

NOVO!

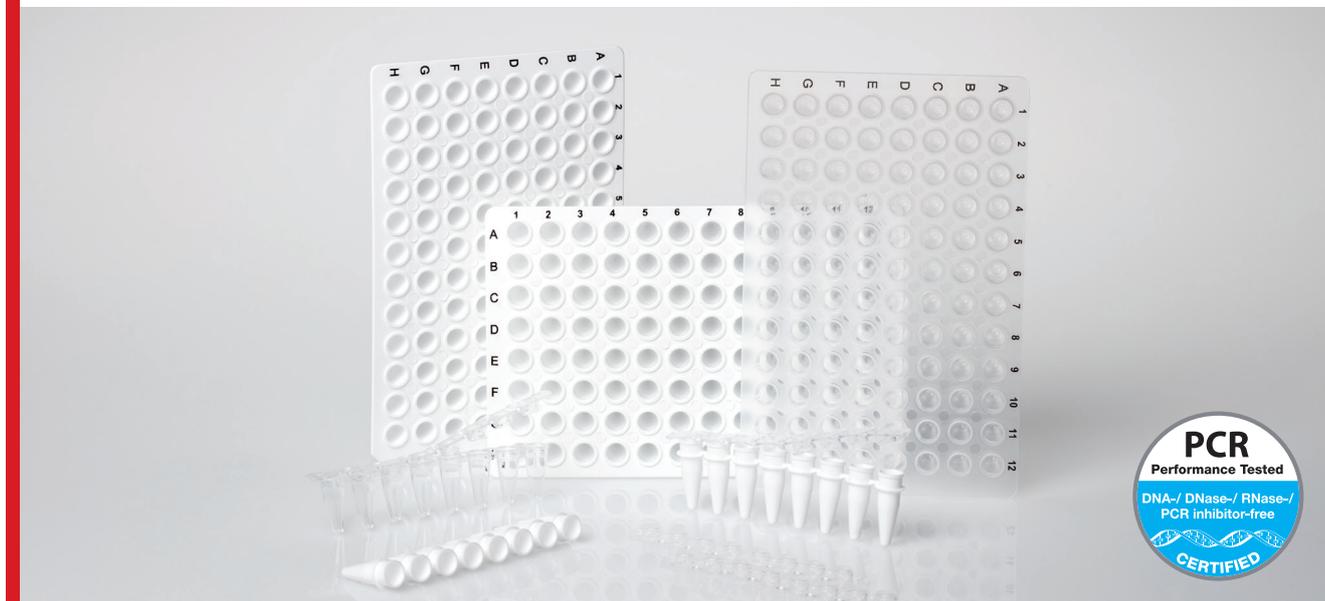

As novas cadeias e placas PCR em design Low Profile, de baixo perfil, são especialmente indicadas para pequenas misturas de reação, inferiores a 20 µl, e são usadas nos chamados “termocicladores Fast PCR” (formato em bloco de 0,1 ml).

Características do produto:

- Devido ao design mais curto, a mistura de PCR fluida ao aquecer fica com menos espaço para a passagem para a fase gasosa, o que resulta em menos condensação nas paredes laterais, permitindo a manutenção constante das condições de reação.
- Um design extremamente uniforme e de paredes finas garante uma transferência rápida da temperatura para o espaço de reação.
- Variantes de cor branca estão disponíveis para uma detecção ideal da fluorescência na qPCR.
- Com certificação de isenção de DNA humano, DNA bacteriano, DNase, RNase e inibidores de PCR, os artigos são ideais para as exigências ao trabalhar com ácidos nucleicos.

Informações para pedidos

Ref.	Descrição	Embalagem
72.982.002	Multiply®-µStripPro LP, transparente; incluindo cadeia de tampas	125 / 1.250
72.982.092	Multiply®-µStripPro LP, branca; incluindo cadeia de tampas	125 / 1.250
72.1977.202	Placa PCR Multiply® LP, transparente	20 / 100
72.1977.232	Placa PCR Multiply® LP, branca	20 / 100

SARSTEDT Ltda.
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Soamim
CEP 18540-000
Porto Feliz – SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**