


# Низкопрофильные изделия для ПЦР

Оптимизированы для „быстрой ПЦР“

НОВИНКА!

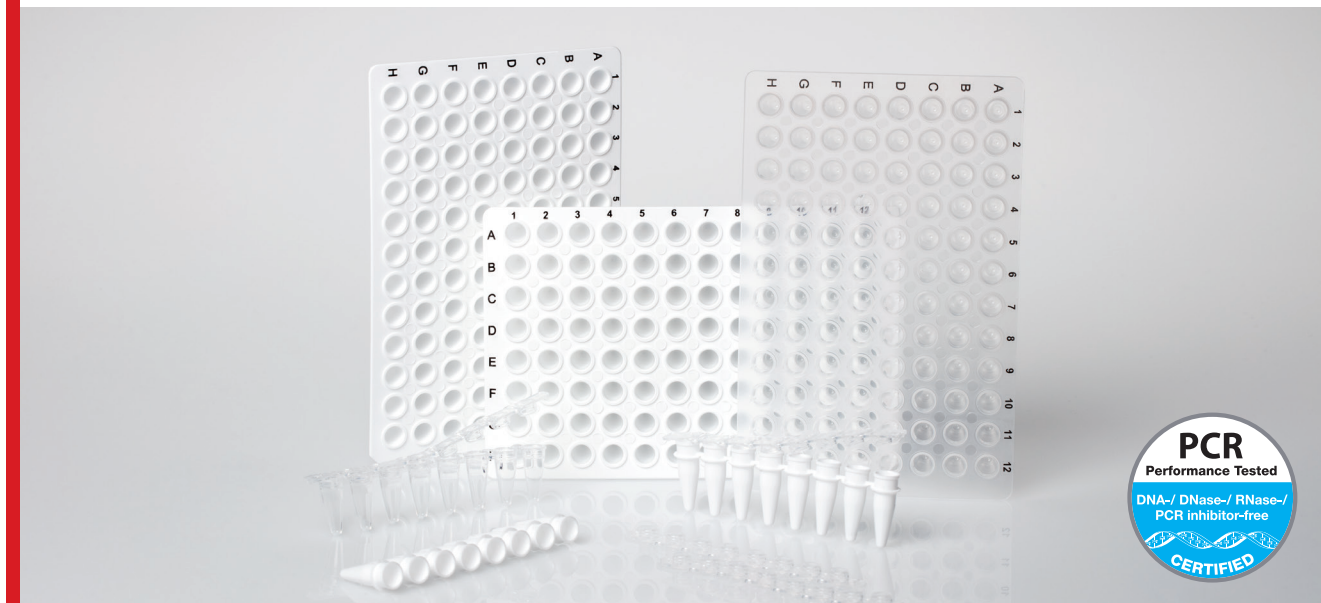

Новые низкопрофильные ПЦР-стрипы и планшеты предназначены специально для небольших объёмов реагентов, менее 20 мкл, и применяются в „термоциклерах для быстрой ПЦР“ (блочный формат 0,1 мл).

## Отличительные признаки:

- Благодаря укороченной конструкции ПЦР-реагенту при нагреве остаётся меньше пространства для перехода в газовую фазу, за счёт чего возникает меньше конденсата на боковых стенках и поддерживаются более стабильные условия реакции.
- В высшей степени однородная и тонкостенная конструкция обеспечивает быструю передачу температуры в реакционную камеру.
- Для оптимального обнаружения флуоресценции при qPCR предлагаются варианты белого цвета.
- Изделия сертифицированы, не содержат человеческой ДНК, ДНК бактерий, ДНК-азы, РНК-азы и ингибиторов ПЦР и тем самым оптимально подходят под требования работы с нуклеиновыми кислотами.

## Информация для заказа

Кат. №	Наименование	Упаковка
72.982.002	Multiply®-μStripPro LP, прозрачные; с крышками в стрипах	125/1 250
72.982.092	Multiply®-μStripPro LP, белые; с крышками в стрипах	125/1 250
72.1977.202	ПЦР-планшет Multiply® LP, прозрачный	20/100
72.1977.232	ПЦР-планшет Multiply® LP, белый	20/100

SARSTEDT AG & Co. KG  
Представительство в Москве  
Большой Строченовский пер. 7, офис 602  
115054 Москва  
Тел./факс: +7 495 937 52 28  
info.ru@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

 **SARSTEDT**