

S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT


Ochrana pred svetlom –
od odberu krvi po archiváciu



- Ochrana pred svetlom od samého začiatku
- Ochrana pred svetlom v rozsahu UV žiarenia
- Väčšia udržateľnosť na pracovisku vďaka vyhýbaniu sa hliníkovým fóliám
- Zvyčajná pohodlná identifikácia vzoriek vďaka etiketám, ktoré sú vždy čitateľné
- Preanalytika vhodná pre procesy

Pri použití skúmavky S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT nie je potrebné zabalíť vzorku krvi napríklad do hliníkovej fólie. Priama čitateľnosť, a tým aj zvyčajne pohodlná identifikácia vzorky, zostáva zachovaná. Šetrením zdrojov (hliníková fólia) je tiež možné jednoducho prispieť k väčšej udržateľnosti na pracovisku.

Ochrana pred svetlom je zaručená v príslušnom rozsahu UV žiarenia (190 nm – 380 nm). Priepustnosť svetla je v tejto oblasti v priemere menšia ako 1 %.

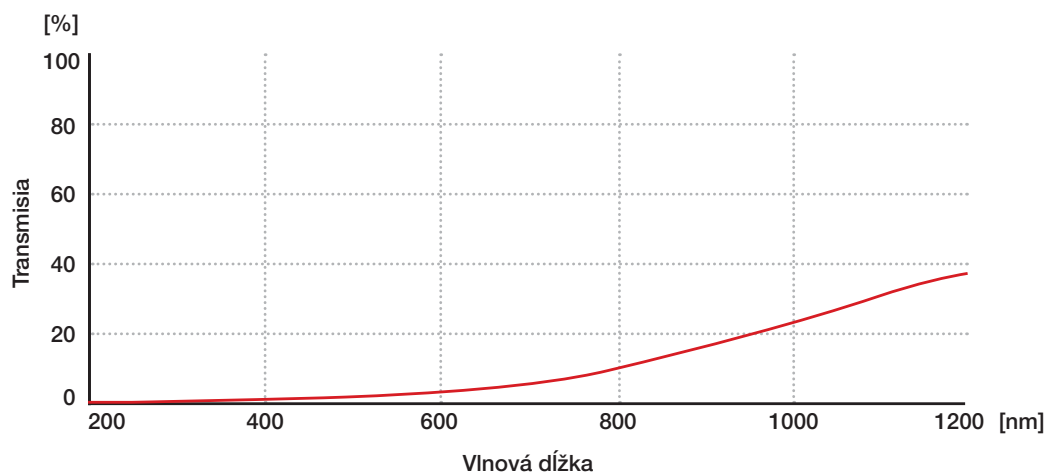

Obr. 1: Transmisia na stenu skúmavky S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT



Katalógové č.	Preparácia	Objem	Dĺžka/Ø	Balenie
04.1925.003	S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT	4,0 ml	75 x 13 mm	500/kartón 50/vnútorne balenie

SARSTEDT spol. s r. o.
 Pri smaltovni 4
 851 01 Bratislava
 Tel: +421 232 184 930
 info.sk@sarstedt.com
 www.sarstedt.com