

S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

Bescherming tegen licht – vanaf bloedafname tot opslag




- Bescherming tegen licht vanaf het begin
- Bescherming tegen licht uit hele uv-bereik
- Meer duurzaamheid op de werkplek door het vermijden van aluminiumfolie
- Gebruikelijke duidelijke monsteridentificatie dankzij altijd leesbare etiketten
- Procesgeschikte preanalyse



Pre-analyse

Met de S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT hoeft het bloedmonster niet meer in bijvoorbeeld aluminiumfolie gewikkeld te worden. De directe afleesbaarheid en dus de gebruikelijke gemakkelijke monsteridentificatie blijft behouden. Bovendien kan men een eenvoudige bijdrage leveren aan meer duurzaamheid op de werkplek door grondstoffen (aluminiumfolie) te besparen.

Bescherming tegen licht is gegarandeerd in het relevante uv-bereik (190-380 nm). De lichtdoorlaatbaarheid in dit bereik is gemiddeld minder dan 1%.

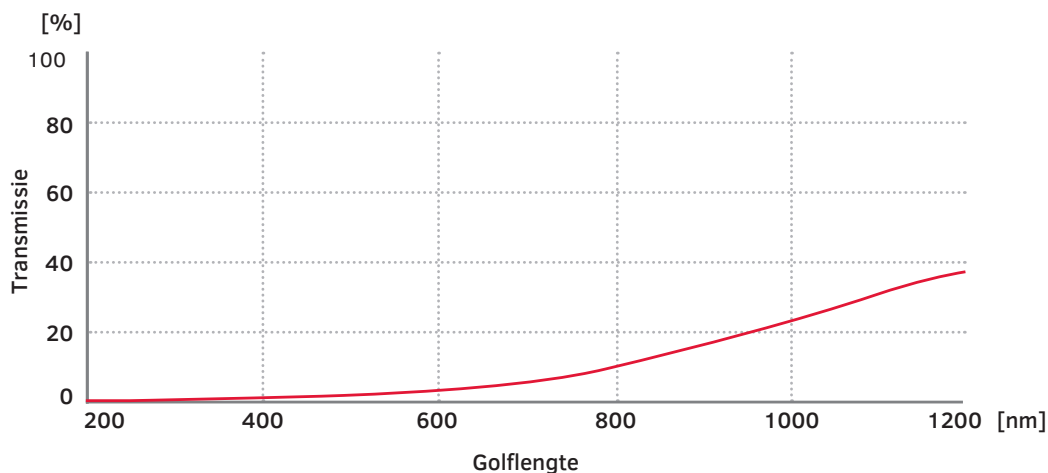

Transmissie van de S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT-buiswand

S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

Lengthe / Ø	Kleur	Verpakking	Volume	Art.-nr.
75 x 13 mm	■	500 / doos 50 / binnendoos	4,0 ml	04.1925.003

SARSTEDT B.V.

Rithmeesterpark 23 A
4838 GZ Breda

Tel: +31 76 501 75 50

Fax: +31 76 501 76 26

info.nl@sarstedt.com

www.sarstedt.com

SARSTEDT BV

Uitbreidingsstraat 84/3
2600 Berchem

Tel +32 3 541 76 92

Fax +32 3 541 81 03

info.be@sarstedt.com

www.sarstedt.com

