

S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

Ochrana pred svetlom – od odberu krvi po archiváciu




- Ochrana pred svetlom od samého začiatku
- Ochrana pred svetlom v rozsahu UV žiarenia
- Väčšia udržateľnosť na pracovisku vďaka vyhýbaniu sa hliníkovým fóliám
- Zvyčajná pohodlná identifikácia vzoriek vďaka etiketám, ktoré sú vždy čitateľné
- Preanalytika vhodná pre procesy



Preanalytika

Pri použití skúmavky S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT nie je potrebné zabaliť vzorku krvi napríklad do hliníkovej fólie. Priama čitateľnosť, a tým aj zvyčajne pohodlná identifikácia vzorky, zostáva zachovaná. Šetrením zdrojov (hliníková fólia) je tiež možné jednoducho prispieť k väčšej udržateľnosti na pracovisku.

Ochrana pred svetlom je zaručená v príslušnom rozsahu UV žiarenia (190 nm – 380 nm). Priepustnosť svetla je v tejto oblasti v priemere menšia ako 1 %.

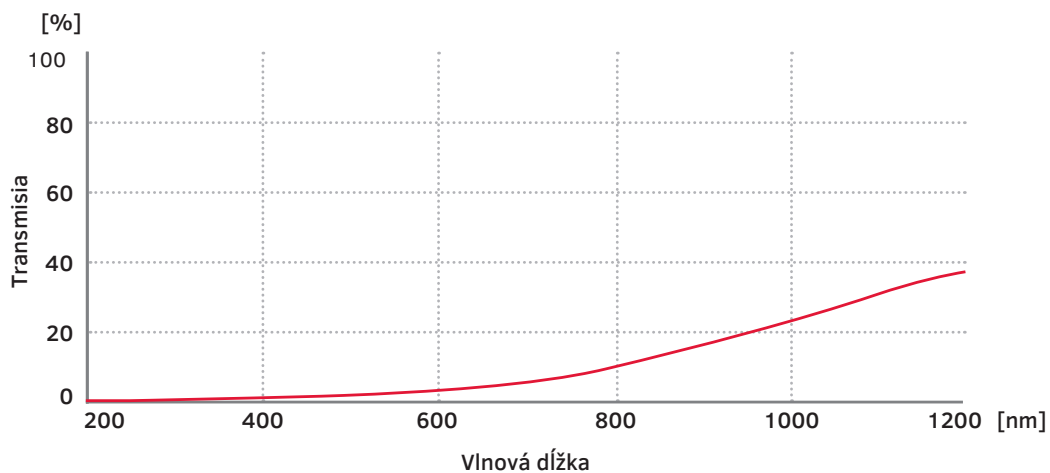

Transmisia na stenu skúmavky S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

S-Monovette® Serum Gel LightPROTECT

Dĺžka/Ø	Farba	Balenie	Objem	Katalógové č.
75 x 13 mm		500/kartón 50/vnútorne balenie	4,0 ml	04.1925.003

SARSTEDT spol. s r. o.

Pri smaltovni 4
851 01 Bratislava
Tel: +421 232 184 930
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com

