

*To make your
workflow excellent.*



Drenáž moču

Produktové riešenia pre individuálnu starostlivosť o pacientov



A06 W



DEHP free



- Bezihlové a ploché miesto odberu
- Pripojenie výmenného vaku s bajonetovým uzáverom
- Univerzálne pripojenie s elastickými popruhmi a dodatočnými držiakmi
- Výmenné vaky sú dostupné v objeme 2.000 ml a 3.000 ml



Presné odčítanie objemu

Presná a jednoducho čitateľná graduácia umožňuje presné odčítanie. Celkový merací objem je 500 ml a jasná a stručná graduácia umožňuje presné meranie veľkých objemov moču. Objemy presahujúce 500 ml sú automaticky odvádzané cez integrovanú prietokovú komôrku a odvádzané do zberného vaku.

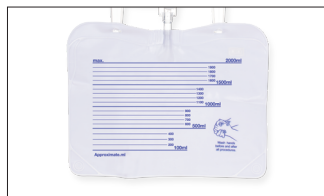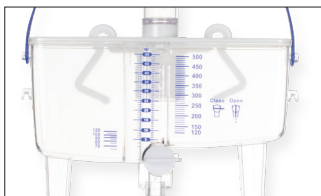

Hygienický a užívateľsky pohodlný výmenný vak

Bajonetový uzáver umožňuje rýchlu a hygienickú výmenu vaku a bezpečné pripojenie k meracej komôrke.

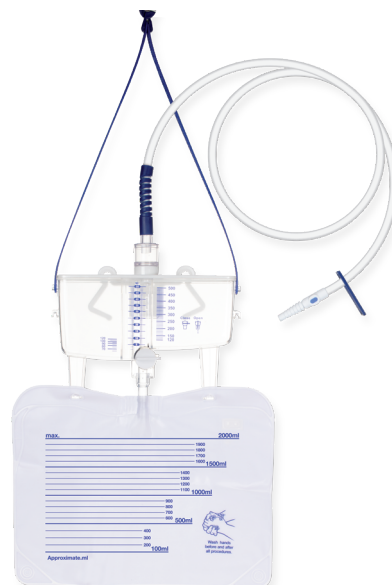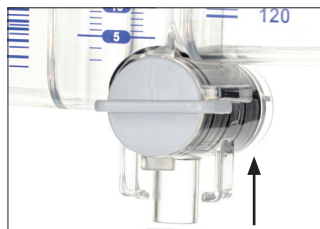

Bezihlový odber vzorky

Bezihlové, ploché miesto odberu pre bezpečnú dezinfekciu a odber vzoriek.



UD 3plus

DEHP free




- Bezihlové a ploché miesto odberu
- Veľký dvojitý držiak
- 2 dĺžky hadičiek: 100 cm a 120 cm
- Objem 2.000 ml

Systém pre imobilných pacientov

Uzavretý drenážny systém pre hygienickú starostlivosť o katetrizovaných pacientov s dlhodobým pobytom na lôžku.

Veľký dvojitý držiak

Veľký dvojitý držiak umožňuje jednoduché a bezpečné pripojenie k zábradliu postele.

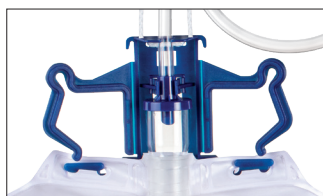


Bezihlový odber vzorky

Bezihlové, ploché miesto odberu pre bezpečnú dezinfekciu a odber vzoriek.



Odkvapkávací komôrka

S hydrofóbnou ventiláciou pre optimálnu kompenzáciu tlaku a prietok moču. Odkvapkávací komôrka umožňuje optimálnu ochranu pred vzostupnou migráciou baktérií. Horizontálny membránový spätný ventil zaisťuje optimálny prietok moču od malých po veľké objemy a zabraňuje refluxu moču bez ohľadu na polohu drenážneho vaku.

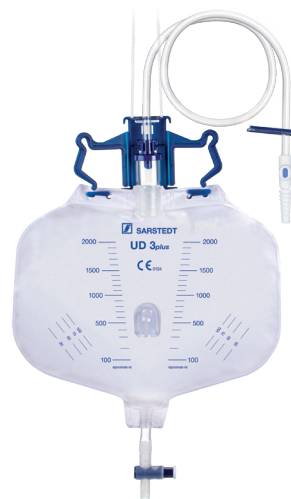

TUR-BAG

DEHP free



- Bezihlové a ploché miesto odberu vzorky
- Dostupný s a bez pumpovacieho balónika
- Objem 4.000 ml

Vak na výplach močového mechúra

Uzavretý močový drenážny systém na pooperačný výplach močového mechúra.

Pumpovací balónik

S pumpovacím balónikom na kontrolovaný pooperačný výplach močového mechúra zvlášť po resekcii prostaty.



Bezihlový odber vzorky

Bezihlové, ploché miesto odberu pre bezpečnú dezinfekciu a odber vzoriek.



Drenážny vak

DEHP free



- Univerzálny krokový konektor s integrovanou prepichovateľnou membránou na odber moču
- Drenážna hadička s veľkým priemerom pre optimálny prietok moču
- Objem 2.000 ml

Drenážny vak pre optimálnu starostlivosť o pacienta

Drenážny vak je vybavený extra silnou fóliou a hydrofóbnym odvetrávaním vaku odolným voči baktériám.

T-výpustný ventil

Jednoducho ovládateľný T-výpustný ventil a účinná ochrana pred kontamináciou



Bezihlový odber vzorky

Bezihlové, ploché miesto odberu pre bezpečnú dezinfekciu a odber vzoriek.



UroStretch



- Bez kontaktu nožného vaku s pokožkou
- Fixácia povrchu nožného vaku po celej dĺžke
- Zníženie zvuku kvapaliny

UroStretch uchytenie nožného vaku

Rúrkový obvaz zo strečovej tkaniny na pripevnenie nožného vaku. Použiteľné so všetkými nožnými vakmi do 750 ml. UroStretch je opakovane použiteľný, umývateľný v teplej vode (40 °C) a ponúka vysoký užívateľský komfort.



Informácie pre objednávanie

Merací systém moču A06 W

Popis	Ks. / Box	REF
Merací systém moču A06 W 500 ml s 2.0 l výmenným vakom bez výpustného ventilu, s elastickými popruhmi a doplnkovými držiakmi, individuálne balený, sterilný	10	74.5681.200
Výmenný vak 2.0 l pre A06 W bez výpustného ventilu, individuálne balený, sterilný	50	74.5684.001
Výmenný vak 3.0 l pre A06 W s výpustným ventilom, individuálne balený, sterilný	50	74.5684.002
Výmenný vak 3.0 l pre A06 W bez výpustného ventilu, individuálne balený, sterilný	50	74.5685.001
Výmenný vak 2.0 l pre A06 W s výpustným ventilom, individuálne balený, sterilný	50	74.5685.002

UD 3plus

Popis	Ks. / Box	REF
UD 3plus merací drenážny systém 2.0 l, s dvojitém držiakom, dĺžka hadičky 100 cm, indiv. balený, sterilný	20	74.5330.500
UD 3plus merací drenážny systém 2.0 l, s dvojitém držiakom, dĺžka hadičky 120 cm, indiv. balený, sterilný	20	74.5330.520

TUR-BAG

Popis	Ks. / Box	REF
TUR-BAG 4.0 l s pumpovacím balónikom, dĺžka hadičky 100 cm, individuálne balený, sterilný	10	74.5340.500
TUR-BAG 4.0 l bez pumpovacieho balónika, dĺžka hadičky 100 cm, individuálne balený, sterilný	20	74.5340.501

Drenážny vak

Popis	Ks. / Box	REF
Drenážny vak 2.0 l, s antirefluxným ventilom, T-výpustou, dĺžka hadičky 100 cm, individuálne balený, sterilný	50	74.5485.005

UroStretch

Popis	Ks. / Box	REF
UroStretch, veľkosť: malá	10	74.5767.001
UroStretch, veľkosť: stredná	10	74.5767.002
UroStretch, veľkosť: veľká	10	74.5767.003
UroStretch, veľkosť: extra veľká	10	74.5767.004

Ak máte otázky,
radi vám pomôžeme!

Navštívte našu webovú stránku:
www.sarstedt.com

SARSTEDT spol. s r. o.

Pri smaltovni 4
851 01 Bratislava

Tel: +421 232 184 930

info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Ďalšie informácie,
videá a rady:
sarstedt.com