

# NFT

## Sistema de toma de muestras de orinas

Recogida de muestras cerrada, higiénica y sin aguja



# NFT Needle Free Transfer

Preanalítica  
de orinas  
2.0

El primer sistema de transferencia de orina SARSTEDT para la recogida de muestras cerrada, higiénica y sin agujas

## Higiénico. Práctico. Seguro.

¿Cómo se pueden realizar la toma de muestra de orina para que sea aún más segura, higiénica y fácil? Los innovadores productos del sistema NFT brindan la respuesta a esta pregunta. Como el primer sistema de extracción de orina cerrado y sin agujas de SARSTEDT, la nueva familia de productos combina las ventajas de los productos existentes en una única solución.


## Nuevos estándares para la preanalítica de orinas



- Disponible como vaso de orina NFT y contenedor de 3 litros NFT para la recogida de orina de 24 horas
- Sistema de extracción sin agujas
- Almacenamiento y transporte seguros
- Transferencia de orina fácil e higiénica con la Monovette® de orina
- No se requiere un contenedor resistente a perforaciones para desechar los productos NFT

### Simplemente práctico

La Monovette® de orina permite la obtención higiénica de la orina y también es adecuada como recipiente de análisis para tiras reactivas, analizadores y como tubo de centrifuga para la recolección de sedimentos

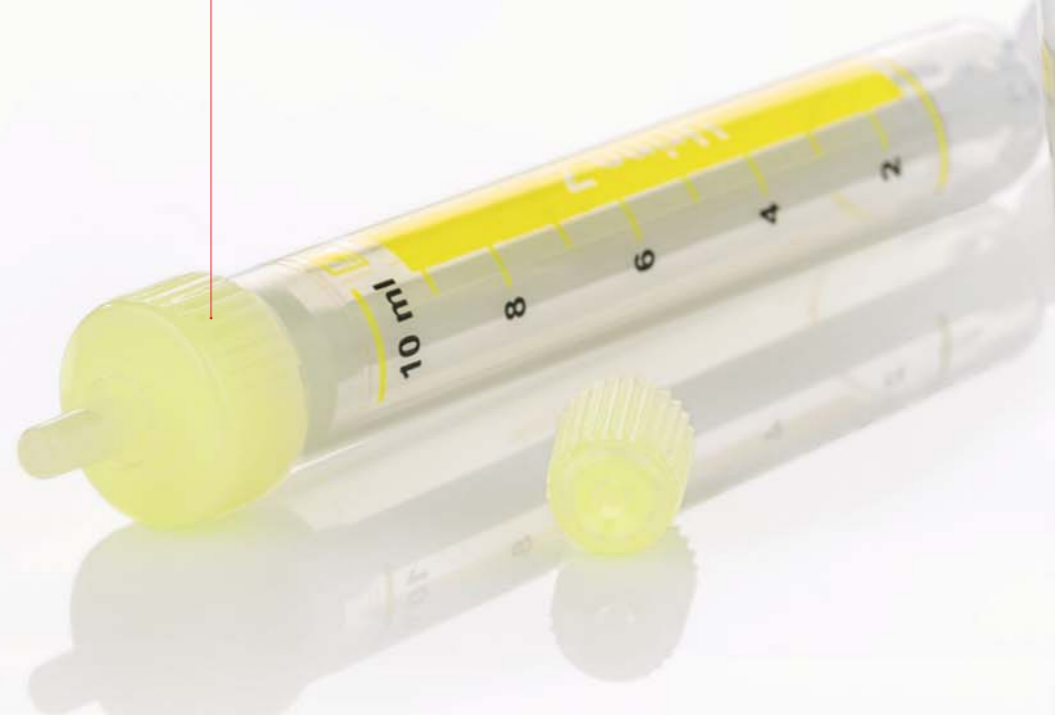


### Novedad

Con la nueva función de extracción, ya no se necesita una aguja. La Monovette® de orina penetra fácilmente en la novedosa membrana NFT.

Tras una cómoda extracción, el acceso se vuelve a cerrar inmediatamente de forma hermética e higiénica, incluso después de varias extracciones.

No hay riesgo de infección debido a una lesión por pinchazo de aguja.

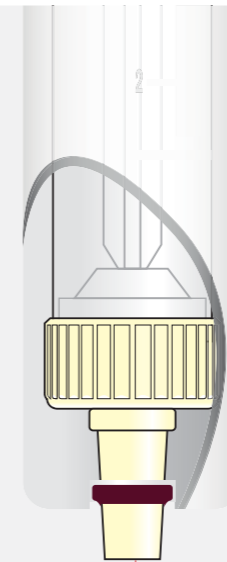

## CONVINCENTE

- ✓ **Riesgo minimizado de lesiones y más seguridad de la aplicación** para el personal y el paciente gracias a la recogida de muestras sin agujas
- ✓ **Ahorro en la eliminación**, ya que los componentes del sistema NFT no tienen que eliminarse por separado



**Estanco y libre de olores**  
Tapón de rosca con unidad de transferencia

**Sellado**  
La etiqueta de seguridad indica la esterilidad interna del vaso de orina NFT cuando está intacto

**Transparencia**  
Recipiente altamente transparente fabricado en robusto polipropileno (PP) para una buena evaluación visual

**Innovador**  
Unidad de transferencia sin aguja con membrana NFT perforable



# NFT

## Sistema de extracción de orina

La mejor combinación de diferentes sistemas

El sistema NFT con Monovette® de orina, vaso de orina y contenedor de recogida de orina garantiza unas condiciones de trabajo higiénicas durante todo el proceso de recogida de muestras:

- Con la Monovette® de orina y la punta cánula de aspiración, puede llevar a cabo el proceso de recogida sin agujas, incluso con una cantidad de llenado muy pequeña. No se requiere una unidad de transferencia separada como en los sistemas de vacío.
- El manejo es intuitivo y puede aprender rápidamente y sin mucho esfuerzo de formación.
- Con la Monovette® de orina, el proceso de extracción se puede repetir, si fuera necesario, gracias al principio de aspiración; no existe el riesgo de pérdida de función por una aplicación incorrecta.
- Gracias a la sofisticada función de extracción sin aguja, se minimiza el riesgo de lesiones para el personal y los pacientes.
- Después de la extracción, los productos del sistema NFT no tienen que desecharse por separado; esto ahorra tiempo y dinero en comparación con los productos con una aguja integrada.

### Sofisticado

El contenedor de recogida de orina NFT con un volumen de 3.000 ml, asa ergonómica, gran diámetro de apertura y mirilla transparente graduada en intervalos de 100 ml



### Monovette® de orina – trabajo higiénico con poca manipulación

- La Monovette® de orina permite la recogida de muestras higiénica y sin agujas en los recipientes de recogida o en los sistemas de drenaje de orina.
- Se puede realizar un análisis directamente en la Monovette® de orina con tiras reactivas disponibles en el mercado.
- La Monovette® de orina es adecuada para el transporte y el envío de acuerdo con las regulaciones de embalaje P650 de ADR e IATA. Se puede utilizar en la centrifuga para extracción de sedimentos y en analizadores.



### Manipulación sencilla: Vaso de orina NFT



### Cómodo para la recogida de orina 24 horas: contenedor de recogida de orina NFT



Incluso con el contenedor de recogida de orina NFT de gran volumen, la toma de muestras sigue siendo higiénica gracias a la función de recogida cerrada.



Consulte el tutorial sobre cómo manejar fácilmente los productos NFT:  
sarstedt.com/nft-tu-es

SOLICITE UNA  
MUESTRA DE  
PRODUCTO  
GRATUITA



sarstedt.com/nft-sa-es



Con el sistema de extracción de orina NFT, SARSTEDT establece nuevos estándares

Solo una recogida limpia y correcta de las muestras garantiza unos resultados analíticos correctos. Los productos del sistema NFT de SARSTEDT establecen estándares para los preanálisis rutinarios y minuciosos en relación con la máxima seguridad para usuarios y pacientes.



Los productos NFT no necesitan desecharse en - contenedores de eliminación punzocortantes.

## Flujo de trabajo preanalítico diseñado por SARSTEDT

Aproveche la sinergia de nuestros sistemas coordinados.

Descubra las soluciones 360° para su preanalítica con SARSTEDT

workflow.sarstedt.com



### Vaso de orina NFT 100 ml

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	con etiqueta de seguridad y unidad de transferencia	esterilizado	200 / 200

### Contenedor de recogida de orina NFT 3,0 l

Referencia	Volumen	L x A x H	Versión	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
77.575.900	3.000 ml	125 x 130 x 246 mm	con unidad de transferencia y etiqueta del paciente, diámetro de apertura 80 mm	-	30 / 30

### Monovette® Z de orina; sin preparación

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión (amarillo)	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel, para escritura	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, con protección contra la luz	-	64 / 512

### Monovette® de orina con ácido bórico; con estabilizador para estudios microbiológicos

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión (verde)	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
10.256*	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de plástico, transparente	-	64 / 512
10.256.020*	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico para escritura, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500

Encontrará más consumibles para la preanalítica de orinas en [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

\*Nueva introducción prevista 1.º trimestre de 2024

## SARSTEDT S.A.U.

Camí de Can Grau, 24  
Pol. Ind. Valldoriolf  
08430 La Roca del Vallès

Tel.: +34 93 846 41 03

Fax: +34 93 846 39 78

info.es@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Más información, vídeos  
y pedido de muestras:  
[sarstedt.com/nft-es](http://sarstedt.com/nft-es)

Si tiene alguna duda,  
estaremos encantados de atenderle.

Visite también nuestro sitio web: [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)