

# NFT

## Система сбора мочи

Гигиеничное взятие образцов с помощью закрытой безыгольной системы



# NFT Needle Free Transfer

Преаналитика  
мочи  
2.0

Первая система сбора мочи от SARSTEDT для гигиеничного и безыгольного взятия образцов

## Гигиенично. Практично. Надежно.

Как сделать процесс сбора мочи еще безопаснее, гигиеничнее и удобнее? Ответ на этот вопрос дает инновационная продукция системы NFT. Первая закрытая и безыгольная система сбора мочи от SARSTEDT, представляющая собой новую серию продукции, сочетает в себе преимущества уже существующих продуктов в одном решении.

## Новый стандарт в сфере преаналитики мочи



- Система доступна в виде контейнера NFT для сбора мочи, а также контейнера NFT для сбора суточной мочи объемом 3 л
- Безыгольная система сбора мочи
- Безопасность хранения и транспортировки
- Удобный и гигиеничный перенос мочи с помощью Urin-Monovette®
- Для утилизации продуктов NFT не требуется контейнер для утилизации острых предметов


### Удобно и практично

Urine-Monovette® обеспечивает гигиеничный сбор мочи, а также используется в качестве основной пробирки в анализаторах, пробирки для получения осадка и пригодна для погружения в нее тест-полосок

### Новинка

Благодаря новой функции безыгольного взятия образцов игла больше не требуется. Urin-Monovette® легко проходит через инновационную мембрану NFT.

После удобного взятия образца система плотно и гигиенично закрывается даже после сбора нескольких образцов. Риск инфицирования от укола иглой отсутствует.

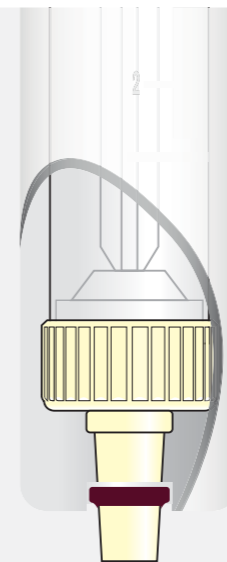

## УБЕДИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ

- ✓ **Минимальный риск травм и повышенная безопасность применения** для персонала и пациентов благодаря безыгольному взятию проб
- ✓ **Экономия при утилизации** — компоненты системы NFT не требуют отдельной утилизации в контейнеры для острых предметов

**Непроницаемость для жидкости и запаха**  
Резьбовая крышка с устройством для переноса

**Герметичность**  
При отсутствии повреждений защитная этикетка указывает на стерильность контейнера NFT для сбора мочи

**Прозрачность**  
Высокопрозрачный контейнер из прочного полипропилена для точной визуальной оценки

**Инновационность системы**  
Безыгольное устройство для переноса с прокалываемой мембраной NFT

# NFT

## Система сбора мочи

Лучшее от разных систем

Система NFT с Urin-Monovette®, контейнером NFT для сбора мочи и контейнером NFT для сбора суточной мочи обеспечивает гигиеничность работы на протяжении всего процесса взятия образцов:

- С помощью Urin-Monovette® и прилагаемого аспирационного наконечника Вы можете осуществлять безыгольное взятие образцов даже при очень малом объеме заполнения. В отличие от вакуумных систем отдельное устройство для переноса не требуется.
- Интуитивно понятному использованию можно научиться быстро и без значительных усилий.
- При использовании Urin-Monovette® принцип аспирации позволяет при необходимости повторить процесс сбора - нет риска потери функциональности при многократном использовании.
- Благодаря продуманной безыгольной функции взятия образцов риск травмирования персонала и пациентов сведен к минимуму.
- После взятия образцов продукцию системы NFT не нужно утилизировать отдельно — это экономит время и деньги по сравнению с изделиями со встроенной иглой.

### Продуманность конструкции

Контейнер NFT для сбора суточной мочи объемом 3000 мл с эргономичной ручкой, отверстием с большим диаметром и прозрачным смотровым окошком со шкалой с шагом 100 мл



### Urin-Monovette® — гигиеничная работа всего за несколько шагов

- Система Urin-Monovette® обеспечивает гигиеничное безыгольное взятие образцов из контейнеров для сбора или систем дренажа мочи.
- Анализ мочи с использованием имеющихся в продаже тест-полосок можно проводить непосредственно в заполненной системе Urin-Monovette®.
- Система Urin-Monovette® подходит для транспортировки и сортировки в соответствии с предписаниями по упаковке P650 ADR и IATA. Ее можно использовать для получения осадка в центрифуге и анализаторах.



### Удобство для пользователя: контейнер NFT для сбора мочи



### Удобное решение для суточного сбора мочи: контейнер NFT для суточного сбора мочи



Даже при использовании большого контейнера NFT для суточного сбора мочи получение образцов остается гигиенически чистой процедурой благодаря закрытой конструкции системы.



Ознакомьтесь с руководством по обращению с продукцией NFT: [sarstedt.com/nft-tu-ru](http://sarstedt.com/nft-tu-ru)

ЗАКАЖИТЕ  
ОБРАЗЕЦ  
ПРОДУКЦИИ  
БЕСПЛАТНО



sarstedt.com/nft-sa-ru



SARSTEDT устанавливает новые стандарты с помощью системы NFT сбора мочи

Только аккуратный и точный сбор проб может обеспечить достоверность результатов анализа. Продукты системы NFT от SARSTEDT устанавливают новый стандарт повседневной преаналитики в сочетании с максимальной безопасностью как для пользователя, так и для пациента.



Отдельная утилизация продукции NFT не требуется.

## Преаналитический рабочий процесс от компании SARSTEDT

Воспользуйтесь эффективностью совместного использования наших скоординированных систем.

Откройте для себя комплексные решения для преаналитики от SARSTEDT

workflow.sarstedt.com



### Контейнер NFT для сбора мочи 100 мл

Кат. №	Объем	Д x Ø	Исполнение	Чистота	Упаковка (внутр./внеш. уп.)
75.562.900	100 мл	72 x 62 мм	с защитной этикеткой и устройством для переноса	стерильн.	200 / 200

### Контейнер NFT для суточного сбора мочи

Кат. №	Объем	Д x Ш x В	Исполнение	Чистота	Упаковка (внутр./внеш. уп.)
77.575.900	3000 мл	125 x 130 x 246 мм	с устройством для переноса и этикеткой с данными пациента, диаметр отверстия 80 мм	–	30 / 30

### Urin-Monovette® Z – без добавок

Кат. №	Объем	Д x Ø	Исполнение (желтого цвета)	Чистота	Упаковка (внутр./внеш. уп.)
10.250.001	3,2 мл	75 x 13 мм	Бумажная этикетка для записи данных	–	64 / 512
10.258	8,5 мл	92 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная	–	64 / 512
10.258.001	8,5 мл	92 x 15 мм	Бумажная этикетка для записи данных	–	64 / 512
10.258.020	8,5 мл	92 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500
10.252	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная	–	64 / 512
10.252.001	10 мл	102 x 15 мм	Бумажная этикетка для записи данных	–	64 / 512
10.252.020	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500
10.252.030	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, со светозащитой	–	64 / 512

### Urin-Monovette® с борной кислотой – со стабилизатором для микробиологических исследований

Кат. №	Объем	Д x Ø	Исполнение (зеленого цвета)	Чистота	Упаковка (внутр./внеш. уп.)
10.256*	3,2 мл	75 x 13 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная	–	64 / 512
10.256.020*	3,2 мл	75 x 13 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500
10.253	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная	–	64 / 512
10.253.001	10 мл	102 x 15 мм	Бумажная этикетка для записи данных	–	64 / 512
10.253.020	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500
10.253.021	10 мл	102 x 15 мм	Бумажная этикетка для записи данных, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500

Другие расходные материалы для преаналитики мочи см. на сайте [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

\*Вывод на рынок запланирован на 1-й кв. 2024 г

## ООО «САРШТЕДТ»

198517, Россия,

г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,

ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1

Тел: +7 495 937 52 28

[info.ru@sarstedt.com](mailto:info.ru@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Другая информация,  
видео и заказ образцов  
[sarstedt.com/nft-ru](http://sarstedt.com/nft-ru)

Если у Вас есть вопросы, мы будем  
рады Вам помочь!

Посетите наш сайт [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)