

NFT

Sistema di prelievo dell'urina

Prelievo igienico, chiuso, senza ago



NFT Needle Free Transfer

Il primo sistema di prelievo dell'urina SARSTEDT per il prelievo di campioni igienico e senza ago

Preanalitica
urinaria
2.0

Igienico. Pratico. Sicuro.

In che modo è possibile rendere il prelievo di campioni di urina ancora più sicuro, igienico e semplice? La risposta a questa domanda risiede negli innovativi prodotti del sistema NFT. Quale primo sistema per il prelievo di urina chiuso e senza aghi SARSTEDT, questa nuova gamma unisce i pregi dei prodotti precedenti in un'unica soluzione.

Nuovi standard per la preanalitica urinaria



- Disponibile sotto forma di bicchiere per urina NFT e anche di contenitore NFT da 3 litri per la raccolta delle urine delle 24 ore
- Sistema di prelievo senza aghi
- Conservazione e trasporto sicuri
- Trasferimento dell'urina semplice e igienico con Monovette® urina
- Nessuna necessità di contenitori ermetici per lo smaltimento dei prodotti NFT

Semplicemente pratico


Monovette® urina consente il prelievo igienico dell'urina e la soluzione è idonea come contenitore analitico per strisce reattive e analizzatori, nonché come provetta per la centrifugazione per l'ottenimento di sedimenti

Novità

Con la nuova funzionalità di prelievo, non è più necessario alcun ago. Monovette® urina penetra facilmente la nuova membrana NFT.

Dopo il comodo prelievo, l'apertura viene immediatamente richiusa in modo igienico ed ermetico, anche dopo diversi prelievi.

Non sussiste alcun rischio di infezione dovute a punture accidentali con aghi.

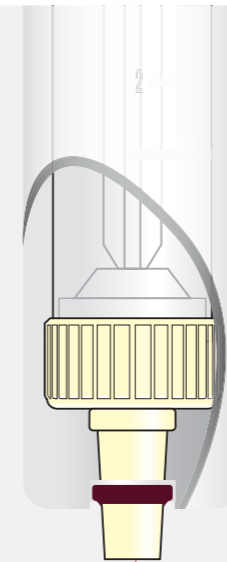

CONVINCENTE

- ✓ **Rischio di lesioni ridotto al minimo** e **maggiore sicurezza operativa** per il personale e i pazienti mediante il prelievo senza ago
- ✓ **Risparmio durante lo smaltimento**, in quanto i componenti del sistema NFT non devono essere smaltiti separatamente in contenitori ermetici

A tenuta stagna per liquidi e odori

Tappo a vite con unità di trasferimento

Sigillo

L'etichetta di sicurezza integra indica la sterilità interna del bicchiere per urina NFT

Materiale trasparente

Contenitore a trasparenza elevata in robusto polipropilene (PP) per una buona valutazione visiva

Innovativo

Unità di trasferimento senza ago con membrana NFT perforabile

NFT

Sistema di prelievo dell'urina

Il meglio dei diversi sistemi

Il sistema NFT con Monovette® urina, bicchiere per urina NFT e contenitore NFT per la raccolta delle urine garantisce condizioni di lavoro igieniche durante l'intera procedura di prelievo del campione:

- Con Monovette® urina e l'estremità aspirante in dotazione, è possibile eseguire la procedura di prelievo senza ago anche in presenza di livelli di riempimento molto ridotti. Non è necessaria un'unità di trasferimento separata come per i sistemi sottovuoto.
- La procedura risulta intuitiva e rapida e può essere appresa senza una formazione impegnativa.
- Grazie al principio di aspirazione, con Monovette® urina è possibile ripetere la procedura di prelievo in caso di necessità: non vi è alcun pericolo di perdita di funzionalità a causa di utilizzi errati.
- Con la sofisticata funzionalità di prelievo senza ago, il rischio di lesioni a carico del personale e dei pazienti risulta ridotto.
- Dopo il prelievo, non è necessario smaltire i prodotti del sistema NFT separatamente in contenitori ermetici: ciò consente di risparmiare tempo e denaro rispetto ai prodotti con aghi integrati.

Sofisticato

Contenitore NFT per la raccolta delle urine con un volume di 3.000 ml, impugnatura ergonomica, apertura dal diametro ampio e finestra trasparente con graduazione a tacche da 100 ml



Monovette® urina: lavoro igienico in poche mosse

- Monovette® urina consente il prelievo igienico e senza ago dei campioni da contenitori per la raccolta delle urine o da sistemi di drenaggio delle urine.
- È possibile eseguire l'analisi delle urine con strisce reattive di uso comune direttamente nella Monovette® urina.
- Monovette® urina è idonea al trasporto e alla spedizione secondo la direttiva di imballaggio P650 di ADR e IATA. Può essere utilizzata per il prelievo del sedimento nella centrifuga e negli analizzatori.



Manipolazione del campione: bicchiere per urina NFT



Comoda raccolta delle urine nelle 24 ore: contenitore NFT per la raccolta delle urine



Anche con il contenitore NFT per la raccolta delle urine di volume elevato, il prelievo del campione resta un'operazione igienica grazie alla funzione di prelievo chiusa.



Per una gestione semplice dei prodotti NFT, guardare il tutorial: sarstedt.com/nft-tu-it

ORDINATE GRATUITAMENTE UN CAMPIONE DEL PRODOTTO



sarstedt.com/nft-sa-it



Con il sistema di prelievo delle urine NFT, SARSTEDT stabilisce nuovi standard

Solo una raccolta corretta e igienica dei campioni garantisce risultati di analisi esatti. I prodotti del sistema NFT SARSTEDT stabiliscono nuovi standard per la preanalitica meticolosa e di routine, nella massima sicurezza per operatori e pazienti.



Non è necessario smaltire i prodotti NFT separatamente in contenitori ermetici.

Workflow preanalitico made by SARSTEDT

Approfittate della sinergia dei nostri sistemi.

Scoprite le soluzioni a 360° per la preanalitica di SARSTEDT

workflow.sarstedt.com



Bicchieri per urina NFT da 100 ml

N. d'ordine	Volume	L x Ø	Versione	Purezza	Confezione (int./est.)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	con etichetta di sicurezza e unità di trasferimento	sterile	200 / 200

Contenitore NFT per la raccolta delle urine da 3,0 l

N. d'ordine	Volume	L x P x H	Versione	Purezza	Confezione (int./est.)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	con unità di trasferimento ed etichetta per il paziente, apertura di diametro 80 mm	-	30 / 30

Monovette® urina Z, senza preparazione

N. d'ordine	Volume	L x Ø	Versione (giallo)	Purezza	Confezione (int./est.)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Etichetta di carta, con area di scrittura	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Etichetta di plastica, trasparente	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Etichetta di carta, con area di scrittura	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Etichetta di plastica, trasparente, confezionata in blister singolo	sterile	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Etichetta di plastica, trasparente	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Etichetta di carta, con area di scrittura	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Etichetta di plastica, trasparente, confezionata in blister singolo	sterile	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Etichetta di plastica, trasparente, con fotoprotezione	-	64 / 512

Monovette® urina con acido bórico, con stabilizzatore per analisi microbiologiche

N. d'ordine	Volume	L x Ø	Versione (verde)	Purezza	Confezione (int./est.)
10.256*	3,2 ml	75 x 13 mm	Etichetta di plastica, trasparente	-	64 / 512
10.256.020*	3,2 ml	75 x 13 mm	Etichetta di plastica, trasparente, confezionata in blister singolo	sterile	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Etichetta di plastica, trasparente	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Etichetta di carta, con area di scrittura	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Etichetta di plastica, trasparente, confezionata in blister singolo	sterile	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Etichetta di carta, con area di scrittura, confezionata in blister singolo	sterile	100 / 500

Ulteriori materiali di consumo per la preanalitica urinaria sono disponibili su www.sarstedt.com

*Nuova introduzione prevista per il 1° trimestre del 2024

SARSTEDT S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel.: +39 02 38292413

Fax: +39 02 38292380

info.it@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Ulteriori informazioni,
video e ordine dei campioni:
sarstedt.com/nft-it

In caso di domande,
siamo a disposizione!

Visitate anche la nostra pagina Internet: www.sarstedt.com