

# NFT

## Sistema de toma de muestras de orinas

Recolección de muestras cerrada, higiénica y sin aguja



# NFT Needle Free Transfer

El primer sistema de transferencia de orina SARSTEDT para la recolección de muestras cerrada, higiénica y sin agujas

Preanalítica  
de orinas  
**2.0**

## Higiénico. Práctico. Seguro.


¿Cómo se pueden realizar la toma de muestra de orina para que sea aún más segura, higiénica y fácil? Los innovadores productos del sistema NFT brindan la respuesta a esta pregunta. Como el primer sistema de extracción de orina cerrado y sin agujas de SARSTEDT, la nueva familia de productos combina las ventajas de los productos existentes en una única solución.

## Nuevos estándares para la preanalítica de orinas

- Disponible como vaso de orina NFT y contenedor de 3 litros NFT para la recolección de orina de 24 horas
- Sistema de extracción sin agujas
- Almacenamiento y transporte seguros
- Transferencia de orina fácil e higiénica con el Monovette® de orina
- No se requiere un contenedor resistente a perforaciones para desechar los productos NFT

### Simplemente práctico

El Monovette® de orina permite la obtención higiénica de la orina y también es adecuada como recipiente de análisis para tiras reactivas, analizadores y como tubo de centrifuga para la recolección de sedimentos

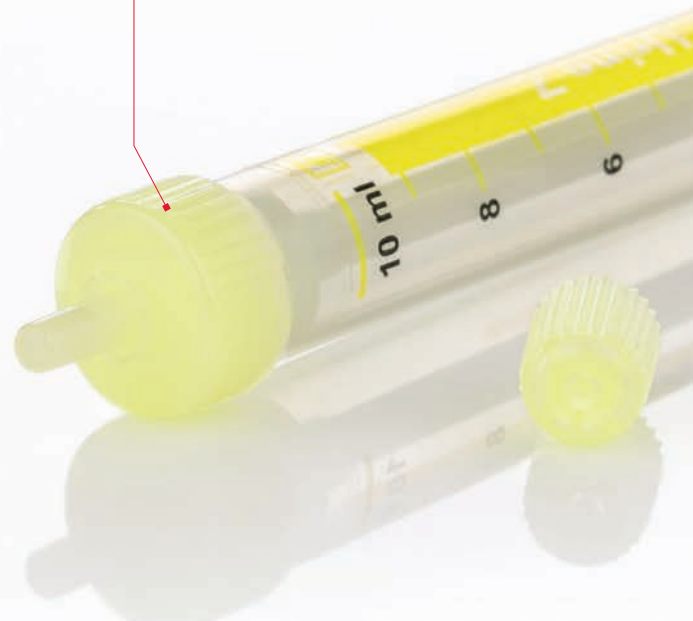


## Novedad

Con la nueva función de extracción, ya no se necesita una aguja. El Monovette® de orina penetra fácilmente en la novedosa membrana NFT.

Tras una cómoda extracción, el acceso se vuelve a cerrar inmediatamente de forma hermética e higiénica, incluso después de varias extracciones.

No hay riesgo de infección debido a una lesión por pinchazo de aguja.

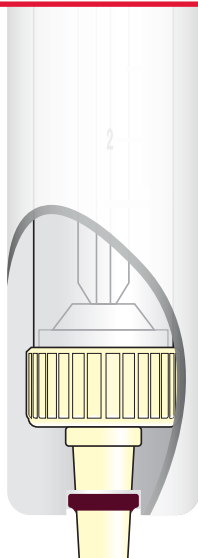

## CONVINCENTE

- > **Riesgo minimizado de lesiones y más seguridad de la aplicación** para el personal y el paciente gracias a la recolección de muestras sin agujas
- > **Ahorro en la eliminación**, ya que los componentes del sistema NFT no tienen que eliminarse por separado



**Estanco y libre de olores**  
Tapón de rosca con unidad de transferencia

**Sellado**  
La etiqueta de seguridad indica la esterilidad interna del vaso de orina NFT cuando está intacto

**Transparencia**  
Recipiente altamente transparente fabricado en robusto polipropileno (PP) para una buena evaluación visual

**Innovador**  
Unidad de transferencia sin aguja con membrana NFT perforable

# NFT

## Sistema de extracción de orina

La mejor combinación de diferentes sistemas

El sistema NFT con Monovette® de orina, vaso de orina y contenedor de recolección de orina garantiza unas condiciones de trabajo higiénicas durante todo el proceso de manipulación de muestras:

- Con el Monovette® de orina y la punta cánula de aspiración, puede llevar a cabo el proceso de recolección sin agujas, incluso con una cantidad de muestra muy pequeña. No se requiere una unidad de transferencia separada como en los sistemas de vacío.
- El manejo es intuitivo y puede aprender rápidamente y sin mucha capacitación.
- Con el Monovette® de orina, el proceso de extracción se puede repetir, si fuera necesario, gracias al principio de aspiración; no existe el riesgo de pérdida de función por una aplicación incorrecta.
- Gracias a la sofisticada función de extracción sin aguja, se minimiza el riesgo de lesiones para el personal y los pacientes.
- Después de la extracción, los productos del sistema NFT no tienen que desecharse por separado; esto ahorra tiempo y dinero en comparación con los productos con una aguja integrada.

### Sofisticado

El contenedor de recolección de orina NFT con un volumen de 3,000 ml, asa ergonómica, gran diámetro de apertura y mirilla transparente graduada en intervalos de 100 ml



## Monovette® de orina – trabajo higiénico con poca manipulación

- El Monovette® de orina permite la manipulación de muestras higiénica y sin agujas en los recipientes de recolección o en los sistemas de drenaje de orina.
- Se puede realizar un análisis directamente en el Monovette® de orina con tiras reactivas disponibles en el mercado.
- El Monovette® de orina es adecuada para el transporte y el envío de acuerdo con las regulaciones de embalaje P650 de ADR e IATA. Se puede utilizar en la centrifuga para extracción de sedimentos y en analizadores.



## Manipulación sencilla: Vaso de orina NFT



## Cómodo para la recolección de orina 24 horas: contenedor de recolección de orina NFT



Incluso con el contenedor de recolección de orina NFT de gran volumen, la toma de muestras sigue siendo higiénica gracias a la función de manipulación cerrada.



Consulte el tutorial sobre cómo manejar fácilmente los productos NFT: [sarstedt.com/nft-tu-mx](http://sarstedt.com/nft-tu-mx)

## SOLICITE UNA MUESTRA DE PRODUCTO GRATUITA



[sarstedt.com/nft-sa-mx](http://sarstedt.com/nft-sa-mx)



### Con el sistema de extracción de orina NFT, SARSTEDT establece nuevos estándares

Solo una recolección limpia y correcta de las muestras garantiza unos resultados analíticos correctos. Los productos del sistema NFT de SARSTEDT establecen estándares para los preanálisis rutinarios y minuciosos en relación con la máxima seguridad para usuarios y pacientes.



Los productos NFT no necesitan desecharse en – contenedores de eliminación punzocortantes.

## Flujo de trabajo preanalítico diseñado por SARSTEDT

Aproveche la sinergia de nuestros sistemas coordinados.



Descubra las soluciones 360° para su preanalítica con SARSTEDT  
[sarstedt.com/nft-wf-mx](http://sarstedt.com/nft-wf-mx)

## Vaso de orina NFT 100 ml

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	con etiqueta de seguridad y unidad de transferencia	esterilizado	5 / 200

## Contenedor de recogida de orina NFT 3,0 l

Referencia	Volumen	L x A x H	Versión	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
77.575.900	3.000 ml	125 x 130 x 246 mm	con unidad de transferencia y etiqueta del paciente, diámetro de apertura 80 mm	-	30 / 30

## Monovette® Z de orina

sin preparación

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión (amarillo)	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, con protección contra la luz	-	64 / 512

## Monovette® de orina con ácido bórico

con estabilizador para estudios microbiológicos

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión (verde)	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
10.256.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.256.021	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel para escritura, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.260.001*	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.260.021*	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500

Encontrará más consumibles para la preanalítica de orinas en [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

\* Nueva introducción prevista 2.º trimestre de 2024

Si tiene alguna duda, estaremos encantados de atenderle.

Visite también nuestro sitio web: [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

## **SARSTEDT México S. de R.L. de C.V.**

Alfredo B Nobel 3, Bodega 10  
Colonia Los Reyes Industrial  
54073 Tlalnepantla de Baz  
Estado de México

Tel: +5255 8501 1577

Fax: +5255 8501 1578

[info.mx@sarstedt.com](mailto:info.mx@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Más información, vídeos  
y pedido de muestras:  
[sarstedt.com/nft-mx](http://sarstedt.com/nft-mx)