

# NFT

## Система сбора мочи

Гигиеничное взятие образцов с помощью закрытой  
безыгольной системы



# NFT

## Needle Free Transfer

Первая система сбора мочи от SARSTEDT для гигиеничного и безыгольного взятия образцов

Преаналитика  
мочи  
**2.0**

### Гигиенично. Практично. Надежно.

Как сделать процесс сбора мочи еще безопаснее, гигиеничнее и удобнее? Ответ на этот вопрос дает инновационная продукция системы NFT. Первая закрытая и безыгольная система сбора мочи от SARSTEDT, представляющая собой новую серию продукции, сочетает в себе преимущества уже существующих продуктов в одном решении.

### Новый стандарт в сфере преаналитики мочи

- Система доступна в виде контейнера NFT для сбора мочи, а также контейнера NFT для сбора суточной мочи объемом 3 л
- Безыгольная система сбора мочи
- Безопасность хранения и транспортировки
- Удобный и гигиеничный перенос мочи с помощью Urin-Monovette®
- Для утилизации продуктов NFT не требуется контейнер для утилизации острых предметов

### Удобно и практично

Urine-Monovette® обеспечивает гигиеничный сбор мочи, а также используется в качестве основной пробирки в анализаторах, пробирки для получения осадка и пригодна для погружения в нее тест-полосок




## Новинка

Благодаря новой функции безыгольного взятия образцов игла больше не требуется. Urin-Monovette® легко проходит через инновационную мембрану NFT.

После удобного взятия образца система плотно и гигиенично закрывается даже после сбора нескольких образцов.

Риск инфицирования от укола иглой отсутствует.

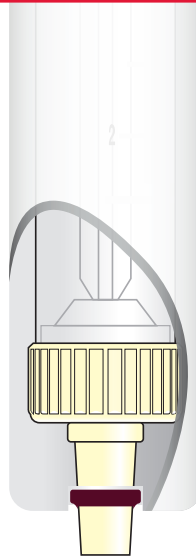

## УБЕДИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ

- **Минимальный риск травм и повышенная безопасность применения** для персонала и пациентов благодаря безыгольному взятию проб
- **Экономия при утилизации** – компоненты системы NFT не требуют отдельной утилизации в контейнеры для острых предметов



**Непроницаемость для жидкости и запаха**  
Резьбовая крышка с устройством для переноса

**Герметичность**  
При отсутствии повреждений защитная этикетка указывает на стерильность контейнера NFT для сбора мочи

**Прозрачность**  
Высокопрозрачный контейнер из прочного полипропилена для точной визуальной оценки

**Инновационность системы**  
Безыгольное устройство для переноса с прокалываемой мембраной NFT

# NFT

## Система сбора мочи

Лучшее от разных систем

Система NFT с Urin-Monovette®, контейнером NFT для сбора мочи и контейнером NFT для сбора суточной мочи обеспечивает гигиеничность работы на протяжении всего процесса взятия образцов:

- С помощью Urin-Monovette® и прилагаемого аспирационного наконечника Вы можете осуществлять безыгольное взятие образцов даже при очень малом объеме заполнения. В отличие от вакуумных систем отдельное устройство для переноса не требуется.
- Интуитивно понятному использованию можно научиться быстро и без значительных усилий.
- При использовании Urin-Monovette® принцип аспирации позволяет при необходимости повторить процесс сбора - нет риска потери функциональности при многократном использовании.
- Благодаря продуманной безыгольной функции взятия образцов риск травмирования персонала и пациентов сведен к минимуму.
- После взятия образцов продукцию системы NFT не нужно утилизировать отдельно — это экономит время и деньги по сравнению с изделиями со встроенной иглой.

### Продуманность конструкции

Контейнер NFT для сбора суточной мочи объемом 3000 мл с эргономичной ручкой, отверстием с большим диаметром и прозрачным смотровым окошком со шкалой с шагом 100 мл



## Urine-Monovette® – гигиеничная работа всего за несколько шагов

- Система Urin-Monovette® обеспечивает гигиеничное безыгольное взятие образцов из контейнеров для сбора или систем дренажа мочи.
- Анализ мочи с использованием имеющихся в продаже тест-полосок можно проводить непосредственно в заполненной системе Urin-Monovette®.
- Система Urin-Monovette® подходит для транспортировки и сортировки в соответствии с предписаниями по упаковке Р650 ADR и IATA. Ее можно использовать для получения осадка в центрифуге и анализаторах.



## Удобство для пользователя: контейнер NFT для сбора мочи



## Удобное решение для суточного сбора мочи: контейнер NFT для суточного сбора мочи



Даже при использовании большого контейнера NFT для суточного сбора мочи получение образцов остается гигиенически чистой процедурой благодаря закрытой конструкции системы.



Ознакомьтесь с  
руководством по  
обращению с  
продукцией NFT:  
[sarstedt.com/nft-tu-ru](http://sarstedt.com/nft-tu-ru)



## ЗАКАЖИТЕ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ БЕСПЛАТНО



[sarstedt.com/nft-sa-ru](https://sarstedt.com/nft-sa-ru)



### SARSTEDT устанавливает новые стандарты с помощью системы NFT сбора мочи

Только аккуратный и точный сбор проб может обеспечить достоверность результатов анализа. Продукты системы NFT от SARSTEDT устанавливают новый стандарт повседневной преаналитики в сочетании с максимальной безопасностью как для пользователя, так и для пациента.



Отдельная утилизация продукции NFT не требуется.

## Преаналитический рабочий процесс от компании SARSTEDT

Воспользуйтесь эффективностью совместного использования наших скоординированных систем.

Безопасное архивирование

Оптимальное качество образцов



Pre Analytical Workflow

Прямая транспортировка

Автоматическая сортировка и распределение



Откройте для себя комплексные решения для преаналитики от SARSTEDT  
[sarstedt.com/nft-wf-ru](https://sarstedt.com/nft-wf-ru)

## Контейнер NFT для сбора мочи 100 мл

| Кат. №     | Объем  | Д x Ø      | Исполнение                                      | Чистота   | Упаковка (внутр./внеш. уп.) |
|------------|--------|------------|---|-----------|-----------------------------|
| 75.562.900 | 100 мл | 72 x 62 мм | с защитной этикеткой и устройством для переноса | стерильн. | 5 / 200                     |

## Контейнер NFT для суточного сбора мочи 3,0 л

| Кат. №     | Объем   | Д x Ш x В          | Исполнение   | Чистота | Упаковка (внутр./внеш. уп.) |
|------------|---------|--------------------|--|---------|-----------------------------|
| 77.575.900 | 3000 мл | 125 x 130 x 246 мм | с устройством для переноса и этикеткой с данными пациента, диаметр отверстия 80 мм | –       | 30 / 30                     |

## Urin-Monovette® Z

без добавок

| Кат. №     | Объем  | Д x Ø       | Исполнение (желтого цвета)                            | Чистота   | Упаковка (внутр./внеш. уп.) |
|------------|--------|-------------|---|-----------|-----------------------------|
| 10.250.001 | 3.2 мл | 75 x 13 мм  | Бумажная этикетка для записи данных                   | –         | 64 / 512                    |
| 10.258     | 8.5 мл | 92 x 15 мм  | Пластиковая этикетка, прозрачная                      | –         | 64 / 512                    |
| 10.258.001 | 8.5 мл | 92 x 15 мм  | Бумажная этикетка для записи данных                   | –         | 64 / 512                    |
| 10.258.020 | 8.5 мл | 92 x 15 мм  | Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере | стерильн. | 100 / 500                   |
| 10.252     | 10 мл  | 102 x 15 мм | Пластиковая этикетка, прозрачная                      | –         | 64 / 512                    |
| 10.252.001 | 10 мл  | 102 x 15 мм | Бумажная этикетка для записи данных                   | –         | 64 / 512                    |
| 10.252.020 | 10 мл  | 102 x 15 мм | Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере | стерильн. | 100 / 500                   |
| 10.252.030 | 10 мл  | 102 x 15 мм | Пластиковая этикетка, прозрачная, со светозащитой     | –         | 64 / 512                    |

## Urin-Monovette® с борной кислотой

со стабилизатором для микробиологических исследований

| Кат. №      | Объем  | Д x Ø       | Исполнение (зеленого цвета)                              | Чистота   | Упаковка (внутр./внеш. уп.) |
|-------------|--------|-------------|--|-----------|-----------------------------|
| 10.256.001  | 3.2 мл | 75 x 13 мм  | Бумажная этикетка для записи данных                      | –         | 64 / 512                    |
| 10.256.021  | 3.2 мл | 75 x 13 мм  | Бумажная этикетка для записи данных, поштучно в блистере | стерильн. | 100 / 500                   |
| 10.260.001* | 8.5 мл | 92 x 15 мм  | Бумажная этикетка для записи данных                      | –         | 64 / 512                    |
| 10.260.021* | 8.5 мл | 92 x 15 мм  | Бумажная этикетка для записи данных, поштучно в блистере | стерильн. | 100 / 500                   |
| 10.253      | 10 мл  | 102 x 15 мм | Пластиковая этикетка, прозрачная                         | –         | 64 / 512                    |
| 10.253.001  | 10 мл  | 102 x 15 мм | Бумажная этикетка для записи данных                      | –         | 64 / 512                    |
| 10.253.020  | 10 мл  | 102 x 15 мм | Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере    | стерильн. | 100 / 500                   |
| 10.253.021  | 10 мл  | 102 x 15 мм | Бумажная этикетка для записи данных, поштучно в блистере | стерильн. | 100 / 500                   |

Другие расходные материалы для преанализа мочи см. на сайте [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

\* Вывод на рынок запланирован на 2-й кв. 2024 г

Если у Вас есть вопросы, мы будем рады Вам помочь!

Посетите наш сайт [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

## ООО «САРШТЕДТ»

198517, Россия,  
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,  
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1

Тел: +7 495 937 52 28

[info.ru@sarstedt.com](mailto:info.ru@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Другая информация,  
видео и заказ образцов  
[sarstedt.com/nft-ru](http://sarstedt.com/nft-ru)