

NFT

Sistema de toma de muestras de orinas

Recogida de muestras cerrada, higiénica y sin aguja

Preanalítica
de orinas
2.0



SARSTEDT

NFT

Needle Free Transfer

El primer sistema de transferencia de orina SARSTEDT para la recogida de muestras cerrada, higiénica y sin agujas

Higiénico. Práctico. Seguro.

¿Cómo se pueden realizar la toma de muestra de orina para que sea aún más segura, higiénica y fácil? Los innovadores productos del sistema NFT brindan la respuesta a esta pregunta. Como el primer sistema de extracción de orina cerrado y sin agujas de SARSTEDT, la nueva familia de productos combina las ventajas de los productos existentes en una única solución.


Nuevos estándares para la preanalítica de orinas



- Disponible como vaso de orina NFT y contenedor de 3 litros NFT para la recogida de orina de 24 horas
- Sistema de extracción sin agujas
- Almacenamiento y transporte seguros
- Transferencia de orina fácil e higiénica con la Monovette® de orina
- No se requiere un contenedor resistente a perforaciones para desechar los productos NFT

Simplemente práctico

La Monovette® de orina permite la obtención higiénica de la orina y también es adecuada como recipiente de análisis para tiras reactivas, analizadores y como tubo de centrifuga para la recolección de sedimentos

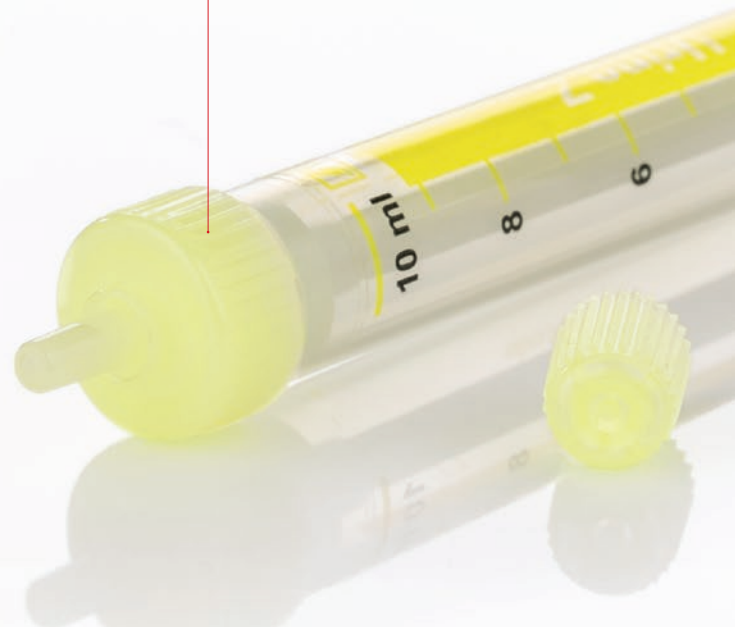


Novedad

Con la nueva función de extracción, ya no se necesita una aguja. La Monovette® de orina penetra fácilmente en la novedosa membrana NFT.


Tras una cómoda extracción, el acceso se vuelve a cerrar inmediatamente de forma hermética e higiénica, incluso después de varias extracciones.

No hay riesgo de infección debido a una lesión por pinchazo de aguja.

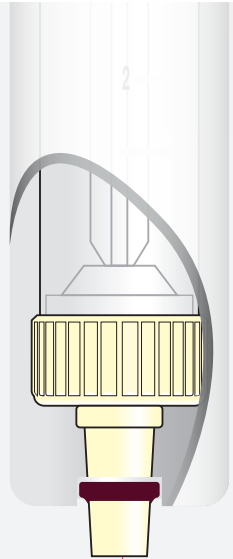

CONVINCENTE

- ✓ **Riesgo minimizado de lesiones y más seguridad de la aplicación** para el personal y el paciente gracias a la recogida de muestras sin agujas
- ✓ **Ahorro en la eliminación**, ya que los componentes del sistema NFT no tienen que eliminarse por separado

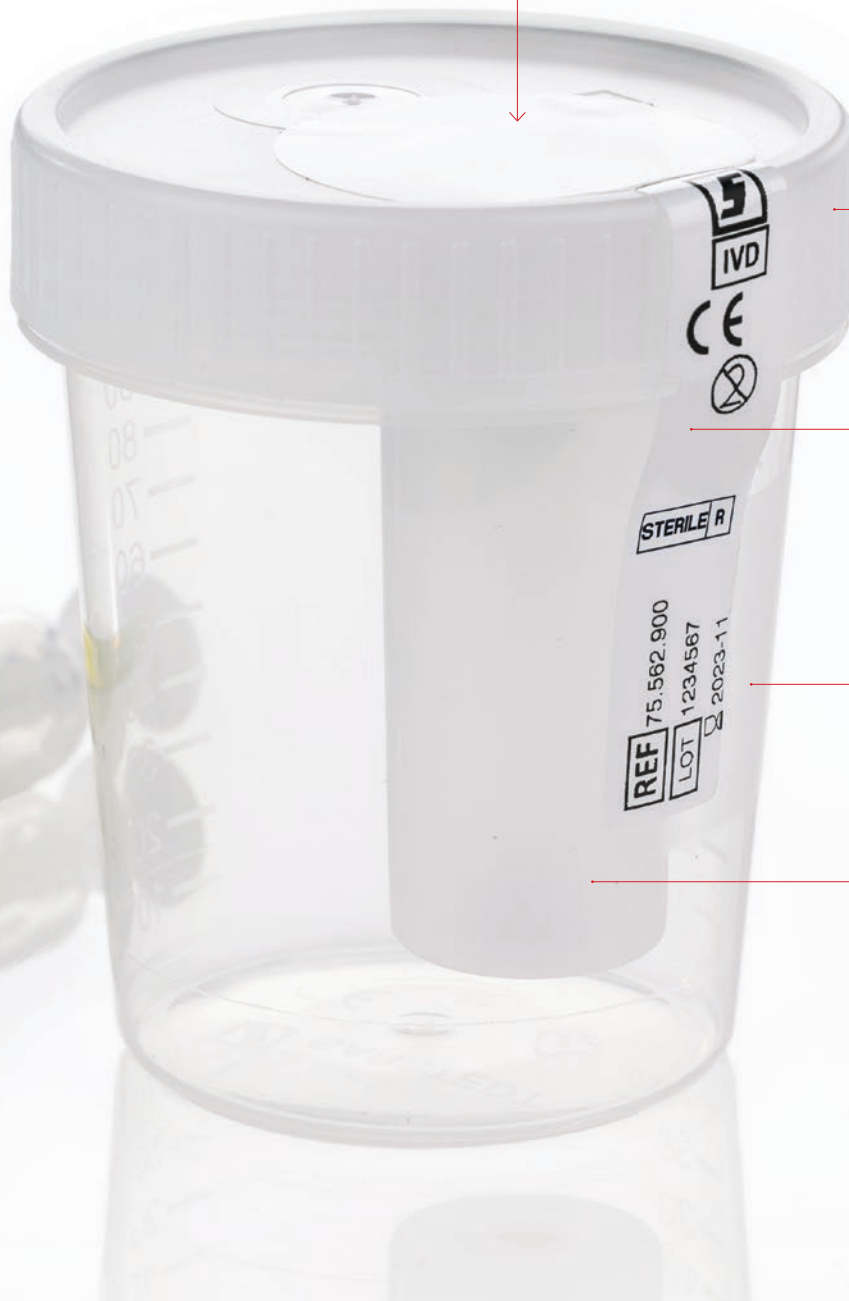

Estanco y libre de olores

Tapón de rosca con unidad de transferencia

Sellado

La etiqueta de seguridad indica la esterilidad interna del vaso de orina NFT cuando está intacto

Transparencia

Recipiente altamente transparente fabricado en robusto polipropileno (PP) para una buena evaluación visual

Innovador

Unidad de transferencia sin aguja con membrana NFT perforable

NFT

Sistema de extracción de orina

La mejor combinación de diferentes sistemas

El sistema NFT con Monovette® de orina, vaso de orina y contenedor de recogida de orina garantiza unas condiciones de trabajo higiénicas durante todo el proceso de recogida de muestras:

- Con la Monovette® de orina y la punta cánula de aspiración, puede llevar a cabo el proceso de recogida sin agujas, incluso con una cantidad de llenado muy pequeña. No se requiere una unidad de transferencia separada como en los sistemas de vacío.
- El manejo es intuitivo y puede aprender rápidamente y sin mucho esfuerzo de formación.
- Con la Monovette® de orina, el proceso de extracción se puede repetir, si fuera necesario, gracias al principio de aspiración; no existe el riesgo de pérdida de función por una aplicación incorrecta.
- Gracias a la sofisticada función de extracción sin aguja, se minimiza el riesgo de lesiones para el personal y los pacientes.
- Después de la extracción, los productos del sistema NFT no tienen que desecharse por separado; esto ahorra tiempo y dinero en comparación con los productos con una aguja integrada.

Sofisticado

El contenedor de recogida de orina NFT con un volumen de 3.000 ml, asa ergonómica, gran diámetro de apertura y mirilla transparente graduada en intervalos de 100 ml



SARSTEDT

Monovette® de orina – trabajo higiénico con poca manipulación

- La Monovette® de orina permite la recogida de muestras higiénica y sin agujas en los recipientes de recogida o en los sistemas de drenaje de orina.
- Se puede realizar un análisis directamente en la Monovette® de orina con tiras reactivas disponibles en el mercado.
- La Monovette® de orina es adecuada para el transporte y el envío de acuerdo con las regulaciones de embalaje P650 de ADR e IATA. Se puede utilizar en la centrifuga para extracción de sedimentos y en analizadores.



Manipulación sencilla: Vaso de orina NFT



Cómodo para la recogida de orina 24 horas: contenedor de recogida de orina NFT



Incluso con el contenedor de recogida de orina NFT de gran volumen, la toma de muestras sigue siendo higiénica gracias a la función de recogida cerrada.



Consulte el tutorial sobre cómo manejar fácilmente los productos NFT:
sarstedt.com/nft-tu-es

SOLICITE UNA MUESTRA DE PRODUCTO GRATUITA



sarstedt.com/nft-sa-es

Con el sistema de extracción de orina NFT, SARSTEDT establece nuevos estándares

Solo una recogida limpia y correcta de las muestras garantiza unos resultados analíticos correctos. Los productos del sistema NFT de SARSTEDT establecen estándares para los preanálisis rutinarios y minuciosos en relación con la máxima seguridad para usuarios y pacientes.

Preanalítica
de orinas
2.0



Los productos NFT no necesitan desecharse en - contenedores de eliminación punzocortantes.



 **SARSTEDT**

Vaso de orina NFT 100 ml

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	con etiqueta de seguridad y unidad de transferencia	esterilizado	200 / 200

Contenedor de recogida de orina NFT 3,0 l

Referencia	Volumen	L x A x H	Versión	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
77.575.900	3.000 ml	125 x 130 x 246 mm	con unidad de transferencia y etiqueta del paciente, diámetro de apertura 80 mm	–	30 / 30

Monovette® Z de orina; sin preparación

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión (amarillo)	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel para escritura	–	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	–	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel, para escritura	–	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente	–	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	–	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, con protección contra la luz	–	64 / 512

Monovette® de orina con ácido bórico; con estabilizador para estudios microbiológicos

Referencia	Volumen	L x Ø	Versión (verde)	Pureza	Presentación (caja interna/caja externa)
10.256*	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de plástico, transparente	–	64 / 512
10.256.020*	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente	–	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel para escritura	–	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico, transparente, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de plástico para escritura, envase individual en blíster	esterilizado	100 / 500

Encontrará más consumibles para la preanalítica de orinas en www.sarstedt.com

*Nueva introducción prevista 3.º trimestre de 2023

SARSTEDT S.A.U.

Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès

Tel.: +34 93 846 41 03

Fax: +34 93 846 39 78

Servicio de atención al cliente en Alemania
Teléfono 0800 0 83 305 0

info.es@sarstedt.com

www.sarstedt.com



Más información, vídeos
y pedido de muestras:
sarstedt.com/nft-es

Si tiene alguna duda,
estaremos encantados de atenderle.

Visite también nuestro sitio web: www.sarstedt.com