

# NFT

## Sistema de colheita de urina

Colheita higiênica, em sistema fechado e sem agulha

Pré-análise  
de urina  
**2.0**



**SARSTEDT**

# NFT

## Transferência sem agulha

O primeiro sistema de colheita de urina da SARSTEDT, para a colheita higiênica e sem agulha de amostras de urina

### Higiênico. Prático. Seguro.

Como tornar a colheita de amostras de urina ainda mais segura, higiênica e fácil? A resposta a esta questão pode ser encontrada nos inovadores produtos do sistema NFT. Como o primeiro sistema de colheita de urina fechado e sem agulha da SARSTEDT, a nova família de produtos combina as vantagens dos produtos existentes numa só solução.


### Novos padrões para pré-análise de urina



- Disponível na versão de contentor de urina de 100 ml e também na de 3 litros, para colheita de urina de 24 horas
- Sistema de colheita sem agulha
- Armazenamento e transporte seguros
- Transferência de urina simples e higiênica com a Monovette® de Urina
- Os contentores NFT não necessitam de ser eliminados em contentores de corto-perfurantes

### Simplesmente prático

A Monovette® de Urina permite a colheita higiênica de urina e também é apropriada, como tubo primário, para uso com tiras de teste e analisadores e também como tubo de centrifuga, para a recolha de sedimento urinário

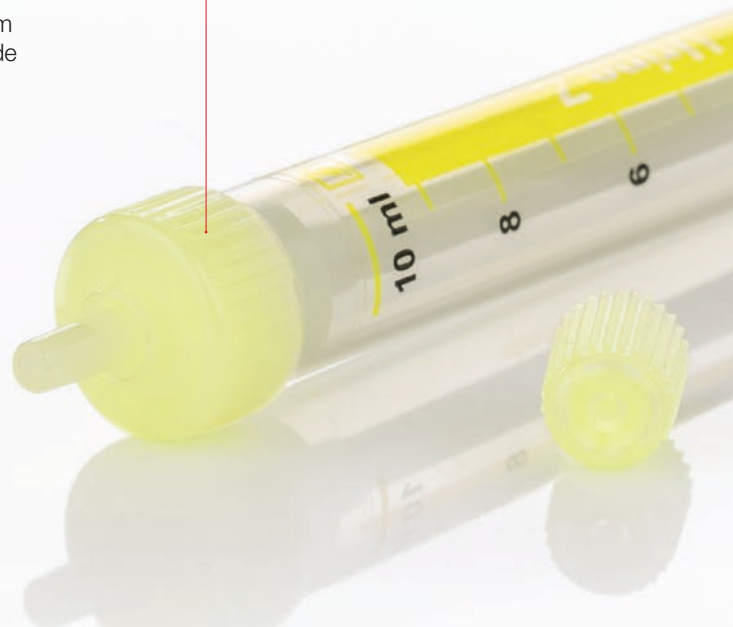


## Novidade

Com a nova função de colheita sem agulha, estas deixam de ser necessárias. A Monovette® de Urina penetra facilmente a inovadora membrana NFT.


Após a colheita fácil, o acesso veda novamente de forma firme e higiênica, mesmo após múltiplas colheitas.

Não existe risco de infecção por ferimentos com agulhas.

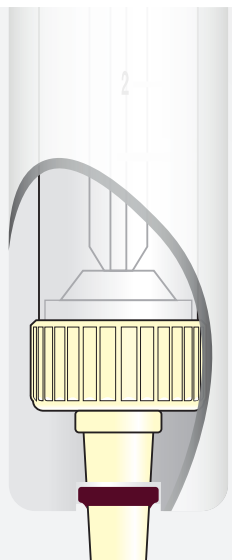

# CONVINCENTE

- ✓ **Minimização do risco de lesões e mais segurança na aplicação** para profissionais de saúde e pacientes, através do sistema de colheita sem agulha
- ✓ **Economia na eliminação**, pois os componentes do sistema NFT não têm de ser eliminados, separadamente, em contentores de corto-perfurantes

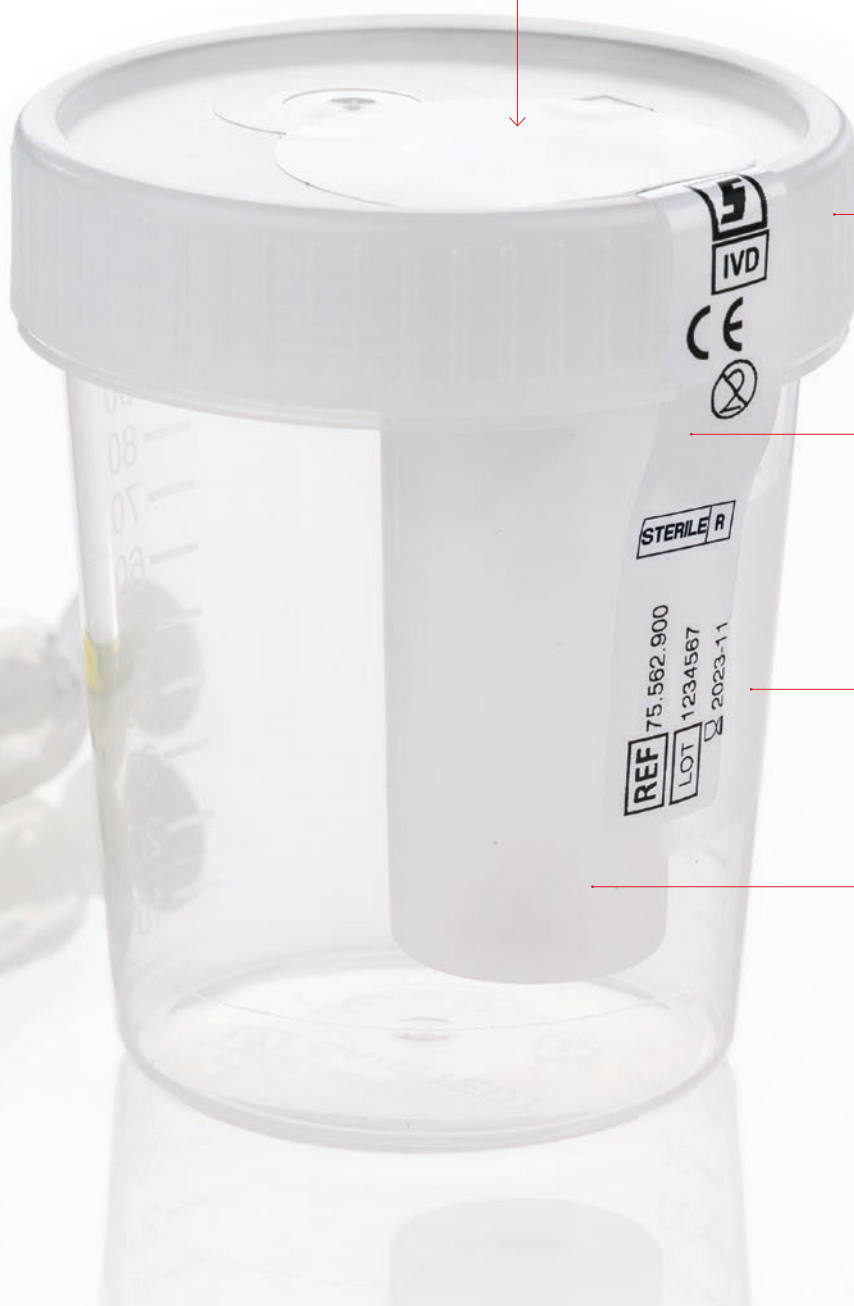

### Estanque a líquidos e odores

Tampa de rosca com unidade de transferência

### Selado

Quando intacta, a etiqueta de segurança indica a esterilidade interna do contentor NFT

### Transparente

Recipiente robusto e altamente transparente, feito em polipropileno (PP), para uma boa visualização

### Inovador

Unidade de transferência sem agulha, com membrana NFT perfurável

# NFT

## Sistema de colheita de urina

O melhor de todos os sistemas

O sistema NFT com Monovette<sup>®</sup>, de Urina contentor NFT e contentor de urina de 24 horas NFT garante condições de trabalho higiénicas durante todo o processo de colheita de amostras:

- Com a Monovette<sup>®</sup> de Urina e a respetiva cânula incluída, é possível realizar o processo de colheita sem agulha, mesmo com uma quantidade muito pequena de amostra. Não é necessária uma unidade de transferência separada, como sucede com os sistemas de vácuo.
- O manuseamento é intuitivo e pode ser aprendido rapidamente e sem elevado nível de formação.
- Com a Monovette<sup>®</sup> de Urina, o processo de colheita pode ser repetido, se necessário, graças ao princípio de aspiração. Não existe risco de perda de função devido a um uso incorreto.
- Graças à sofisticada função de colheita sem agulha, o risco de lesões para funcionários e pacientes é minimizado.
- Após a colheita, os produtos do sistema NFT não têm de ser eliminados em separado o que poupa tempo e dinheiro em comparação com produtos com agulha integrada.

### Bem idealizado

O contentor opaco de urina de 24 horas NFT com 3 litros de volume e pega ergonómica, tem também uma ampla abertura de tampa e uma janela de inspeção transparente, graduada em incrementos de 100 ml



## Monovette® de Urina – trabalho higiénico em apenas algumas etapas

- A Monovette® de Urina permite a colheita higiénica de amostras, sem recurso a agulhas, a partir de contentores de colheita de urina ou de sistemas de drenagem de urina.
- A análise de urina com tiras de teste disponíveis comercialmente, pode ser realizada diretamente na Monovette® de Urina.
- O Monovette® para urina é adequado para transporte e expedição de acordo com o regulamento para embalagens P650 do ADR e IATA. Pode ser usado na centrifuga e em analisadores para extrair sedimentos..



## Manuseamento fácil: Contentor NFT de 100 ml



## Conveniente para colheita de urina de 24 horas: Contentor NFT de 3 litros



O contentor NFT de 3 litros garante que a colheita de urina seja realizada de forma higiénica, graças à função de colheita de urina em sistema fechado.



Consulte o tutorial para o manuseamento fácil dos produtos NFT:  
[sarstedt.com/nft-tu-pt](http://sarstedt.com/nft-tu-pt)

# PEÇA UMA AMOSTRA GRATUITA



[sarstedt.com/nft-sa-pt](http://sarstedt.com/nft-sa-pt)

## A SARSTEDT está a definir novos padrões com o sistema de colheita de urina NFT

Apenas a colheita limpa e correta de amostras garante resultados analíticos corretos. Os produtos do sistema NFT da SARSTEDT estabelecem o padrão para uma pré-análise precisa, adequada a uma utilização de rotina e que combina com a máxima segurança para utilizadores e pacientes.

Pré-análise  
de urina  
**2.0**



Os produtos NFT não têm de ser eliminados em separado.



 **SARSTEDT**

## Contentor NFT 100 ml

Ref. <sup>a</sup>	Volume	C x Ø	Modelo	Pureza	Embalagem (caixa interna/caixa externa)
75.562.900	100 ml	72 x 62 mm	com etiqueta de segurança e cânula de transferência	estéril	200 / 200

## Contentor NFT 3,0 l

Ref. <sup>a</sup>	Volume	C x L x A	Modelo	Pureza	Embalagem (caixa interna/caixa externa)
77.575.900	3000 ml	125 x 130 x 246 mm	com unidade de transferência e etiqueta do paciente, diâmetro de abertura 80 mm	-	30 / 30

## Monovette<sup>®</sup> Z para urina - sem preparação

Ref. <sup>a</sup>	Volume	C x Ø	Modelo (amarelo)	Pureza	Embalagem (caixa interna/caixa externa)
10.250.001	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.258	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente	-	64 / 512
10.258.001	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.258.020	8,5 ml	92 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente, individualmente em blister	estéril	100 / 500
10.252	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente	-	64 / 512
10.252.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.252.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente, individualmente em blister	estéril	100 / 500
10.252.030	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente, com proteção contra luz	-	64 / 512

## Monovette<sup>®</sup> de Urina com - ácido bórico: com estabilizador para testes microbiológicos

Ref. <sup>a</sup>	Volume	C x Ø	Modelo (verde)	Pureza	Embalagem (caixa interna/caixa externa)
10.256*	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta plástica, transparente	-	64 / 512
10.256.020*	3,2 ml	75 x 13 mm	Etiqueta plástica, transparente, individualmente em blister	estéril	100 / 500
10.253	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente	-	64 / 512
10.253.001	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável	-	64 / 512
10.253.020	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta plástica, transparente, individualmente em blister	estéril	100 / 500
10.253.021	10 ml	102 x 15 mm	Etiqueta de papel, gravável, individual em blister	estéril	100 / 500

Outros consumíveis para pré-análise de urina podem ser encontrados em [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)

\*Novo lançamento previsto no 3.º trimestre de 2023

## SARSTEDT S.A.

Sintra Business Park, Edifício 8  
Zona Industrial da Abrunheira  
2710-089 Sintra

Tel.: +351 21 915 6010

Fax: +351 21 915 6019

Atendimento ao cliente na Alemanha

Telefone +55 11 4152 2233

[info.pt@sarstedt.com](mailto:info.pt@sarstedt.com)

[www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)



Mais informações,  
vídeos e pedidos de amostras:  
[sarstedt.com/nft-pt](http://sarstedt.com/nft-pt)

Em caso de dúvidas:  
Teremos todo o gosto em ajudar!

Visite o nosso site: [www.sarstedt.com](http://www.sarstedt.com)