

NFT

Система сбора мочи

Гигиеничное взятие образцов с помощью закрытой безыгольной системы

Преаналитика
мочи
2.0



NFT

Needle Free Transfer

Первая система сбора мочи от SARSTEDT для гигиеничного и безыгольного взятия образцов

Гигиенично. Практично. Надежно.

Как сделать процесс сбора мочи еще безопаснее, гигиеничнее и удобнее? Ответ на этот вопрос дает инновационная продукция системы NFT. Первая закрытая и безыгольная система сбора мочи от SARSTEDT, представляющая собой новую серию продукции, сочетает в себе преимущества уже существующих продуктов в одном решении.

Новый стандарт в сфере преаналитики мочи



- Система доступна в виде контейнера NFT для сбора мочи, а также контейнера NFT для сбора суточной мочи объемом 3 л
- Безыгольная система сбора мочи
- Безопасность хранения и транспортировки
- Удобный и гигиеничный перенос мочи с помощью Urin-Monovette®
- Для утилизации продуктов NFT не требуется контейнер для утилизации острых предметов

Удобно и практично


Urine-Monovette® обеспечивает гигиеничный сбор мочи, а также используется в качестве основной пробирки в анализаторах, пробирки для получения осадка и пригодна для погружения в нее тест-полосок



Новинка

Благодаря новой функции безыгольного взятия образцов игла больше не требуется. Urin-Monovette® легко проходит через инновационную мембрану NFT.

После удобного взятия образца система плотно и гигиенично закрывается даже после сбора нескольких образцов. Риск инфицирования от укола иглой отсутствует.

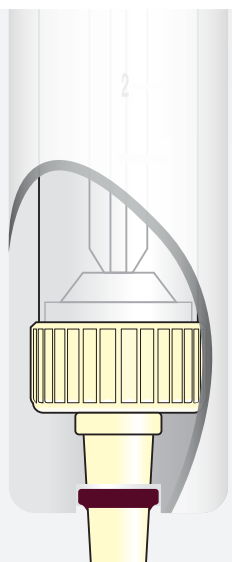

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ


- ✓ **Минимальный риск травм и повышенная безопасность применения** для персонала и пациентов благодаря безыгольному взятию проб
- ✓ **Экономия при утилизации** — компоненты системы NFT не требуют отдельной утилизации в контейнеры для острых предметов

Непроницаемость для жидкости и запаха
Резьбовая крышка с устройством для переноса

Герметичность
При отсутствии повреждений защитная этикетка указывает на стерильность контейнера NFT для сбора мочи

Прозрачность
Высокопрозрачный контейнер из прочного полипропилена для точной визуальной оценки

Инновационность системы
Безыгольное устройство для переноса с прокалываемой мембраной NFT

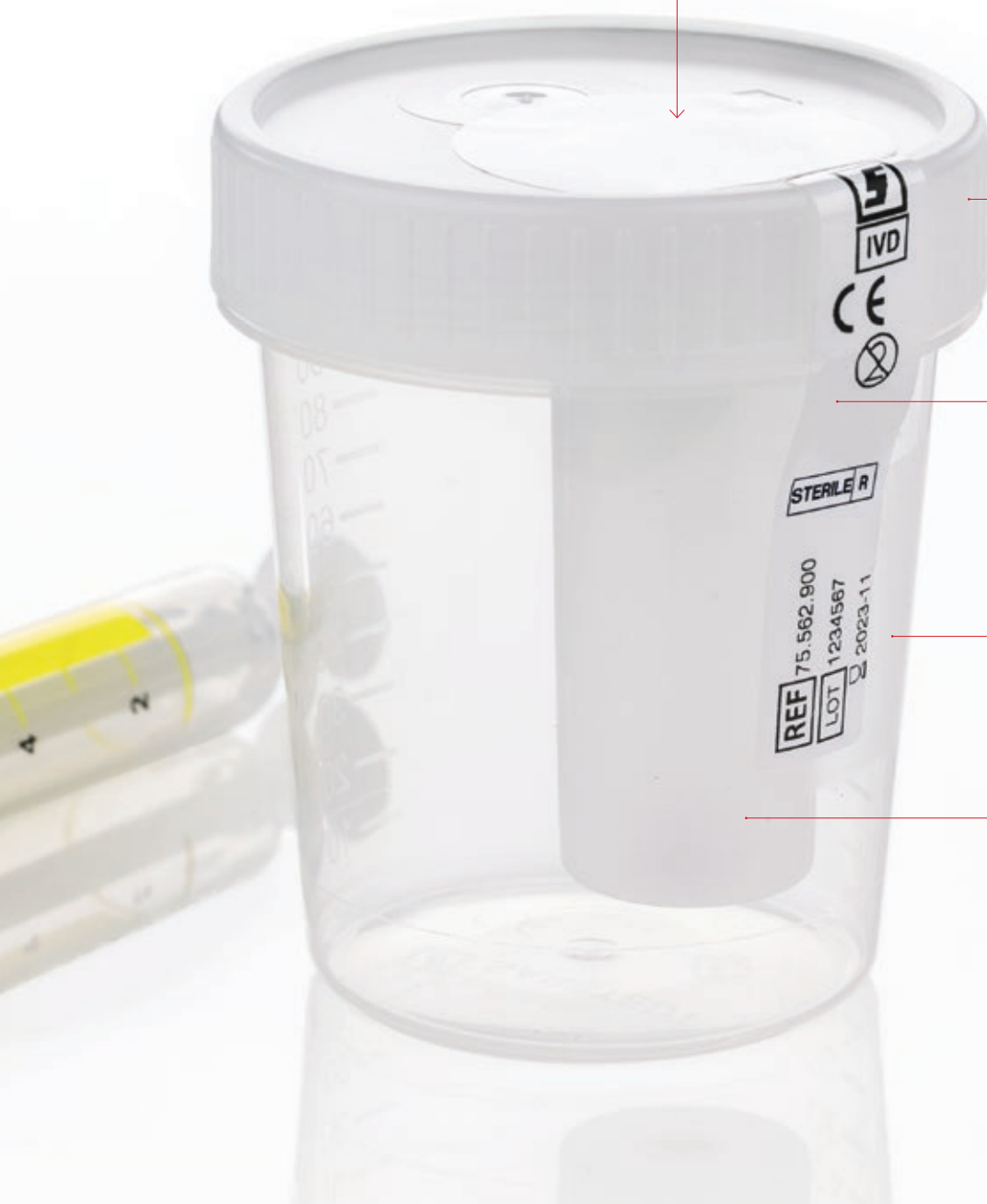

NFT

Система сбора мочи

Лучшее от разных систем

Система NFT с Urin-Monovette®, контейнером NFT для сбора мочи и контейнером NFT для сбора суточной мочи обеспечивает гигиеничность работы на протяжении всего процесса взятия образцов:

- С помощью Urin-Monovette® и прилагаемого аспирационного наконечника Вы можете осуществлять безыгольное взятие образцов даже при очень малом объеме заполнения. В отличие от вакуумных систем отдельное устройство для переноса не требуется.
- Интуитивно понятному использованию можно научиться быстро и без значительных усилий.
- При использовании Urin-Monovette® принцип аспирации позволяет при необходимости повторить процесс сбора - нет риска потери функциональности при многократном использовании.
- Благодаря продуманной безыгольной функции взятия образцов риск травмирования персонала и пациентов сведен к минимуму.
- После взятия образцов продукцию системы NFT не нужно утилизировать отдельно — это экономит время и деньги по сравнению с изделиями со встроенной иглой.

Продуманность конструкции

Контейнер NFT для сбора суточной мочи объемом 3000 мл с эргономичной ручкой, отверстием с большим диаметром и прозрачным смотровым окошком со шкалой с шагом 100 мл



Urin-Monovette® — гигиеничная работа всего за несколько шагов

- Система Urin-Monovette® обеспечивает гигиеничное безыгольное взятие образцов из контейнеров для сбора или систем дренажа мочи.
- Анализ мочи с использованием имеющихся в продаже тест-полосок можно проводить непосредственно в заполненной системе Urin-Monovette®.
- Система Urin-Monovette® подходит для транспортировки и сортировки в соответствии с предписаниями по упаковке P650 ADR и IATA. Ее можно использовать для получения осадка в центрифуге и анализаторах.



Удобство для пользователя: контейнер NFT для сбора мочи



Удобное решение для суточного сбора мочи: контейнер NFT для суточного сбора мочи



Даже при использовании большого контейнера NFT для суточного сбора мочи получение образцов остается гигиенически чистой процедурой благодаря закрытой конструкции системы.



Ознакомьтесь с руководством по обращению с продукцией NFT: sarstedt.com/nft-tu-ru

ЗАКАЖИТЕ ОБРАЗЕЦ ПРОДУКЦИИ БЕСПЛАТНО



sarstedt.com/nft-sa-ru

SARSTEDT устанавливает новые стандарты с помощью системы NFT сбора мочи

Только аккуратный и точный сбор проб может обеспечить достоверность результатов анализа. Продукты системы NFT от SARSTEDT устанавливают новый стандарт повседневной преаналитики в сочетании с максимальной безопасностью как для пользователя, так и для пациента.

Преаналитика
МОЧИ
2.0



Отдельная утилизация продукции NFT не требуется.



 **SARSTEDT**

Контейнер NFT для сбора мочи 100 мл

Кат. №	Объем	Д x Ø	Исполнение	Чистота	Упаковка (внутр./внеш. уп.)
75.562.900	100 мл	72 x 62 мм	с защитной этикеткой и устройством для переноса	стерильн.	200 / 200

Контейнер NFT для суточного сбора мочи

Кат. №	Объем	Д x Ш x В	Исполнение	Чистота	Упаковка (внутр./внеш. уп.)
77.575.900	3000 мл	125 x 130 x 246 мм	с устройством для переноса и этикеткой с данными пациента, диаметр отверстия 80 мм	–	30 / 30

Urin-Monovette® Z — без добавок

Кат. №	Объем	Д x Ø	Исполнение (желтого цвета)	Чистота	Упаковка (внутр./внеш. уп.)
10.250.001	3,2 мл	75 x 13 мм	Бумажная этикетка для записи данных	–	64 / 512
10.258	8,5 мл	92 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная	–	64 / 512
10.258.001	8,5 мл	92 x 15 мм	Бумажная этикетка для записи данных	–	64 / 512
10.258.020	8,5 мл	92 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500
10.252	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная	–	64 / 512
10.252.001	10 мл	102 x 15 мм	Бумажная этикетка для записи данных	–	64 / 512
10.252.020	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500
10.252.030	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, со светозащитой	–	64 / 512

Urin-Monovette® с борной кислотой — со стабилизатором для микробиологических исследований

Кат. №	Объем	Д x Ø	Исполнение (зеленого цвета)	Чистота	Упаковка (внутр./внеш. уп.)
10.256*	3,2 мл	75 x 13 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная	–	64 / 512
10.256.020*	3,2 мл	75 x 13 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500
10.253	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная	–	64 / 512
10.253.001	10 мл	102 x 15 мм	Бумажная этикетка для записи данных	–	64 / 512
10.253.020	10 мл	102 x 15 мм	Пластиковая этикетка, прозрачная, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500
10.253.021	10 мл	102 x 15 мм	Бумажная этикетка для записи данных, поштучно в блистере	стерильн.	100 / 500

Другие расходные материалы для преаналитики мочи см. на сайте www.sarstedt.com

*Выход на рынок запланирован на 3-й кв. 2023 г

ООО «САРШТЕДТ»

198517, Россия,
г. Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Новые Заводы, д. 58, корп. 4, стр.1

Тел: +7 495 937 52 28
info.ru@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Другая информация,
видео и заказ образцов
sarstedt.com/nft-ru

Если у Вас есть вопросы, мы будем рады Вам помочь!

Посетите наш сайт www.sarstedt.com