

Produtos de Segurança

Connosco já se encontra protegido



Pré-análise

Transposição para a Lei Portuguesa da Diretiva Europeia 2010/32/EU

Diretiva Europeia para a prevenção de acidentes por punção em ambiente hospitalar e no setor de cuidados de saúde

A Diretiva Europeia 2010/32/EU para a prevenção de acidentes por punção em ambiente hospitalar e no setor de cuidados de saúde, a ser transposta no âmbito nacional, tem como objetivo proporcionar o ambiente de trabalho mais seguro possível para os profissionais do setor de cuidados de saúde.

Os profissionais do setor da saúde correm o risco de punções acidentais, podendo ser infectados por patógenos sanguíneos (vírus, bactérias, fungos e outros micro-organismos). Os vírus mais prevalentes são VIH, Hepatite B (HBV) e C (HCV), mas existem mais de 20 infeções sanguíneas que podem ser transmitidas.

As medidas preventivas e protetoras obrigatórias incluem:

- Eliminar o uso desnecessário de cortantes e perfurantes
- Incorporar dispositivos com mecanismos de proteção de segurança
- Implementar medidas seguras de trabalho
- Implementar procedimentos de segurança para a utilização e eliminação de corto-perfurantes
- Banir a recapsulação de agulhas utilizadas
- Utilizar equipamento de proteção pessoal

Publicações


- Estudo: Needlestick – how to prevent needlestick injuries, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, fonte: <http://osha.europa.eu/data/case-studies/needlestick-2014-how-to-prevent-needlestick-injuries-effectively>
- E-Facts 40: Gefährdungsbeurteilung und Nadelstichverletzungen, EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, fonte: <http://osha.europa.eu/de/publications/e-facts/efact40>
- Informação NHS, fonte: http://www.nhsemployers.org/EmploymentPolicyAndPractice/European_employment_policy/Pages/Initiatives-On-Needlestick-Injuries.aspx

Agulha de Segurança - Segurança para a colheita de sangue de rotina



Sistema pré-acoplado

A agulha de segurança está sempre pronta a utilizar. Não existe necessidade de acoplá-la ao adaptador da agulha.

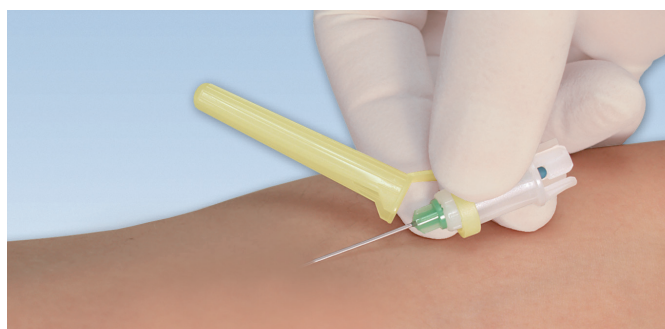

Punção segura

No ângulo raso recomendado, especialmente para veias frágeis

Produtos de Segurança

A solução de segurança completa na recolha de sangue da SARSTEDT




Contentores de cortantes Multi-Safe

- Eliminação segura e intuitiva de cortos perfurantes
- O tamanho da abertura pode ser customizado partindo as duas secções perfuradas antes da acoplagem da tampa.
- Dispositivo de remoção universal para sistemas Luer Lock e canetas de insulina

Ativação da proteção da agulha com uma só mão, adaptador pré-acoplado, material e embalagem otimizados

A utilização do protetor da agulha de segurança Multifly® com uma só mão permite a máxima segurança e facilidade de manuseamento. O adaptador da S-Monovette® da agulha de segurança Multifly® já se encontra acoplado, providenciando uma unidade completa pronta a usar. A tubuladura e embalagem são especialmente desenhadas para as necessidades da colheita de sangue e subsequente eliminação em contentores de cortantes.

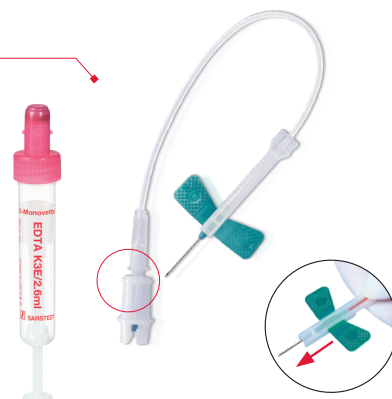

Protetor de segurança da agulha

O protetor especial da agulha de segurança permite que no final da colheita de sangue a agulha seja trancada na sua manga protectora. Subsequentemente, a unidade completa é descartada num contentor de cortantes apropriado.

Lanceta de Segurança – Recolha de amostra fácil e segura com aumento do conforto do paciente

- Produto estéril de uso único que previne o risco de punção acidental, devido ao facto de a agulha e a lâmina permanecerem protegidas no interior da lanceta, antes e após a utilização.
- Gama de diâmetros de agulha e lâmina, com uma profundidade de penetração pré-definida, que permitem a recolha da amostra do dedo, lóbulo da orelha ou calcanhar.
- Ativada e pronta a utilizar, permitindo uma fácil remoção da tampa protectora e a activação do botão de disparo.
- Corpo da lanceta ergonómico, com abas laterais e zona em relevo assegurando um manuseamento seguro e adequado.



Em caso de dúvidas,
teremos todo o prazer em ajudar!

Visite também o nosso site:
www.sarstedt.com

Fluxo de trabalho préanalítico da SARSTEDT

Utilize a sinergia de
sistemas coordenados.



SARSTEDT S.A.

Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra

Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019

info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Descubra as
soluções de 360°
para os seus sistemas
pré-analíticos da
SARSTEDT



workflow.sarstedt.com